



**REDIOX**

**Athletic**

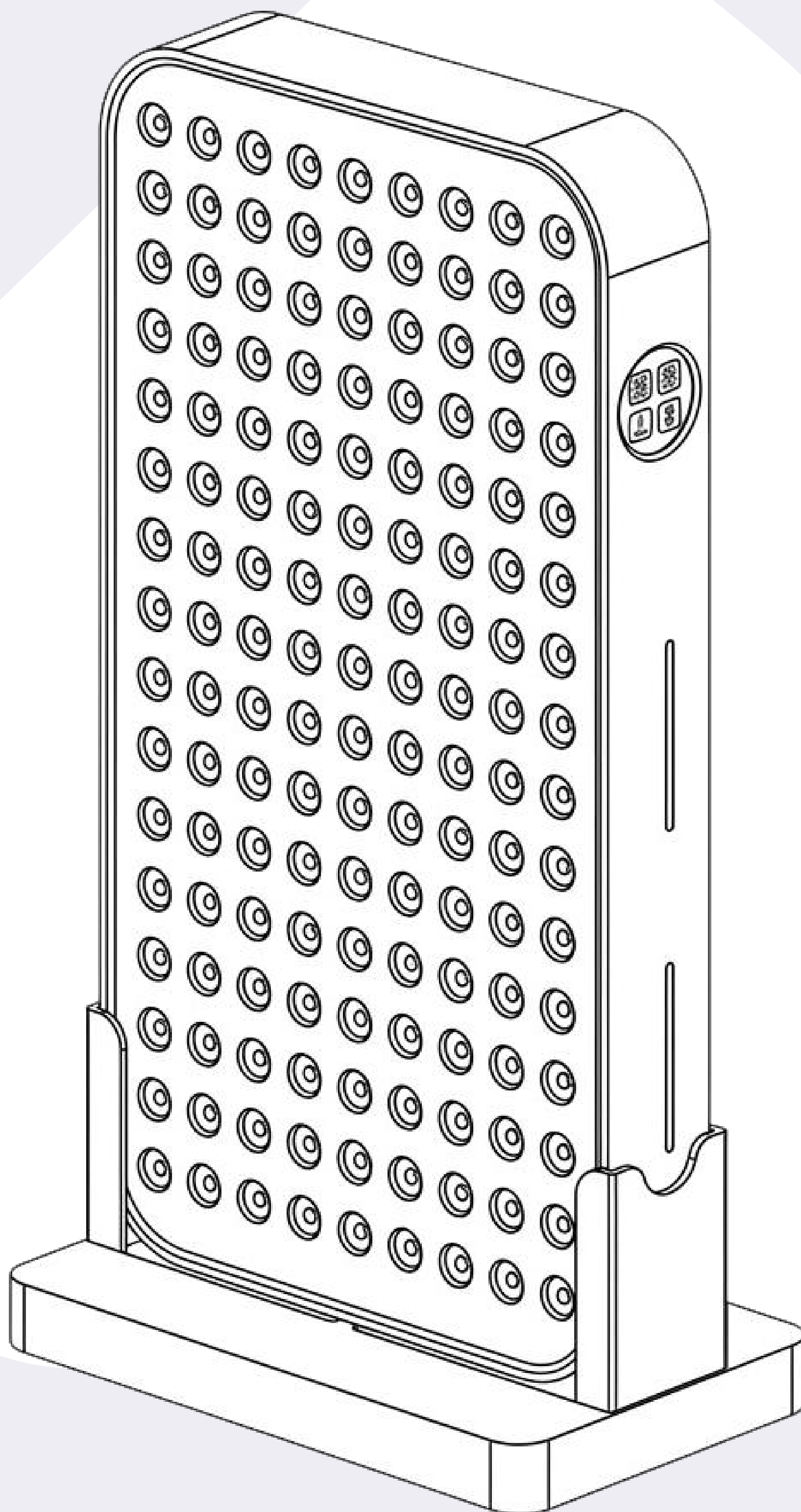

**Home**

**Ръководство на  
потребителя**

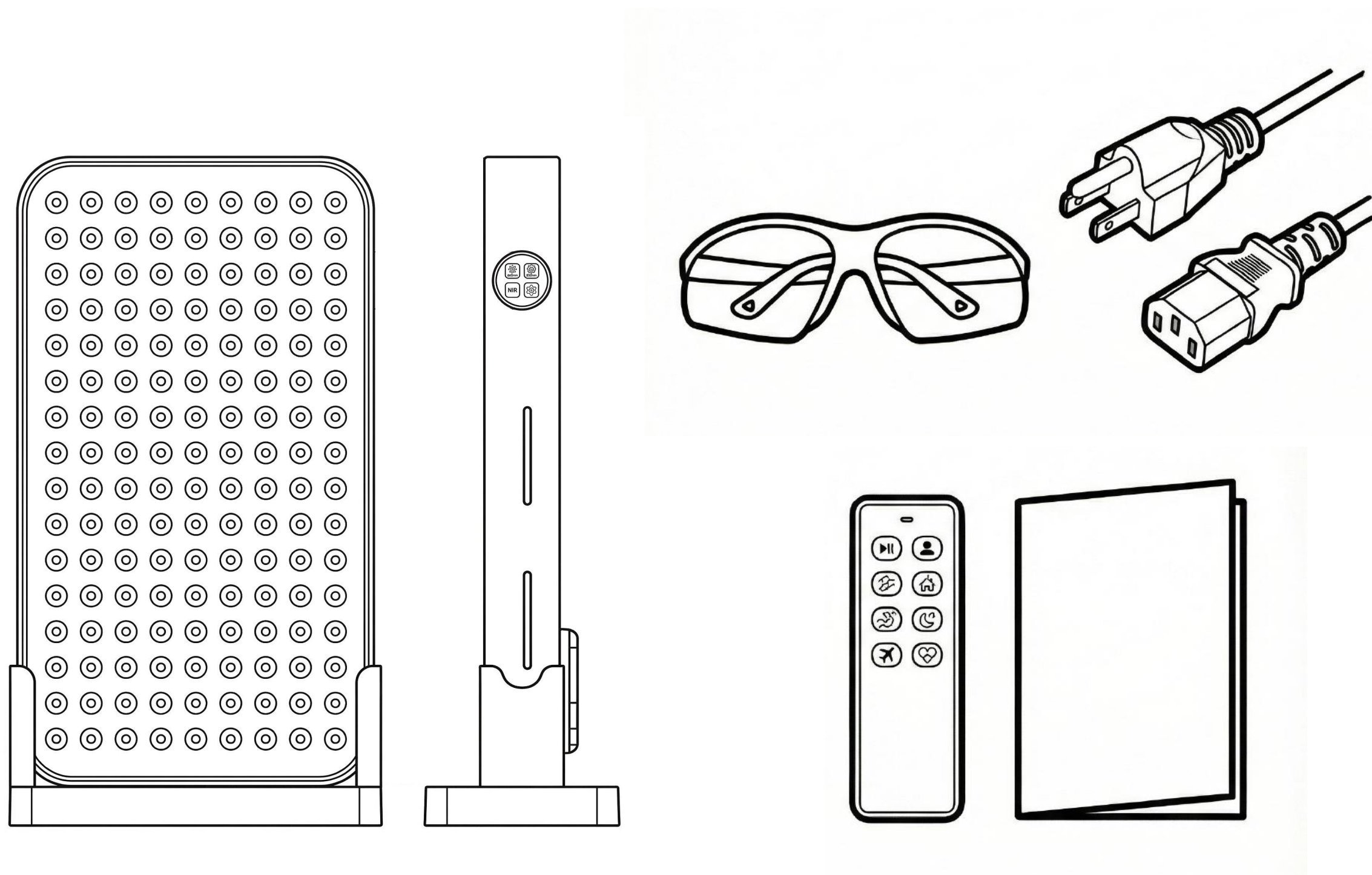

# I. Какво включва комплектът

## 1. Светлинен панел Home

## 2. Метална стойка

## 3. Монтажни елементи за стойката и панела

- 2 болта
- 2 шайби
- 2 гайки
- 4 винта за закрепване на панела към стойката

## 4. Инструменти за монтаж

- кръстата отвертка
- гаечен / L-образен ключ

## 5. Захранващ кабел

## 6. Дистанционно управление

## 7. Защитни очила

## 8. Ръководство за употреба



Преди да започнете сглобяването, проверете дали всички елементи са налични и без видими повреди.

## II. Сглобяване на стойката и панела




Работете върху равна и стабилна повърхност.

### Стъпка 1: Подготовка

1. Извадете панела и стойката от кашона.
2. Поставете панела **лежал с лицето (диодите) надолу върху мека повърхност** – одеяло или мек килим, за да не се надраска.
3. Подредете металната основа, рамката, болтовете, шайбите, гайките и винтовете.

### Стъпка 2: Сглобяване на стойката

1. Поставете **металната основа** с крачетата надолу.
2. Приплъзнете панела вътре в основата
3. От долната страна на основата поставете шайбите и навийте гайките.
4. Затегнете болтовете с включения гаечен ключ, докато стойката стане стабилна, без да пренатягате.

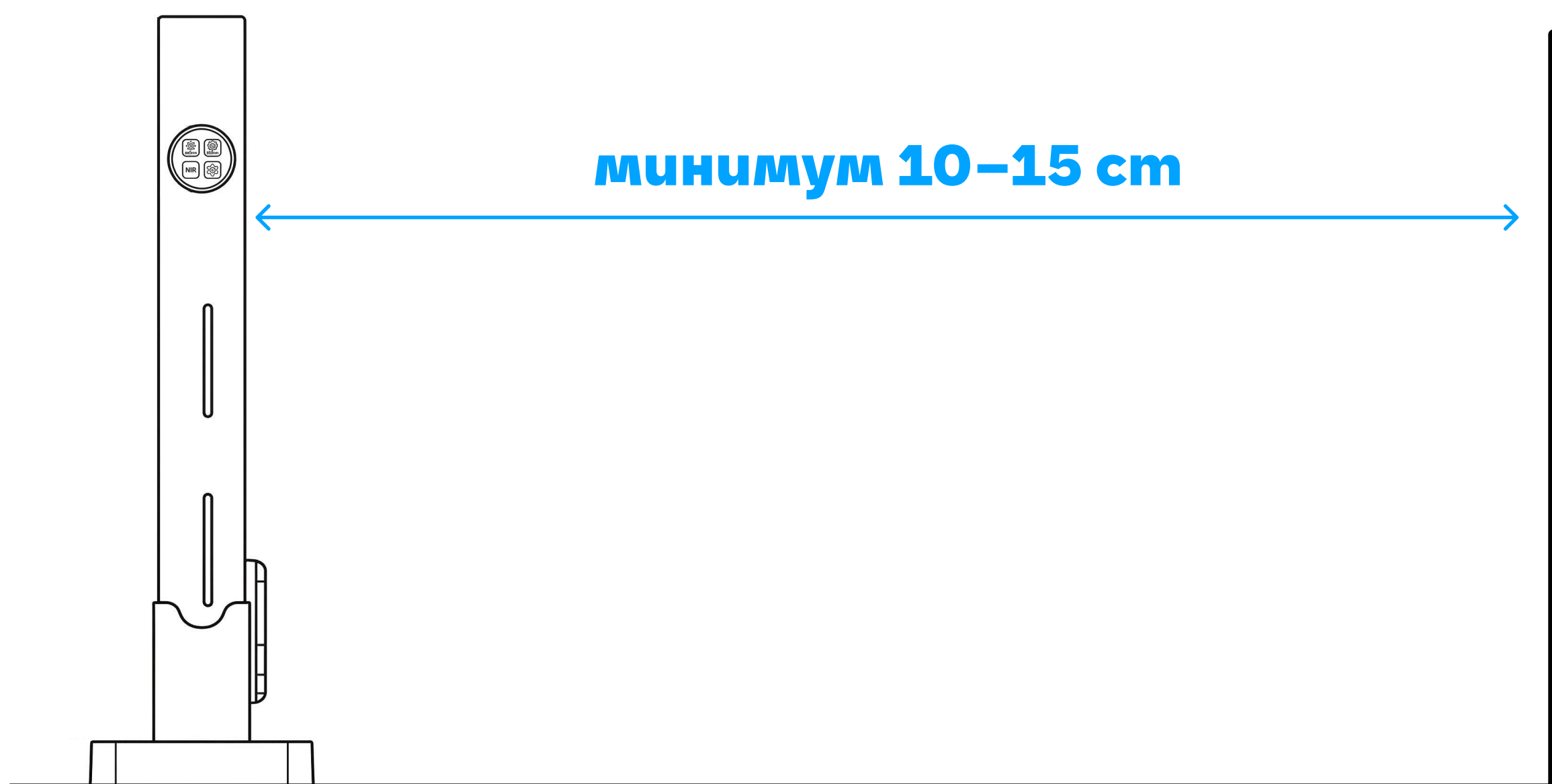

### III. Позициониране и първо включване


1. Поставете панела върху стабилна маса, в близост до електрически контакт или разклонител.
2. Осигурете **минимум 10–15 cm свободно пространство** зад и отстрани на уреда, за да работи охлаждането нормално.

#### Не поставяйте панела:



- **опрян в стена или предмет, който може да блокира вентилационните отвори;**
- **върху мека, нестабилна повърхност, която може да доведе до падане на панела;**
- **в помещения с висока влажност (баня, сауна, басейн).**

## Първо Включване

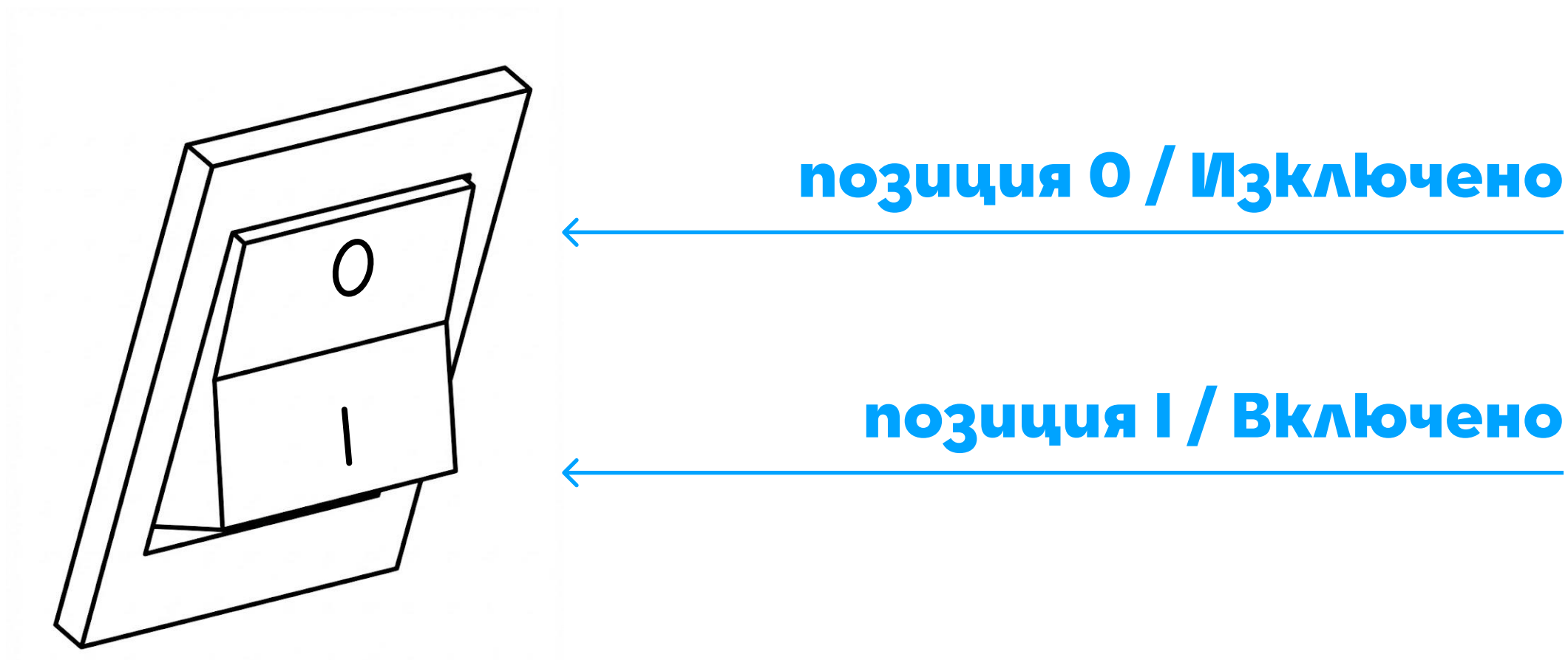


1. Свържете захранващия кабел към панела.
2. Включете щепсела в контакта.
3. На гърба на панела, натиснете захранващия бутон в **позиция I**. LED дисплеят отстрани ще светне и уредът ще премине в режим на готовност.
4. За да изключите панела, преместете бутонна обратно в **позиция 0**.



Когато не използвате уреда за по-дълго, препоръчваме да стои в позиция 0.

## IV. Контрол – LED дисплей и дистанционно

След включване можете да управлявате панела от **LED дисплея** или от **дистанционното управление** (фиг.1).

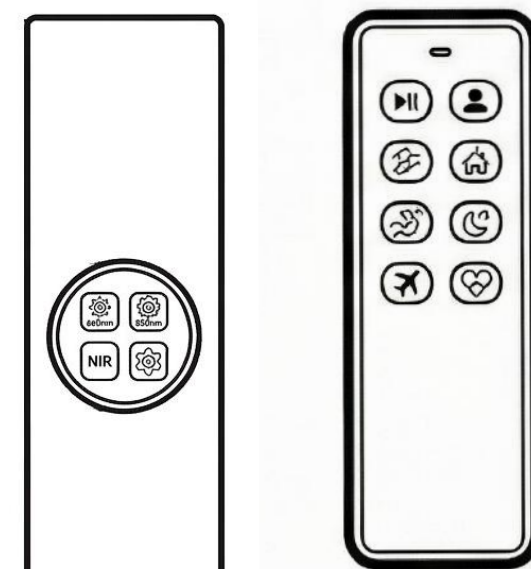

фиг. 1

**На екрана ще видите основни режими:**



### Skin care

грижа за кожата  
(Red & NIR & Green, ~20 мин)



### Fat burning

Горене на мазнини  
(Red & NIR & Pulse, ~30 мин)



### Recovery

Възстановяване след  
натоварване  
(Red & NIR & Pulse, ~30 мин)



### Sleep

Вечерна релаксация  
(Red & NIR, ~20 мин)




### Inflammation

при локален дискомфорт  
(Red & NIR & Blue & Pulse,  
~30 мин)



### Health care

общ тонизиращ режим  
(Red & NIR, ~30 мин)

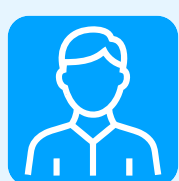

### Mode / Customized

персонализиран режим, който настройвате според  
Вашите предпочитания.

## LED дисплей




### Навигация

Плъзгане наляво – следваща страница с режими

Плъзгане надясно – връщане към предишната страница

## Бутони на екрана

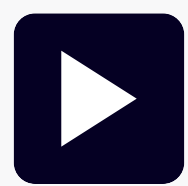

### Play

старт на сесията



### Pause

пауза на сесията



### Cancel

прекратяване на сесията




### Settings

пълен контрол и персонализация (език, яркост и др.)



### Language

избор на език на менюто

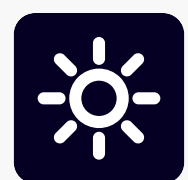

### Brightness

регулиране на яркостта на дисплея



**Екранът се изключва автоматично след кратко време бездействие.**

**За да го активирате, докоснете или плъзнете с пръст.**

## LED Дистанционно управление



Пускане/пауза



Mode / Customized



Skin care



Fat burning



Recovery



Sleep



Inflammation



Health care

### Преди употреба:



1. Поставете батериите (батерия тип AAA x2).
2. Насочете дистанционното към панела при натискане на бутоните.



Всички функции от дистанционното са достъпни и през LED дисплея.

## V. Защита на очите

В комплекта са включени защитни очила.

- Препоръчваме сесиите да се провеждат със **затворени очи** или с поставени очила, независимо кой режим използвате.
- Червената светлина има нискоинтензивното излъчване и се изследва за потенциални ползи за зрителния комфорт, но поради високата мощност на панела и възможно близко разстояние, е важно да защитите очите си.



**При наличие на офталмологично заболяване, прекарана операция на очите или повишена фоточувствителност, се консултирайте с офталмолог преди употреба.**

## VI. Поддръжка и съхранение

1. Използвайте панела само в **сухи, добре проветриви помещения.**
2. Не го излагайте на влага, **пара или конденз.**
3. Не покривайте вентилационните отвори по време на работа.
4. Преди включване проверявайте дали кабелът и контактът са **сухи и неповредени.**
5. При продължителна работа е нормално корпусът леко да се загорява.
6. Почистване:
  - използвайте **суха, мека или микрофибърна кърпа;**
  - не използвайте абразивни препарати, спирт, разтворители или спрейове.
7. Никога не потапяйте панела във вода или други течности.
8. Съхранявайте го върху стабилна повърхност или в оригиналната опаковка, защитен от прах и директна слънчева светлина.

## Температурни диапазони

- Съхранение: от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Работа: от  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ , без корпуса да се излага на директна слънчева светлина, за да не загорява допълнително



**При повреда не разглобявайте уреда сами –  
обърнете се към нас.**

**При проблеми и въпроси, свържете се  
с нас, или посетете сайта ни:**



**Email за  
поддръжка**



**getrediox.com**

## VII. Безопасност преди употреба

Преди всяка сесия:

1. Уверете се, че захранващият кабел и контактът са в изправност и сухи.
2. Използвайте **само оригиналното захранване**, включено в комплекта.
3. Не използвайте панела, ако корпусът, кабелът или диодите са видимо повредени.
4. Ако уредът е бил в студено помещение, изчакайте **6–8 часа** да достигне стайна температура.
5. Не използвайте уреда върху **мокра кожа** и в близост до вода (вана, душ, басейн).
6. При усещане на дискомфорт, парене, замайване или необичайна реакция на кожата – прекратете сесията и при нужда се консултирайте със специалист.
7. Не позволявайте на деца да използват уреда без надзор на възрастен.

## VIII. Гаранция

- 1. Home** панелът има гаранция срещу дефекти в материалите и изработката за срок от **3 години** от датата на покупката.
- 2.** През този период производителят/дистрибуторът предоставя ремонт или подмяна при доказан производствен дефект.
- 3.** Продукти, заменени по гаранция, се покриват от **нова гаранция** със срок 6 месеца от датата на подмяната.
- 4.** Гаранцията **не покрива:**
  - модификации или промени по продукта;
  - неправилен монтаж, употреба или поддръжка;
  - повреди от влага, корозивни вещества или екстремни температури;
  - повреди от електрически пренапрежения, токови удари и др.;
  - щети, причинени от падане, удар или транспорт след покупката.

Пазете **фактурата/касовия бон** и гаранционната карта – те са необходими при сервизно обслужване.



## **Светлината е една от най-чистите форми на енергия – същата, която поддържа живота, природата и човека.**

Създадохме устройствата си за всички, които искат да имат достъп до светлинни технологии за клетъчна жизненост у дома или в студио – компактно, удобно и близо до вас.

Благодарим Ви, че избирате грижа, която е в хармония с природата на тялото и разчита на светлинни технологии за клетъчна жизненост.



– основателите на  
**REDIOX**