




REDIOX

Athletic

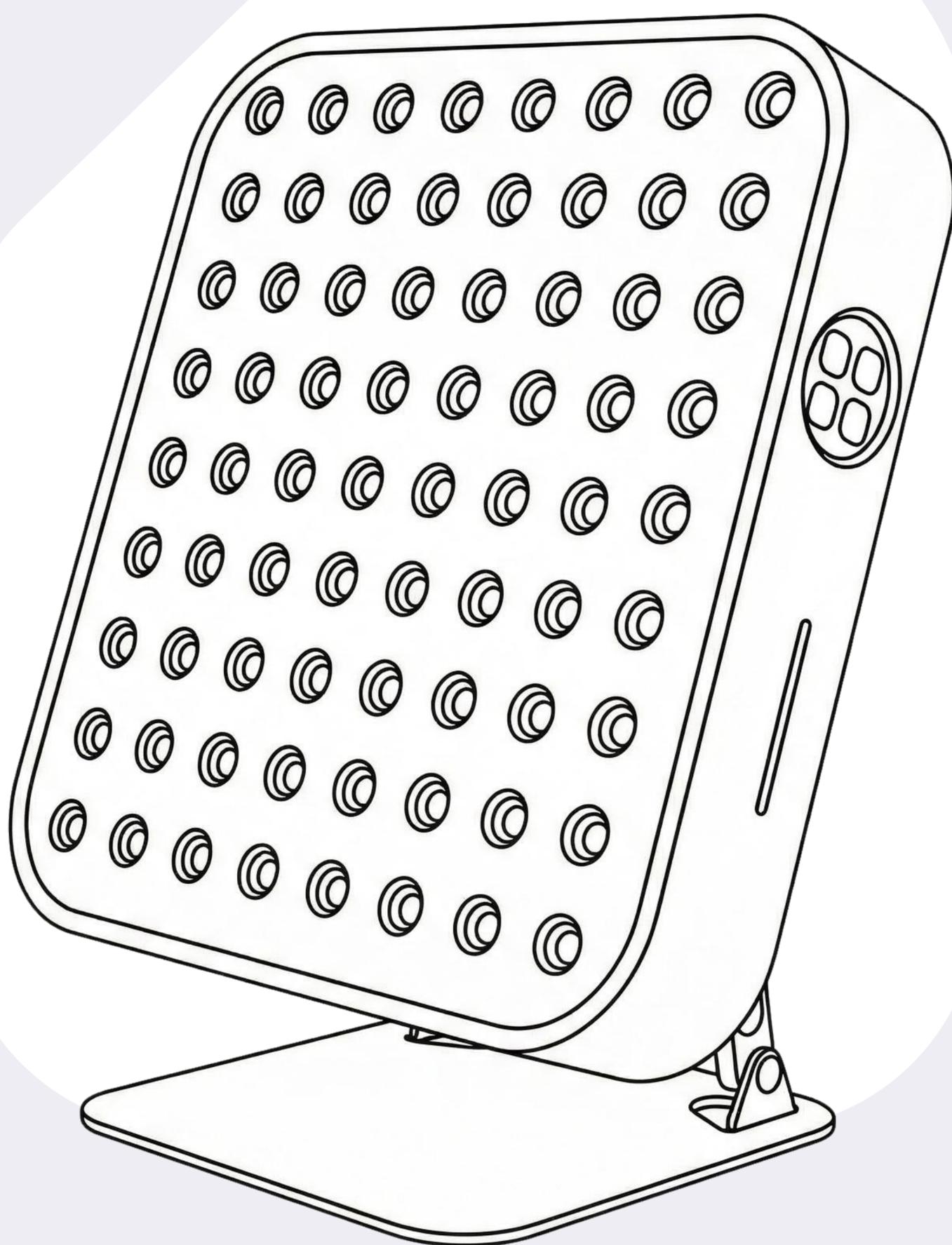

Desktop

**Ръководство на
потребителя**

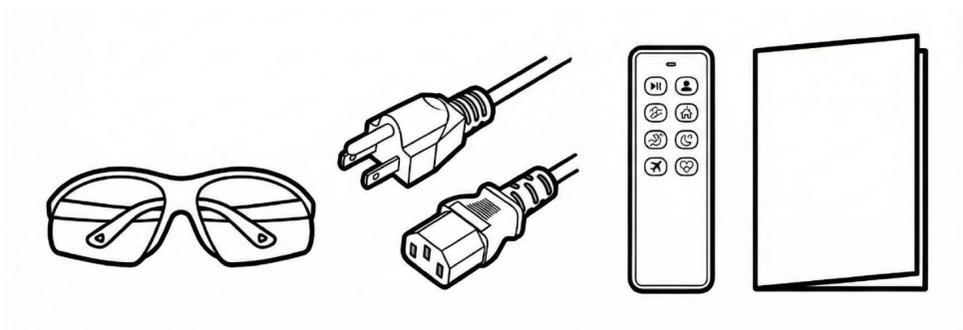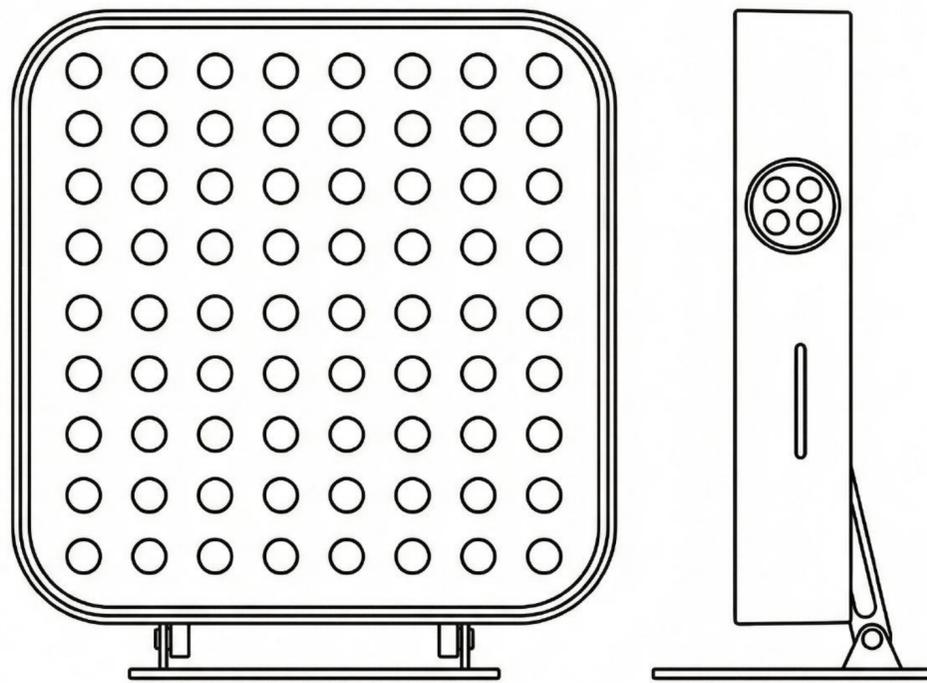

I. Какво включва комплектът

1. Светлинен панел Desktop

2. Метална стойка

3. Монтажни елементи за стойката и панела

- 2 болта
- 2 шайби
- 2 гайки
- 4 винта за закрепване на панела към стойката

4. Инструменти за монтаж

- кръстата отвертка
- гаечен / L-образен ключ

5. Захранващ кабел

6. Дистанционно управление

7. Защитни очила

8. Ръководство за употреба



Преди да започнете сглобяването, проверете дали всички елементи са налични и без видими повреди.

II. Сглобяване на стойката и панела



Работете върху равна и стабилна повърхност.

Стъпка 1: Подготовка

1. Извадете панела и стойката от кашона.
2. Поставете панела **лежал с лицето (диодите) надолу върху мека повърхност** – одеяло или мек килим, за да не се надраска.
3. Подредете металната основа, рамката, болтовете, шайбите, гайките и винтовете.

Стъпка 2: Сглобяване на стойката

1. Поставете **металната основа** с гладката страна надолу.
2. Поставете **рамката с двете рамена** върху основата, така че отворите да съвпадат.
3. Прекарайте двата болта през отворите отгоре надолу.
4. От долната страна на основата поставете шайбите и навийте гайките.
5. Затегнете болтовете с включения гаечен ключ, докато стойката стане стабилна, без да пренатягате.




Раменете на стойката трябва да са подвижни, макар и стабилни, за да може после да се напасват за удобство.

Стъпка 3: Монтиране на панела върху стойката

1. Поставете сглобената стойка върху задната страна на панела.
2. Подравнете двете рамена с отворите на задната страна на панела. Има 4 точки за монтаж около централния отвор (Вентилатор).
3. Използвайте **4-те винта** от комплекта, за да фиксирате рамената към панела.
4. Затегнете винтовете с кръстатата отвертка достатъчно, за да няма луфт, но без да пренатягате.
5. Внимателно изправете панела със стойката и проверете стабилността му.

Стъпка 4: Регулиране на наклона

1. Хванете панела от двете страни и леко го наклонете напред или назад.
2. Рамената на стойката позволяват промяна на ъгъла – изберете позиция, в която светлината пада директно върху зоната, която ще третирате (лице или тяло), без да се напругате.

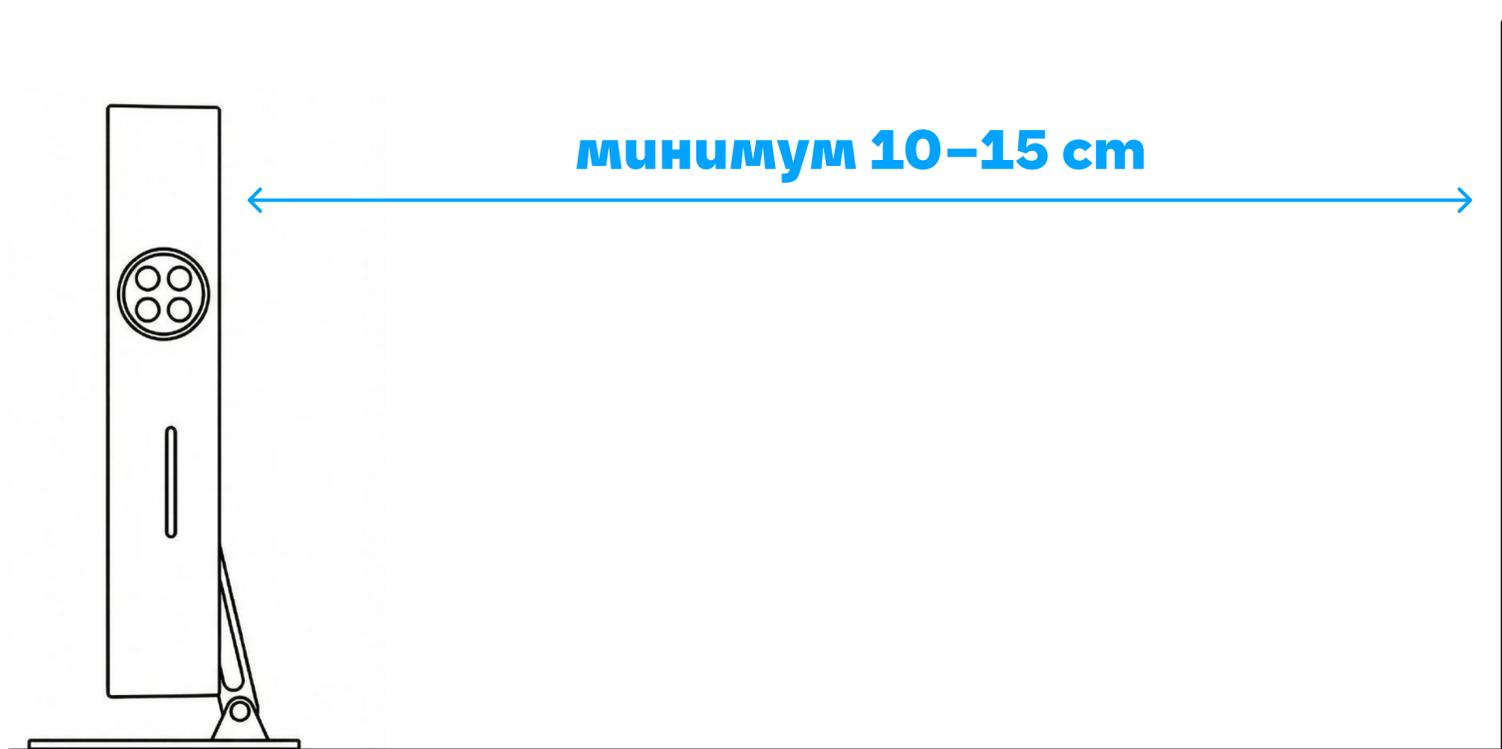

III. Позициониране и първо включване


1. Поставете панела върху стабилна маса, в близост до електрически контакт или разклонител.
2. Осигурете **минимум 10–15 cm свободно пространство** зад и отстрани на уреда, за да работи охлаждането нормално.

Не поставяйте панела:



- **опрян в стена или предмет, който може да блокира вентилационните отвори;**
- **върху мека, нестабилна повърхност, която може да доведе до падане на панела;**
- **в помещения с висока влажност (баня, сауна, басейн).**

Първо включване

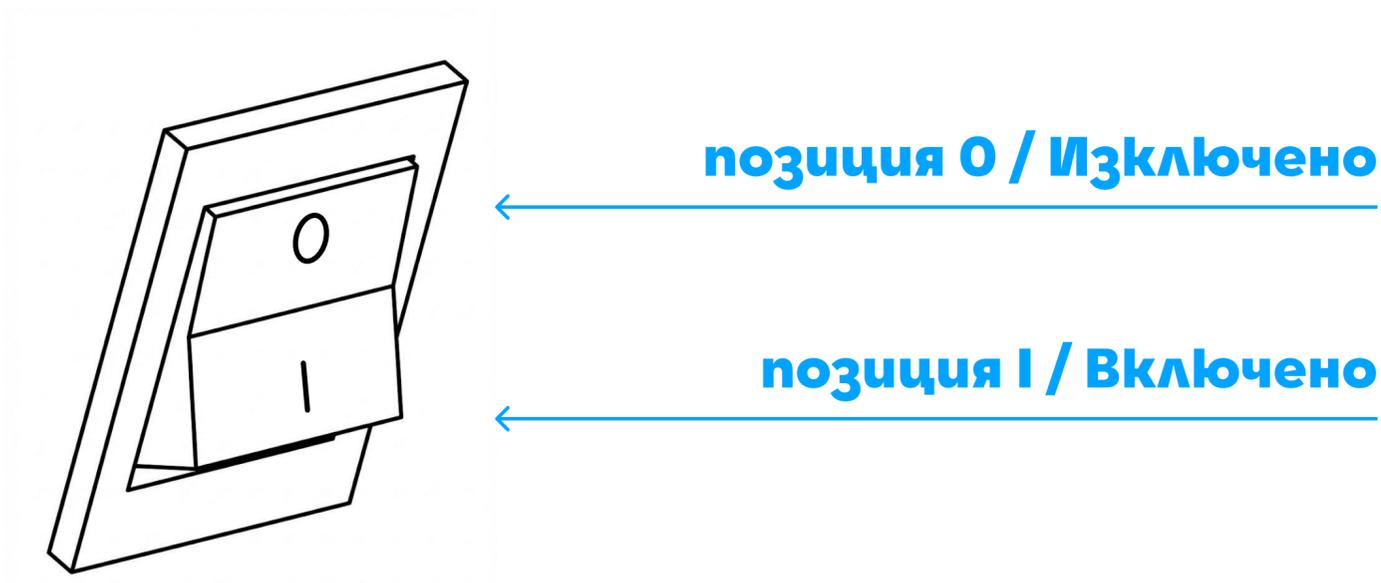


1. Свържете захранващия кабел към панела.
2. Включете щепсела в контакта.
3. На гърба на панела, натиснете захранващия бутон в **позиция I**. LED дисплеят отстрани ще светне и уредът ще премине в режим на готовност.
4. За да изключите панела, преместете бутон обратно в **позиция 0**.



Когато не използвате уреда за по-дълго, препоръчваме да стои в позиция 0.

IV. Контрол – LED дисплей и дистанционно

След включване можете да управлявате панела от **LED дисплея** или от **дистанционното управление** (фиг.1).

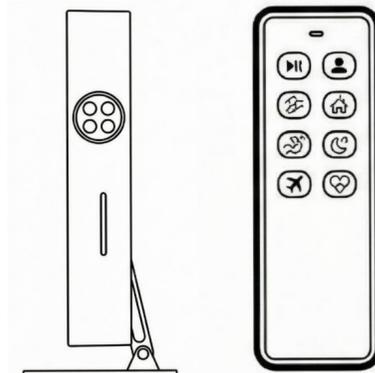

фиг. 1

На екрана ще видите основни режими:



Skin care

грижа за кожата
(Red & NIR & Green, ~20 мин)



Fat burning

Горене на мазнини
(Red & NIR & Pulse, ~30 мин)



Recovery

Възстановяване след
натоварване
(Red & NIR & Pulse, ~30 мин)



Sleep

Вечерна релаксация
(Red & NIR, ~20 мин)



Inflammation

при локален дискомфорт
(Red & NIR & Blue & Pulse,
~30 мин)



Health care

общ тонизиращ режим
(Red & NIR, ~30 мин)



Mode / Customized

персонализиран режим, който настройвате според
Вашите предпочитания.

LED дисплей



Навигация

Плъзгане наляво – следваща страница с режими

Плъзгане надясно – връщане към предишната страница

Бутони на екрана



Play

старт на сесията



Pause

пауза на сесията



Cancel

прекратяване на сесията



Settings

пълен контрол и персонализация (език, яркост и др.)



Language

избор на език на менюто



Brightness

регулиране на яркостта на дисплея



Екранът се изключва автоматично след кратко време бездействие.

За да го активирате, докоснете или плъзнете с пръст.

LED Дистанционно управление



Пускане/пауза



Mode / Customized



Skin care



Fat burning



Recovery



Sleep



Inflammation



Health care

Преди употреба:



- 1. Поставете батериите (батерия тип AAA x2).**
- 2. Насочете дистанционното към панела при натискане на бутоните.**



Всички функции от дистанционното са достъпни и през LED дисплея.

V. Защита на очите

В комплекта са включени защитни очила.

- Препоръчваме сесиите да се провеждат със **затворени очи** или с поставени очила, независимо кой режим използвате.
- Червената светлина има нискоинтензивното излъчване и се изследва за потенциални ползи за зрителния комфорт, но поради високата мощност на панела и възможно близко разстояние, е важно да защитите очите си.



При наличие на офталмологично заболяване, прекарана операция на очите или повишена фоточувствителност, се консултирайте с офталмолог преди употреба.

VI. Поддръжка и съхранение

1. Използвайте панела само в **сухи, добре проветриви помещения.**
2. Не го излагайте на влага, **пара или конденз.**
3. Не покривайте вентилационните отвори по време на работа.
4. Преди включване проверявайте дали кабелът и контактът са **сухи и неповредени.**
5. При продължителна работа е нормално корпусът леко да се загорява.
6. Почистване:
 - използвайте **суха, мека или микрофибърна кърпа;**
 - не използвайте абразивни препарати, спирт, разтворители или спрейове.
7. Никога не потапяйте панела във вода или други течности.
8. Съхранявайте го върху стабилна повърхност или в оригиналната опаковка, защитен от прах и директна слънчева светлина.

Температурни диапазони

- Съхранение: от -10 °C до +45 °C
- Работа: от +10 °C до +35 °C, без корпуса да се излага на директна слънчева светлина, за да не загорява допълнително



**При повреда не разглобявайте уреда сами –
обърнете се към нас.**

**При проблеми и въпроси, свържете се
с нас, или посетете сайта ни:**



**Email за
поддръжка**



getrediox.com

VII. Безопасност преди употреба


Преди всяка сесия:

1. Уверете се, че захранващият кабел и контактът са в изправност и сухи.
2. Използвайте **само оригиналното захранване**, включено в комплекта.
3. Не използвайте панела, ако корпусът, кабелът или диодите са видимо повредени.
4. Ако уредът е бил в студено помещение, изчакайте **6–8 часа** да достигне стайна температура.
5. Не използвайте уреда върху **мокра кожа** и в близост до вода (вана, душ, басейн).
6. При усещане на дискомфорт, парене, замайване или необичайна реакция на кожата – прекратете сесията и при нужда се консултирайте със специалист.
7. Не позволявайте на деца да използват уреда без надзор на възрастен.

VIII. Гаранция

1. **Desktop** панелът има гаранция срещу дефекти в материалите и изработката за срок от **3 години** от датата на покупката.
2. През този период производителят/дистрибуторът предоставя ремонт или подмяна при доказан производствен дефект.
3. Продукти, заменени по гаранция, се покриват от **нова гаранция** със срок 6 месеца от датата на подмяната.
4. Гаранцията **не покрива:**
 - модификации или промени по продукта;
 - неправилен монтаж, употреба или поддръжка;
 - повреди от влага, корозивни вещества или екстремни температури;
 - повреди от електрически пренапрежения, токови удари и др.;
 - щети, причинени от падане, удар или транспорт след покупката.

Пазете **фактурата/касовия бон** и гаранционната карта – те са необходими при сервизно обслужване.

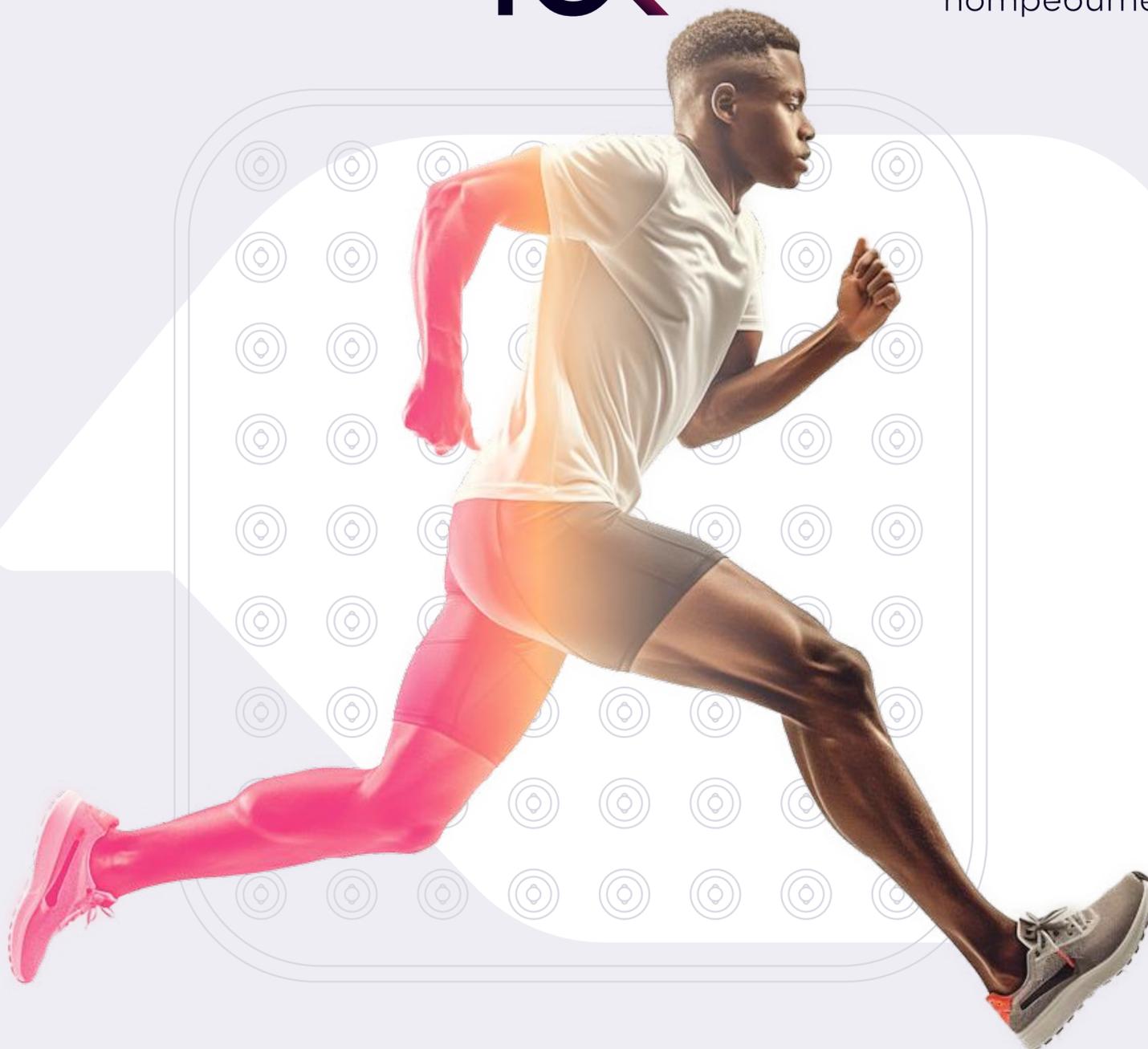

Светлината е една от най-чистите форми на енергия – същата, която поддържа живота, природата и човека.

Създадохме устройствата си за всички, които искат да имат достъп до светлинни технологии за клетъчна жизненост у дома или в студио – компактно, удобно и близо до вас.

Благодарим Ви, че избирате грижа, която е в хармония с природата на тялото и разчита на светлинни технологии за клетъчна жизненост.



– основателите на
REDIOX