



**THUASNE**

# Contactgegevens

Wil je meer informatie? Heb je nieuwe maatformulieren of patiëntfolders nodig? Neem dan contact op met een account manager bij jou in de buurt.

## Regio Noordoost

Kirsten Schokker

Tel: 06 28 46 13 79

E-mail: [kirsten.schokker@thuasne.nl](mailto:kirsten.schokker@thuasne.nl)

## Regio Zuid

Ester Schouten

Tel: 06 48 48 31 11

E-mail: [ester.schouten@thuasne.nl](mailto:ester.schouten@thuasne.nl)

## Regio Noordwest

Marlies Kos

Tel: 06 82 06 90 58

E-mail: [Marlies.kos@thuasne.nl](mailto:Marlies.kos@thuasne.nl)

**Wist je dat Thuasne diverse trainingen verzorgt voor het aanmeten van compressiekleding en/of zwachtelen?**

### **THUASNE BENELUX**

Klompenmaker 1-3 | 3861 SK Nijkerk

Tel. +31 (0)33 247 44 44

E-mail: [info@thuasne.nl](mailto:info@thuasne.nl)

[www.thuasne.nl](http://www.thuasne.nl)





**THUASNE**

## DE THUASNE COMPRESSIEWIJZER VOOR EEN DUIDELIJK & EFFICIËNT AANVRAAGPROCES

Al onze producten worden vergoed vanuit de basisverzekering (let op eigen risico) van jouw patiënt.

### Aanvragenprocedure:

1. Vul de benodigde formulieren in.
2. Zorg voor ondertekening van de formulieren (door patiënt, huisarts en/of specialist).
3. Bestel je producten via het online bestelportaal van Declacare, Fysiotek of HHC.

### Waarom niet rechtstreeks via Thuasne?

We hechten, net als jou, veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens van jouw patiënt en ieder declaratieportaal heeft zijn eigen proces.

Onze productspecialisten, [Kirsten Schokker](#), [Marlies Kos](#) en [Ester Schouten](#), ondersteunen jou en jouw patiënt uiteraard graag bij het aanmeten en/of geven van advies.

## OVERZICHT ZORGVERZEKERAARS



## OVERIGE VERZEKERAARS





**THUASNE**

**COMPRESSIE-  
WIJZER  
VOOR EEN  
DUIDELIJK &  
EFFICIENT  
AANVRAAG  
PROCES**

## VERGOEDINGSOVERZICHT VERBANDMIDDELEN (CO)

Verzekeraar	Aantal stuks	Verstrekkingsstermijn	Formulieren	Bijzonderheden
<b>Achmea</b>	2 stuks   1 extra D&N	Per 12 maanden	Algemeen aanvraagformulier + maatformulier (bij maatwerk)	
<b>Menzis</b>	2 stuks   1 extra D&N	Per 12 maanden	Menzis aanvraagformulier + bestelformulier of maatformulier (bij maatwerk)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volledig via TEK contract</li><li>• Alle voorzieningen via één leverancier</li><li>• Stepped care protocol van toepassing</li><li>• Langere doorlooptijd (machtigingsproces)</li><li>• Handtekening cliënt</li></ul>
<b>CZ</b>	2 stuks   1 extra D&N	Per 12 maanden	CZ aanvraagformulier + bestelformulier of maatformulier (bij maatwerk)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stepped care</li><li>• Datum ontstaan oedeem belangrijk</li><li>• Handtekening cliënt</li></ul>
<b>VGZ</b>	2 stuks   1 extra D&N	Per 12 maanden	Algemeen aanvraagformulier + maatformulier (bij maatwerk)	ACD extra aanvraagformulier
<b>Overige verzekeraars</b>	2 stuks   1 extra D&N	Per 12 maanden	Algemeen aanvraagformulier + maatformulier (bij maatwerk)	

NB Alle formulieren vind je op onze website [Thuasne.nl](https://www.thuasne.nl) onder het kopje *downloads*.

### BINNEN DE REGELING VERBANDMIDDELEN GELDEN DE VOLGENDE PRODUCTGROEPEN:

Productgroep	Product Thuasne
Onze zwachtels	Biflex assortiment   Mobidermverband
Meerlaags compressiesystemen	Kit-Biflex
Teenkappen	Cicatrex teenkap
Compressiehandschoenen	Filifine & Cicatrex
Adjustable Compression Devices (ACD)/klittenbandsystemen	Geen
Point Pressure Devices (PPD)	Mobiderm Autofit arm/been Mobiderm standard arm/been Mobiderm maatwerk arm/been
Thoraxbandages, genital pressure devices (compressiebroeken) en hoofd- halsbandages	Lymfatrex   Cicatrex confectie   Cicatrex maatwerk
Intermitterende Pneumatische Compressiesystemen (IPC)	
Accessoires	Pads

#### Verstrekkingsstermijn:



- Per 12 maanden betekent herverstrekking, minimaal 12 maanden na levering compressiehulpmiddel.

#### D&N:


Bij gebruik dag en nacht.

# Lymfoedeem & Lipoedeem


## Lymfestelsel

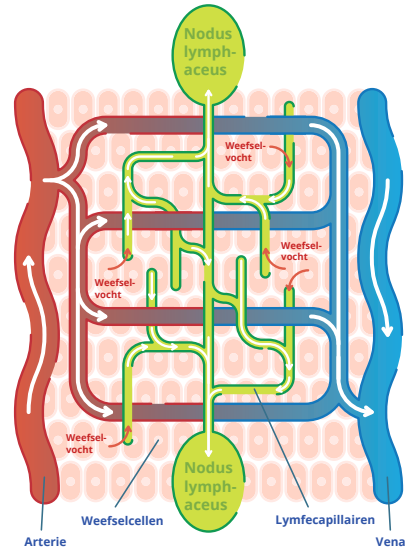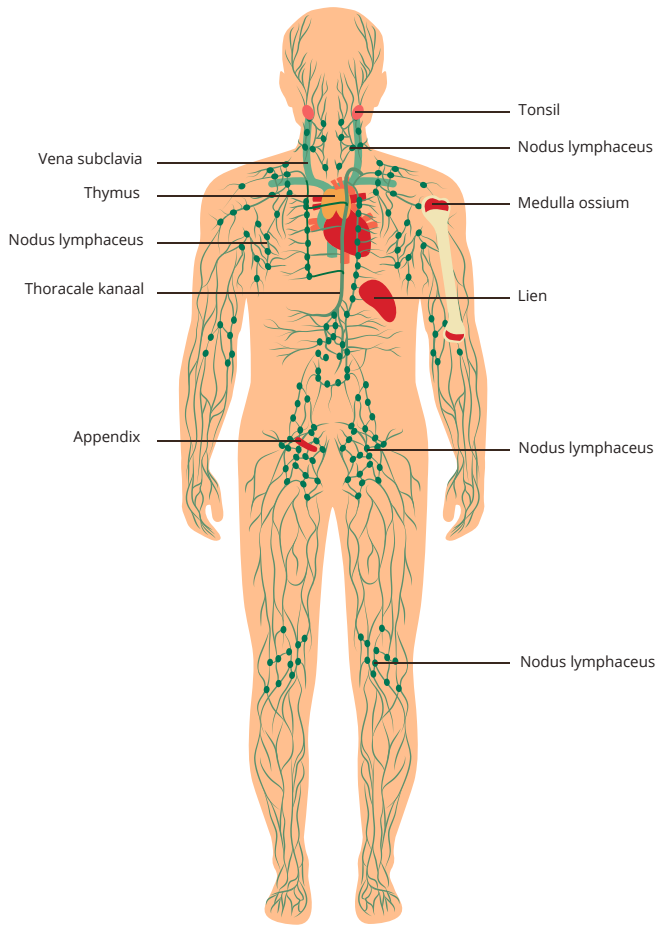


## Lymfestroming

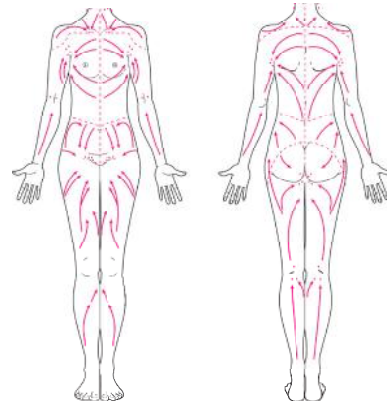

## Lipoedeem stadia


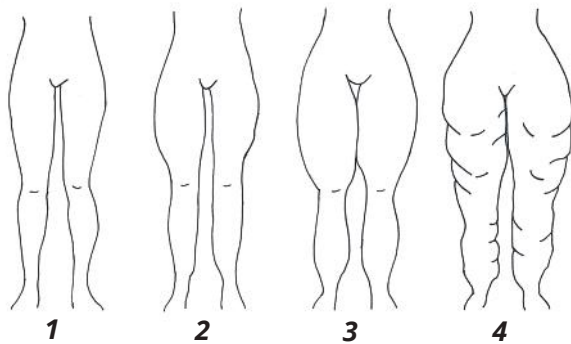


## Lipoedeem

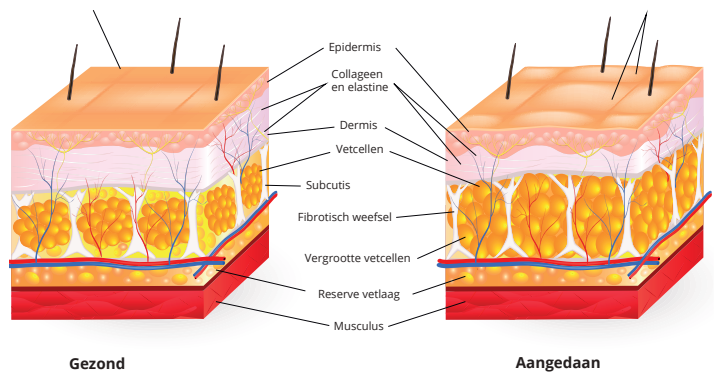


# Veneus oedeem & trombose

## Bloedsomloop

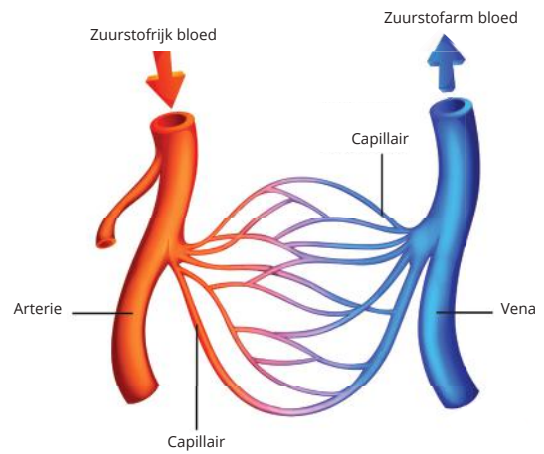
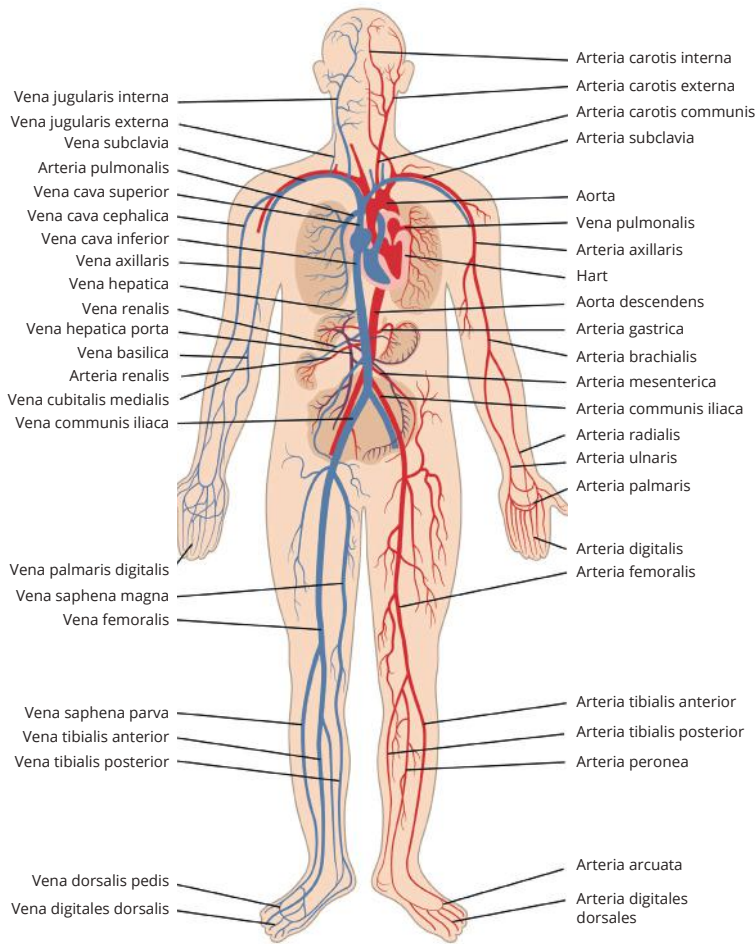


## Aderkleppen

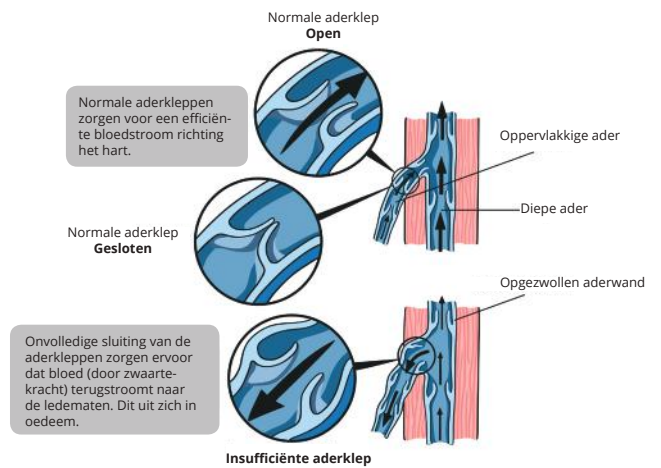

## Veneuze insufficiëntie

## Trombose

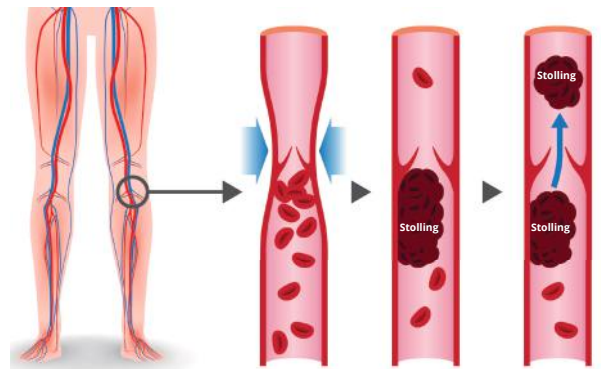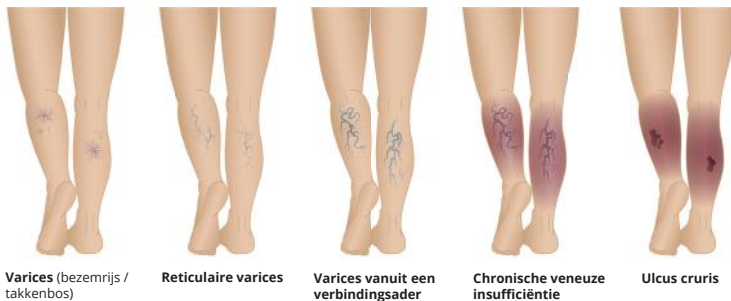

# KIT BIFLEX

2-laags zwachtelsysteem voor ulcus cruris



## EENVOUDIG

Dankzij rekindatoren en overlap-lijnen



## DUURZAAM


Wasbaar, minimaal vier keer herbruikbaar



## EFFECTIEF

Kunnen dag en nacht blijven zitten

## REKINDATOREN & OVERLAP-LIJNEN VOOR GEMAKKELIJK, EN VEILIG ZWACHTELEN

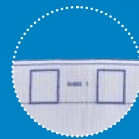

**Verband 1:** zacht, zodat de huid en uitstekende botdelen beschermd worden.



**Verband 2:** tweezijdig elastisch, voor het vereiste drukniveau.




Dankzij de gepatenteerde rekindatoren & overlap-lijnen kan het verband reproduceerbaar en met een gecontroleerde druk worden aangelegd.



Verkrijgbaar in 3 maten en 1 hoogte  
zodat het verband altijd past  
bij de morfologie van de patiënt.

Enkelomvang	Lengte	Z-index
MAAT 1: < 25 cm	3,5 mtr.	16811372
MAAT 2: 25-30 cm	4 mtr.	16811402
MAAT 3: > 30 cm	4,5 mtr.	16811429

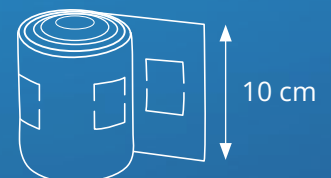



# ZWACHTELEN MET MOBIDERM

**Indicatie:** Reductie van veneus- en lymfoedeem.

**Werking:** Mobiderm zorgt voor drukverschillen op de huid, wat oedeem snel en effectief reduceert.

## BENODIGDHEDEN

Laag 1



FIXATIE HUIDBESCHERMING

### KIT BIFLEX EERSTE ZWACHTEL (wit)

#### Fixatie en comfort

In direct contact met de huid zorgt deze zwachtel voor een goede fixatie en comfort. Deze zachte, met molton gevoerde katoenen zwachtel biedt bescherming voor de door lymfoedeem verzwakte huid.

Laag 2



DRAINAGE VAN HET OEDEEM

### MOBIDERM

#### Mobilisatie van oedeem

Door Mobiderm onder een reducerend verband te gebruiken, wordt oedemateus of verhard subcutaan weefsel gemobiliseerd. Het wordt aangebracht bovenop het eerste cutane beschermingsverband.

Laag 2



RETENTIE

### KIT BIFLEX TWEDE ZWACHTEL (beige)

#### Compressie Kit Biflex

Een korte-rekzwachtel (<100% stretch) als derde laag garandeert reductie van het oedeem en doeltreffende drainage in geval van lichaamsbeweging.

In geval van ernstig lymfoedeem bij actieve patiënten, kan de rigiditeit worden versterkt met een extra laag.



Kit Biflex maat 3: **Z-Index** 16811429



Mobiderm (grote blokken): **Z-Index** 15778665

Voor mobilisatie van oedeem in de hand, vingers, voeten of tenen adviseren we een Mobiderm pad kleine blokjes (16593693) erbij te bestellen. Hiervan kun je een pad op maat knippen.





# MOBIDERM VERBANDEN

## MOBIDERM pads




Afmetingen	Omschrijving	Z-index
25 cm x 1 m	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	15778649
25 cm x 25 cm	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	16593693
25 cm x 1 m	Grote blokjes (15 mm x 15 mm)	15778657



## MOBIDERM verband

Afmetingen	Omschrijving	Z-index
10 cm x 3 m	Grote blokjes 15 mm x 15 mm	15778665
10 cm x 3 m	Kleine blokjes 5 mm x 5 mm	17112311

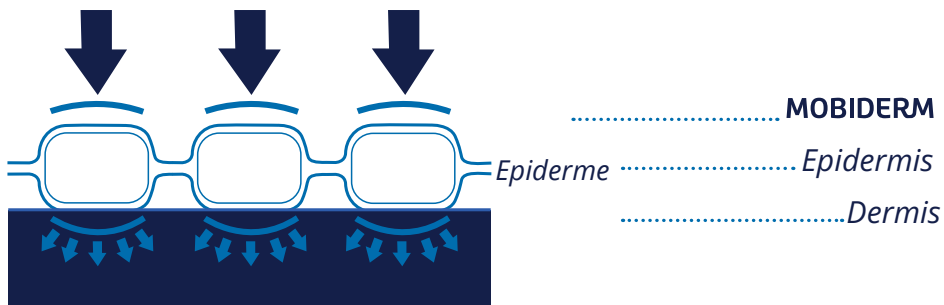

## MOBIDERM IS EEN HIGHTECH MOBILISATIE COMPRESSIEHULPMIDDEL

### EFFECTIEF

- Snelle reductie van het oedeemvolume.
- Verzacht de fibrotische, sclerotische of oedamateuze huid.

### PRAKTISCH

- Licht, comfortabel en flexibel. Zorgt dat de patiënt zijn bewegingsvrijheid behoudt en door mobiliteit wordt het drainagevermogen vergroot.

### COMFORTABEL

- Zacht
- Eenvoudig aan te brengen.



#### Kleine blokjes

- Doeltreffend op gebieden met een klein oppervlak, zoals vingers, handrug en voetrug.



#### Grote blokjes

- Doeltreffend op grote oppervlakten, zoals been, romp, arm of genitale zone.



THUASNE®

## BIFLEX Self Adjust

Verstelbaar compressiesysteem  
voor armen en benen



Arm



Dij



Hand



Knie



Kuit




Voet



## Kuit


$\ell$	Enkel-kniehoogte
cB	Enkelomtrek (smalste punt)
cC	Kuitomtrek (breedste punt)
cD	Omtrek onder de knie
N	Normaal - $\ell < 36$ cm
L	Lang - $\ell > 36$ cm

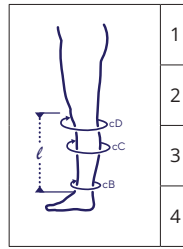

		Z-index				
		cB	cC	cD	Normaal	Lang
1	1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm	17284228	17284236
	2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm	17284244	17284252
	3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm	17284260	17284279
	4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm	17284287	17284295

## Bovenbeen


$\ell$	Hoogte knie-bovenkant dij
cE	Omtrek boven de knie
cG	Omtrek dij (breedste punt)
N	Normaal - $\ell < 36$ cm
L	Lang - $\ell > 36$ cm

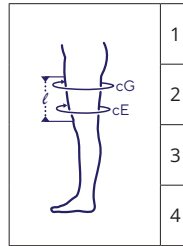

		Z-index			
		cE	cG	Normaal	Lang
1	1	34 - 45 cm	46 - 57 cm	17284333	17284341
	2	41 - 53 cm	53 - 65 cm	17284368	17284376
	3	49 - 60 cm	61 - 72 cm	17284384	17284392
	4	56 - 68 cm	68 - 80 cm	17284406	17284414

## Arm


cG	Armomtrek bij oksel
cD	Omtrek onderarm (breedste punt)
cC	Polsomtrek

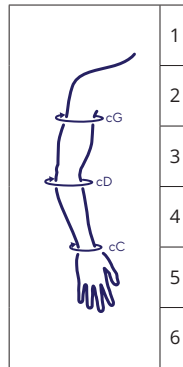

		cG	cD	cC	Z-index
1	1	25 - 32 cm	22 - 28 cm	15 - 19 cm	17284422
	2	29 - 36 cm	24 - 30 cm	16 - 20 cm	17284430
	3	33 - 40 cm	26 - 32 cm	17 - 21 cm	17284449
	4	37 - 44 cm	28 - 34 cm	17 - 21 cm	17284457
	5	41 - 48 cm	30 - 36 cm	18 - 22 cm	17284465
	6	45 - 52 cm	31 - 37 cm	19 - 23 cm	17284473

## Hand

cA	Handomtrek
----	------------

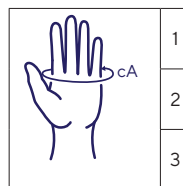

		cA	Z-index
1	1	14 - 19 cm	17284481
	2	19 - 24 cm	17284503
	3	24 - 29 cm	17284511

## Knie

		cE	Z-index
1	1	35 - 50 cm	17284309
	2	50 - 65 cm	17284317
	3	65 - 85 cm	17284325

cE	Omtrek boven de knie
----	----------------------

## Voet

		cB	cA	Z-index
1	1	< 36 cm	19 - 24 cm	17284171
	2	< 36 cm	24 - 29 cm	17284198
	3	< 41 cm	29 - 34 cm	17284201

cB	Enkelomtrek
cA	Omvang midden voet



# MULTI-TYPE VERBANDEN

## HUIDBESCHERMING



### Katoenen korte-rekzwachtel

#### Niet-elastisch anti-oedeemverband

Samenstelling: 100% katoen.

Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
11 cm	4 m	Wit	15520056



### Beschermende schuimverband

#### Dun rekverband van foam

Bescherming van huidoppervlak.

Breedte	Lengte	Kleur	Artikelnummer
7 cm	27 m	Wit	5507091000

## REDUCTIE



### Biflexideal®

#### Korte-rek compressieverband

65% stretch en kracht van 45 cN/cm.

Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
3 cm	5 m	Wit	16135725
6 cm			15686914
8 cm			15686922
10 cm			15686930



### Biplast

#### Adhesief compressieverband

Kleefkracht in meerdere richtingen tot de rand van het verband.



Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
3 cm	2,5 cm	Wit	13624792
6 cm			13624806
8 cm			13624814
10 cm			13624822
15 cm			15502449
20 cm			15502457




## ELASTISCHE COMPRESSIE

EENVOUD, DANKZIJ DRUKINDICATOREN EN OVERLAP-LIJNEN

### Medium-rekzwachtel elastische zwachtel met drukindicatoren

Tweerichting elastisch gewoven zwachtel.

Nauwkeurige controle van de uitgeoefende druk dankzij de drukindicatoren (ijkttekens voor de spanning van het verband) en de overlap-lijnen.

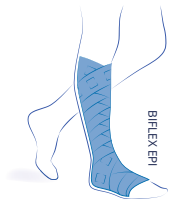

Versies:


- BIFLEX 16+ (light) - BIFLEX 17+ (strong)
- BIFLEX EPI 16+

Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
BIFLEX 16+ LIGHT	8 cm	3 m	Beige	13624458
		5 m		15735729
	10 cm	3 m	Beige	15734466
		3,5 m		15735737
BIFLEX 17+ STRONG	8 cm	4 m	Beige	15734482
		3 m		13624555
	10 cm	3,5 m	Beige	13624547
		4 m		15735893
		5 m		13624563
BIFLEX EPI 16+ LIGHT	8 cm	7 m	Beige	15735907
				15736245



## BIFLEX AANBRENGEN IN TWEE SIMPELE STAPPEN


### 1 REKINDICATOREN

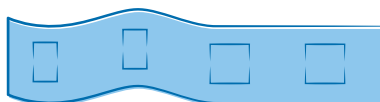

RECHTHOEK → VIERKANT


### 2 OVERLAP-LIJNEN

#### BIFLEX 16+

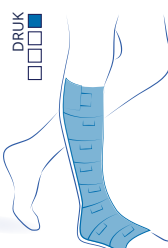


HALF-  
OVERLAPPENDE  
VIERKANTEN  
(Force 1)

#### BIFLEX 16+

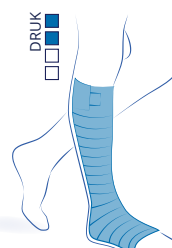

VOLLEDIG  
OVERLAPPENDE  
VIERKANTEN  
(Force 2)

#### BIFLEX 17+

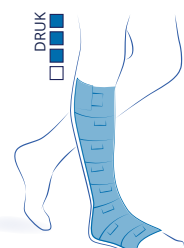

HALF-  
OVERLAPPENDE  
VIERKANTEN  
(Force 1)



# MULTI-TYPE ZWACHTELS

## ELASTISCHE COMPRESSIEZWACHTEL

### BIFLEX+ PRATIC

Gradueel medium-rekzwachtels met drukindicatoren

Met een handige lus om je bandage mee op te starten.



Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
BIFLEX 16+ PRATIC LIGHT	8 cm	3 m	Beige	13624407
		4 m		13624423
BIFLEX 17+ PRATIC STRONG	10 cm	3 m	Beige	13624504
		4 m		13624431
BIFLEX 17+ PRATIC STRONG	10 cm	3 m	Beige	15736059
		4 m		15736067



### PRATIC-VERBAND


Gebruiksvriendelijk, geeft de patiënt autonomie, kan worden aangebracht door gezinsleden, tijdwinst voor thuiszorg- en ziekenhuispersoneel.

1



Schuif de voet  
in de verband.

2

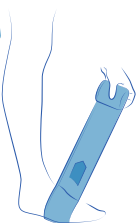

Naad boven  
op de voet.

3



1e slag  
rond de hiel.

4



2e slag  
vastzetten vanaf  
de onderkant.

5



3e slag  
vastzetten vanaf  
de bovenkant.

6



Volg de overlap-  
lijnen en rek de  
rechthoeken uit tot  
vierkanten.

## BIFLEX ACCESSOIRES



### KLITTENBANDSLUITING

Verpakking	Artikelnummer
4 klittenbandsluitingen	5903 091 000



## POLSTERING

### SCHUIMVERBAND

#### Geëmulgeerd latex foam

Voor het polsteren van lichaamsdelen.

De afgebogen snijrand maakt het mogelijk het schuimverband overlappend te zwachtelen.

Dankzij de open celstructuur van het foam is het verband luchtdoorlatend en beperkt het de risico's van wondmaceratie.



Dikte	Breedte	Lengte	Z-index
8 mm	8 cm	1 m	16593340
	10 cm		16593367
12 mm	10 cm	1 m	16593405

### VARICO

#### Latex foampad

Voor polsteren van lichaamsdelen.

Dankzij de open celstructuur van het foam is de pad luchtdoorlatend en beperkt het de risico's van wondmaceratie.

Model	Afmetingen	Verpakking	Z-index
0	63 mm x 87 mm	2 stuks	16593472
1	70 mm x 132 mm	1 stuk	16593634
2	125 mm x 164 mm	1 stuk	16593642
3	200 mm x 250 mm	1 stuk	16593650







# BEHANDELING VAN LYMFOEDEEM

## ONDERHOUDSFASE

### NORMALE MORFOLOGIE of gematigd oedeem

MOBIDERM  
STANDAARD



Arm

MOBIDERM  
autofit



Arm & hand



Hand zonder  
vingers



Hand met  
vingers



Onderbeen



Been

### AFWIJKENDE MORFOLOGIE of ernstig lymfoedeem

MOBIDERM  
MAATWERK



Arm

MOBIDERM  
autofit




Arm



Arm & hand



Onderbeen

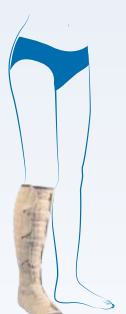

Onderbeen



Been



Been

# MOBIDERM autofit

Confectie, zelf in te stellen point pressure device (PPD)

## ARM & HAND

Z-index: 16187210

### Diverse instelmogelijkheden

- Aan te passen aan de morfologie van de patiënt.
- Markeringstekens: precieze en reproduceerbare compressie-instellingen. Toepasbaar bij volumevariatie van het oedeem.

### Klittenbandsluiting

Gemakkelijk en snel in te stellen.  
*Vernieuwd klittenband in 2022:  
Dunner en eenvoudiger te openen.*

### Armkoos met handschoen zonder vingers:

- Beperkt het risico van oedeem migratie.
- De hand kan worden vrijgemaakt voor dagelijkse activiteiten.

**GEPATENTEERD  
HULPMIDDEL**




**Semi-open compressiekleding**  
Gemakkelijk aan en uit te trekken.



## MATEN


Maat	Hand- omvang (cA)	Pols- omvang (cC)	Elleboog- omvang (cD)	Bovenarm- omvang (cG)	Artikelnummer	
					Normaal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
<b>RECHTS</b>						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330420100261	37330420100271
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330420200261	37330420200271
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330420300261	37330420300271
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330420400261	37330420400271
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330420500261	37330420500271
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330420600261	37330420600271
<b>LINKS</b>						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330420100262	37330420100272
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330420200262	37330420200272
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330420300262	37330420300272
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330420400262	37330420400272
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330420500262	37330420500272
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330420600262	37330420600272

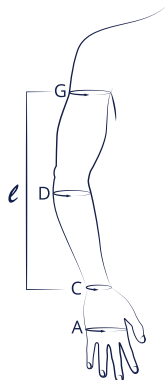

Universele Z-index: 16187210

**Bij oedeem in de hand adviseren we om ook een Cicatrix skin handschoen aan te meten**

# ONDERBEEN & BEEN

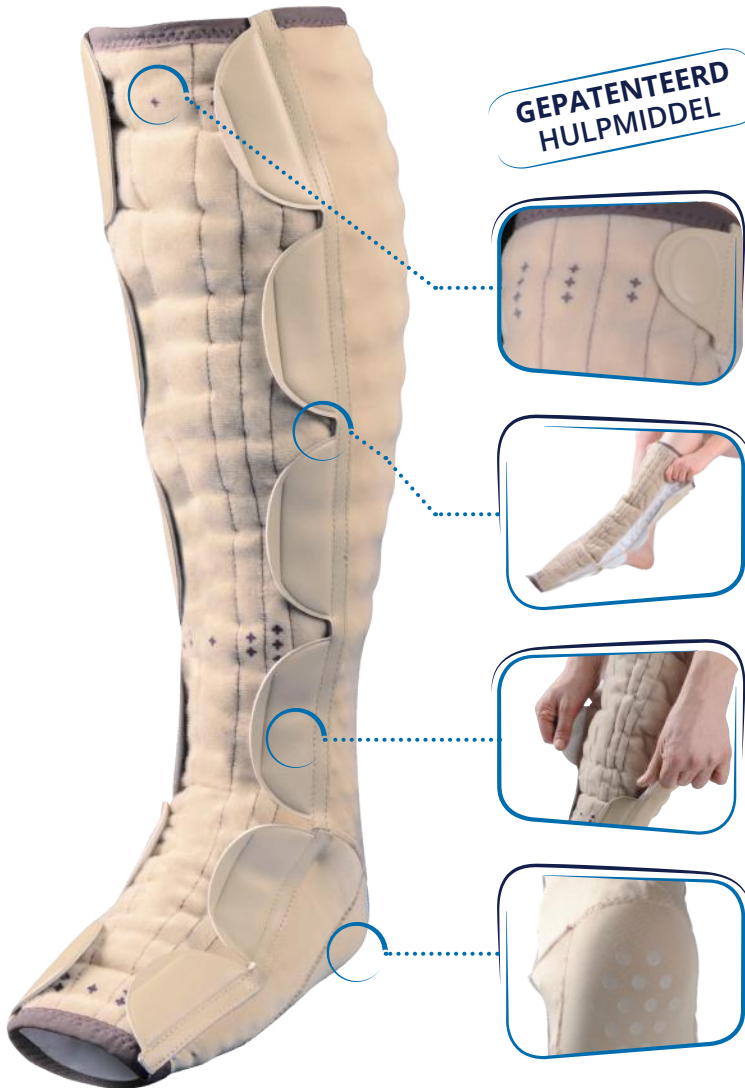

**GEPATENTEERD HULPMIDDEL**

Confectie, zelf in te stellen point pressure device (PPD)

## Individueel instelbare druk

- Aan te passen aan de morfologie van de individuele patiënt.
- Markeringstekens: precieze en reproduceerbare compressie-instellingen.
- Toepasbaar bij volumevariatie van het oedeem.

## Semi-open compressiehulpmiddel:

Gemakkelijk aan en uit te trekken.

## Klittenbandsluiting


Gemakkelijk en snel in te stellen.

## Dubbele rij sluitingen

- Ruime instelmogelijkheden.
- Geschikt voor zowel rechter- als linkerbeen.

## Anti-slipzool

Beperkt de kans op wegglijden tijdens het lopen.

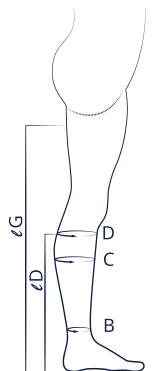

Bij oedeem in de voet adviseren we om ook een Cicatrex skin teenkap aan te meten.

## MATEN

ONDERBEEN				Z-index (rechts/links)			
Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Onderbeen omvang (cD) <i>(op de kop van de fibula)</i>	Kort	Normaal	Lang	Extra lang
				lD = 38 - 40 cm	lD = 40 - 42 cm	lD = 42 - 44 cm	lD = 44 - 46 cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm	16516907	16517091	16517148	16517180
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm	16516974	16517105	16517156	16517199
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm	16516982	16517113	16517164	16517202
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm	16517083	16517121	16517172	16517210

BEEN				Z-index (rechts/links)			
Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Bovenbeen omvang (cG) <i>(op het breedste punt)</i>	Kort	Normaal	Lang	Extra Lang
				lG = 67 - 72 cm	lG = 72 - 77 cm	lG = 77 - 82 cm	lG = 82 - 87 cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	46 - 57 cm	16517229	16517261	16517326	16517369
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	53 - 65 cm	16517237	16517288	16517334	16517377
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	61 - 72 cm	16517245	16517296	16517342	16517385
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	68 - 80 cm	16517253	16517318	16517350	16517393

lD: hoogte van grond tot knie (meting onder de buiging van de knie, aan de achterkant).

lG: hoogte van grond tot bovenbeen (meting bij de bilplooi).



# MOBIDERM STANDARD

Confectie point pressure device (PPD)

Standaard producten: **snellere levering!**

## BESCHRIJVING

De **MOBIDERM** standard compressiehulpmiddelen zijn ontwikkeld om oedemateus of verhard subcutaan weefsel te mobiliseren. Ze zijn bedoeld voor de behandeling van lymfoedeem in de onderhoudsfase, om de volumereductie in stand te houden. Deze producten worden dag en nacht gedragen.

Voor de arm: armkous **1**, handschoen zonder vingers **2** of handschoen **3**.

## VOOR WELKE PATIËNTEN?

**MOBIDERM** standard compressiehulpmiddelen worden aanbevolen voor patiënten met:

- Alle stadia van lymfoedeem.
- Een normale morfologie.
- Stabiel lymfoedeemvolume.
- Daar waar therapeutische compressiekousen niet toepasbaar zijn.

## EIGENSCHAPPEN


### Samenstelling:

- Buitenlaag: Polyamide, elastaan.
- Binnenlaag: Langs het been/de arm: zelfklevend non-woven, polyurethaan foam, met grote blokjes (15 x 15 mm).
- Binnenlaag: Bij de voet/hand: zelfklevend non-woven, polyurethaan foam, met kleine blokjes (5 x 5 mm).

**Kleur:** beige

**Compressieklasse:** circa 15 mmHg


## MATEN

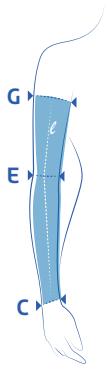


MOBIDERM STANDARD ARM (VOOR LINKS EN RECHTS) Z-INDEX 15778630					
Maat	Pols- omvang (C)	Elleboog- omvang (E)	Bovenarm- omvang (G)	Artikelnummer (rechts / links)	
				Normaal (40 - 45 cm)	Lang (45 - 50 cm)
<b>1</b>	14 - 16 cm	22 - 25 cm	25 - 29 cm	37300220100232	37300220100233
<b>1+</b>				37300240100232	37300240100233
<b>2</b>	16 - 18 cm	25 - 28 cm	29 - 33 cm	37300220200232	37300220200233
<b>2+</b>				37300240200232	37300240200233
<b>3</b>	18 - 20 cm	28 - 31 cm	32 - 36 cm	37300220300232	37300220300233
<b>3+</b>				37300240300232	37300240300233
<b>4</b>	20 - 22 cm	31 - 34 cm	35 - 39 cm	37300220400232	37300220400233
<b>4+</b>				37300240400232	37300240400233
<b>5</b>	22 - 24 cm	34 - 37 cm	38 - 42 cm	37300220500232	37300220500233
<b>5+</b>				37300240500232	37300240500233



MOBIDERM STANDARD HANDSCHOEN MET VINGERS Z-INDEX 16187229				
Maat	Pols- omvang (C)	Handomvang (A) (kop van middenhandsbeentjes)	Artikelnummer (rechts)	Artikelnummer (links)
<b>1</b>	14 - 16 cm	15 - 17 cm	37320120100201	37320120100202
<b>2</b>	16 - 18 cm	17 - 19 cm	37320120200201	37320120200202
<b>3</b>	17 - 19 cm	19 - 21 cm	37320120300201	37320120300202
<b>4</b>	19 - 21 cm	21 - 23 cm	37320120400201	37320120400202
<b>5</b>	20 - 22 cm	23 - 25 cm	37320120500201	37320120500202
<b>6</b>	21 - 23 cm	25 - 27 cm	37320120600201	37320120600202

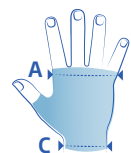

MOBIDERM STANDARD HANDSCHOEN ZONDER VINGERS (VOOR LINKS EN RECHTS) Z-INDEX 16187237			
Maat	Pols- omvang (C)	Handomvang (A) (kop van middenhandsbeentjes)	Artikelnummer (rechts / links)
<b>1</b>	14 - 16 cm	15 - 17 cm	37310120100299
<b>2</b>	16 - 18 cm	17 - 19 cm	37310120200299
<b>3</b>	17 - 19 cm	19 - 21 cm	37310120300299
<b>4</b>	19 - 21 cm	21 - 23 cm	37310120400299
<b>5</b>	20 - 22 cm	23 - 25 cm	37310120500299
<b>6</b>	21 - 23 cm	25 - 27 cm	37310120600299

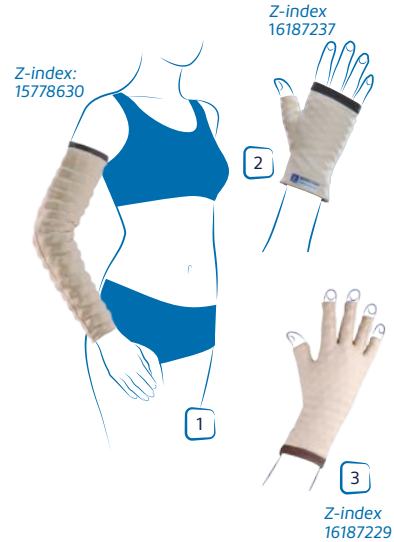



**THUASNE**

---

## **Cicatrex Contour**

---

**Maakt STEPPED CARE  
mogelijk**



# CONFECTIE COMPRESSIEKLEDING

**Cicatrex** materiaal staat bekend om haar unieke eigenschappen, die naast effectieve compressie ook zorgen voor een optimaal draagcomfort. Naast maatwerk is Cicatrex nu ook verkrijgbaar in confectie. Het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt. Confectie waar kan, maatwerk waar nodig!

## Maattabel:

	TAILLE OMVANG	HEUP OMVANG	BOVENBEEN OMVANG
<b>XS</b>	61-66 cm	86-91 cm	48-51 cm
<b>S</b>	66-71 cm	91-97 cm	51-54 cm
<b>M</b>	71-76 cm	97-102 cm	54-57 cm
<b>L</b>	76-81 cm	102-107 cm	57-60 cm
<b>XL</b>	81-89 cm	107-114 cm	60-65 cm
<b>XXL</b>	89-99 cm	114-124 cm	65-70 cm
<b>XXXL</b>	99-109 cm	124-135 cm	70-77 cm
<b>XXXXL</b>	109-119 cm	135-145 cm	77-86 cm

Cicatrex Contour wordt vergoed vanuit de regeling verbandmiddelen (CO) en is te verkrijgen bij een daartoe bevoegde zorgprofessional, zoals een huidtherapeut, oedeemfysiotherapeut of bandagist.

## Hieronder het overzicht met z-index nummer

Z-index	Artikel	Artikelcode	EAN code
17079209	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XS	34820100200399	4035459365420
17079217	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, S	34820100300399	4035459365437
17079225	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, M	34820100400399	4035459365444
17079233	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, L	34820100500399	4035459365451
17079241	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XL	34820100600399	4035459365468
17079268	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XXL	34820100700399	4035459365475
17079276	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XXXL	34820100800399	4035459365482
17079284	CICATREX CONTOUR Legging, Zwart, XXXXL	34820100900399	4035459365499
17079292	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XS	34830100200399	4035459365512
17079306	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, S	34830100300399	4035459365529
17079314	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, M	34830100400399	4035459365536
17079322	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, L	34830100500399	4035459365543
17079330	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XL	34830100600399	4035459365550
17079349	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XXL	34830100700399	4035459365567
17079357	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XXXL	34830100800399	4035459365574
17079365	CICATREX CONTOUR Legging met buik, Zwart, XXXXL	34830100900399	4035459365581



# MOBIDERM

## Short heren

**Compressie-  
en mobilisatieshort  
voor de behandeling  
van lymfoedeem  
in bekken en genitaliën**



**Gerichte compressie  
en retentie<sup>(1)</sup>**


Van bekken, genitaliën, billen en bovenbenen

**Eenvoudig aan te trekken<sup>(5)</sup>**

Dankzij de elastische stoffen eenvoudig aan en uit te trekken


**Comfort:**

- Zachte stof<sup>(3)(4)</sup> voor meer comfort
- Platte naden om huidreacties te beperken

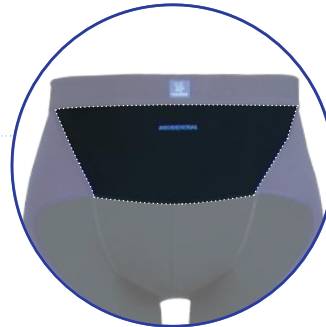

### Verstevigde zone

2 lagen stof

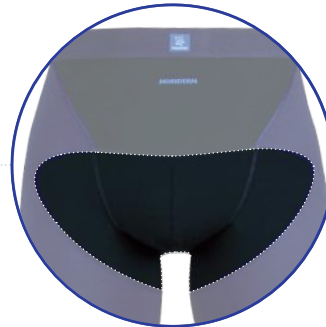

### Verstevigde zones

2 lagen stof



## Mobiderm-mobilisatiepad:

- Bekleed met zachte<sup>(3)(4)</sup> stof voor meer comfort
- Kleine blokjes voor meer aanpassingsvermogen\*<sup>(2)</sup>

**Kan met of zonder de genitale pad worden gedragen**

\* Het contactoppervlak is beperkt, het aantal blokjes geoptimaliseerd.



	cK (cm) Omtrek heup	cG (cm) Omtrek dijbeen	Z-index
1	88 - 94	45 - 54	17112435 Mobiderm Short man, maat 1
2	95 - 101	48 - 58	17112443 Mobiderm Short man, maat 2
3	102 - 108	51 - 62	17112451 Mobiderm Short man, maat 3
4	109 - 115	54 - 66	17112478 Mobiderm Short man, maat 4
5	116 - 122	57 - 69	17112486 Mobiderm Short man, maat 5
6	123 - 129	60 - 72	17112494 Mobiderm Short man, maat 6

1: OLYMPY-studie: verkennende studie om de klinische voordelen te beoordelen van het dragen van de MOBIDERM Intimate Short bij patiënten met lymfoedeem in bekken en/of genitaliën. - 2021 - 32 patiënten - ID-RCB-nr.: 2020-AO0247-32; belangrijkste doel: beoordeling van het effect van de MOBIDERM Intimate short, na 12 weken, op basis van de door de patiënt zelf waargenomen verandering in kwaliteit van leven met betrekking tot lymfoedeem in bekken/genitaliën.  
 2: Zie interne gegevens CE-markering.  
 3: CC1508 - Panty Mobiderm - Plan de validation (2019)  
 4: CC1508 - Rationnel de formulation (2021)  
 5: CC1508 - Rapport de tests Usability - Evaluation sommative (2020)





# MOBIDERM

## Short dames

**Compressie-  
en mobilisatieshort  
voor de behandeling  
van lymfoedeem  
in bekken en genitaliën**



**Gerichte compressie  
en retentie<sup>(1)</sup>**


Van bekken, genitaliën, billen en bovenbenen

**Eenvoudig aan te trekken<sup>(5)</sup>**

Dankzij de elastische stoffen eenvoudig aan en uit te trekken


**Comfort:**

- Zachte stof<sup>(3)(4)</sup> voor meer comfort
- Platte naden om huidreacties te beperken

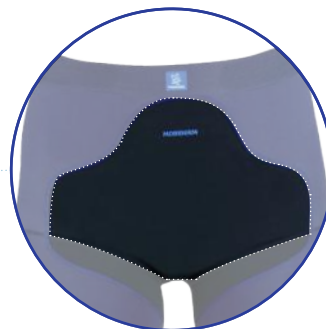

### Verstevigde zone

2 lagen stof

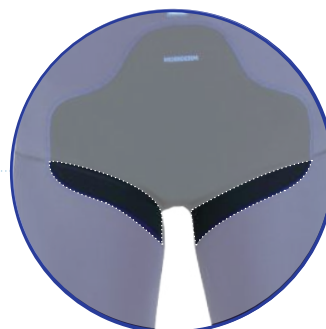

### Verstevigde zones

2 lagen stof



## Mobiderm-mobilisatiepad:

- Bekleed met zachte<sup>(3)(4)</sup> stof voor meer comfort
- Kleine blokjes voor meer aanpassingsvermogen\*<sup>(2)</sup>

**Kan met of zonder de genitale pad worden gedragen**

\* Het contactoppervlak is beperkt, het aantal blokjes geoptimaliseerd.



	<b>cK (cm)</b> Omtrek heup	<b>cG (cm)</b> Omtrek dijbeen	<b>Z-index</b>
<b>1</b>	88 - 94	45 - 54	17112370 Mobiderm Short vrouw, maat 1
<b>2</b>	95 - 101	48 - 58	17112389 Mobiderm Short vrouw, maat 2
<b>3</b>	102 - 108	51 - 62	17112397 Mobiderm Short vrouw, maat 3
<b>4</b>	109 - 115	54 - 66	17112400 Mobiderm Short vrouw, maat 4
<b>5</b>	116 - 122	57 - 69	17112419 Mobiderm Short vrouw, maat 5
<b>6</b>	123 - 129	60 - 72	17112427 Mobiderm Short vrouw, maat 6

1: OLYMPY-studie: verkennende studie om de klinische voordelen te beoordelen van het dragen van de MOBIDERM Intimate Short bij patiënten met lymfoedeem in bekken en/of genitaliën. - 2021 - 32 patiënten - ID-RCB-nr.: 2020-AO0247-32; belangrijkste doel: beoordeling van het effect van de MOBIDERM Intimate short, na 12 weken, op basis van de door de patiënt zelf waargenomen verandering in kwaliteit van leven met betrekking tot lymfoedeem in bekken/genitaliën.  
 2: Zie interne gegevens CE-markering.  
 3: CC1508 - Panty Mobiderm - Plan de validation (2019)  
 4: CC1508 - Rationnel de formulation (2021)  
 5: CC1508 - Rapport de tests Usability - Evaluation sommative (2020)




**THUASNE**



## MOBIDERM

Compressie BH

### Oedeem na borstkanker

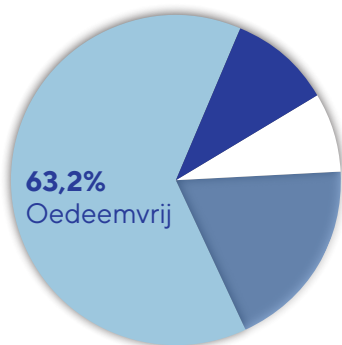

**10,2%**  
Lymfoedeem in de arm


**7,6%**  
Lymfoedeem in de arm +  
borst en/of borstwand

**19%**  
Borst- en/of  
borstwandoedeem

# Zo bepaal je de juiste BH-maat

## De juiste bh-maat bepaal je het beste met een goed passende bh aan:

- De onderrand van de bh mag niet insnoeren.
- De cups mogen de borsten niet insnoeren en moeten deze volledig omsluiten aan de zijkanten en bij het decolleté

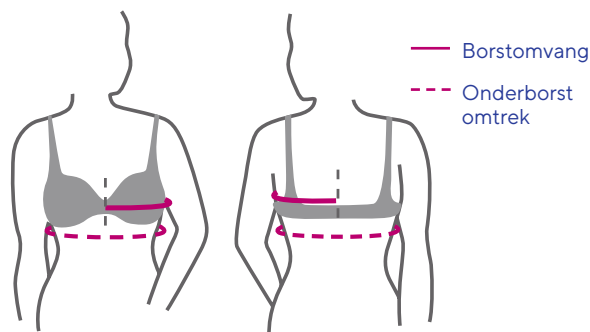

### 1. De juiste maat bh bepalen

Meet eerst de onderborstomtrek. Vergelijk de meting met de juiste bh-maat in onderstaande tabel (stap 1).

**Voorbeeld:** 79 cm gemeten = bh-maat S.

### 2. De juiste cupmaat vinden

Meet vanaf het midden van de rug (ruggengraat) over het volste deel van de borst tot aan het borstbeen.

Verdubbel vervolgens dit meetresultaat. Zoek deze maat op in dezelfde kolom als de bh-maat in gedeelte (stap 2) van de tabel.

**Voorbeeld:** 47 cm gemeten, is verdubbeld 94 cm. Als de bh-maat S is, is de cupmaat B.

Dus in dit geval bestel je een Mobiderm compressie BH, maat S, cup B. De bijbehorende Z-index code vind je hiernaast.

Z-index	Omschrijving
17129516	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup AA/A
17129451	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup B/C
17129508	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup D/E
17129540	Mobiderm compressie BH, maat S, cup AA/A
17129524	Mobiderm compressie BH, maat S, cup B/C
17129532	Mobiderm compressie BH, maat S, cup D/E
17129575	Mobiderm compressie BH, maat M, cup AA/A
17129559	Mobiderm compressie BH, maat M, cup B/C
17129567	Mobiderm compressie BH, maat M, cup D/E
17129605	Mobiderm compressie BH, maat L, cup AA/A
17129583	Mobiderm compressie BH, maat L, cup B/C
17129591	Mobiderm compressie BH, maat L, cup D/E
17129648	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup AA/A
17129613	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup B/C
17129621	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup D/E

#### Stap 1: Onderborstomtrek in cm

68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117
XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL

#### Stap 2: De juiste cupmaat wordt afgeleid van de borstomvang in cm

AA	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127
A	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129
B	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131
C	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133
D	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135
E	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137

Wij adviseren bij een grote omvang van oedeem en/of hygiëne een Mobiderm pad bij te bestellen.

Deze kan op maat geknipt worden.


# LYMPHATREX VEST

LYMPHATREX vesten zijn bedoeld voor de onderhoudsfase van oedeem

## Werking

Lymphatrex is een weefsel met korte-rek eigenschappen. Het is technisch geweven en heeft daardoor een hoge werkdruk en lage rustdruk. Ideaal voor compressievesten.

### Stimulatie van het lymfevocht en optimalisatie van de drainage bij beweging.

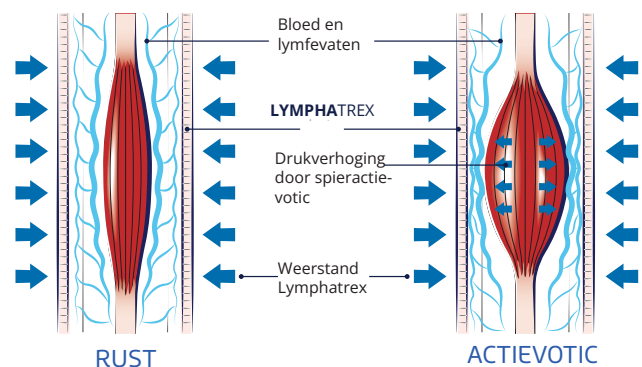


## Materialen

**Poly:** 82% polyamide, 18% elastaan.

*Dit materiaal zorgt voor een optimale vocht- en temperatuursregulatie.*

## Modellen

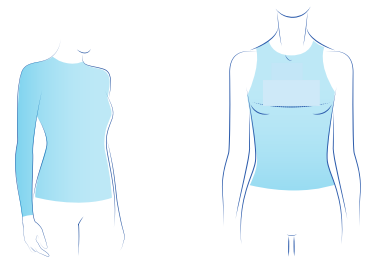

	Vest met armen	Vest zonder armen
<b>Beige of caramel</b>	15647749	15647730
<b>Zwart</b>	15647838	15647811
<b>Antraciet</b>	17084113	17084105
<b>Jeans</b>	17084148	17084121
<b>Blauw</b>	17084164	17084156
<b>Rood</b>	17084180	17084172

## Opties

Sluiting

Rits

Haken & ogen

Rits met haken & ogen

Siliconenband 3 of 5 cm

Cup beige

Cup zwart

Prothesehoes

15648346 of 1648362

15648214

15648230

15648257

Vul het maatformulier in om een Lymphatrex vest te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op [thuasne.nl](http://thuasne.nl) onder downloads.

**Wist je dat Thuasne trainingen verzorgt voor het aanmeten van compressiekleding?**

# LITTEKENS & BRANDWONDEN

CICATREX wordt toegepast in confectie en maatwerk

## CICATREX SKIN




Cicatrex Skin is een zeer fijn, licht geweven, glad en zacht materiaal voor een hoog draagcomfort:


- Zacht op de huid
- Droogt snel
- Makkelijk aan te trekken



59% Polyamide  
41% Dorlastan

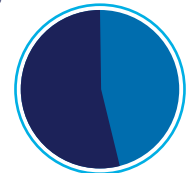


## CICATREX NATURE

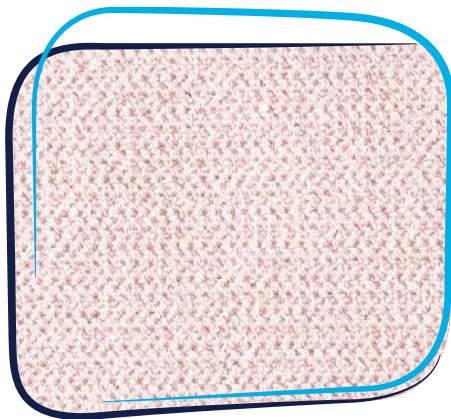


Cicatrex Nature bevat een hoge concentratie viscose, gemaakt van natuurlijke materialen (hout).

- Zacht op de huid
- Vocht doorlaatbaar
- Ademend
- Makkelijk aan te trekken

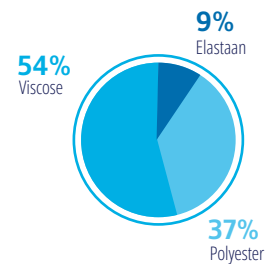


## CICATREX RIGID

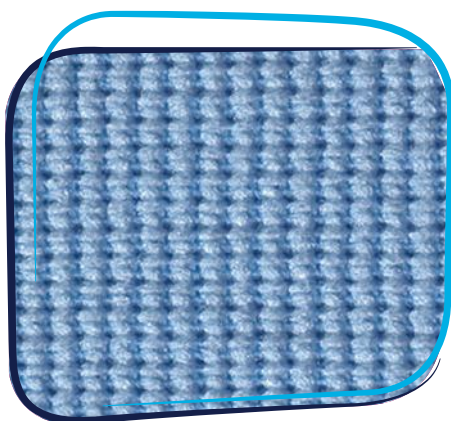

Cicatrex Rigid is een duurzaam en slijtvast materiaal. Ideaal voor kinderen en de actieve patiënt.




19% Elastaan

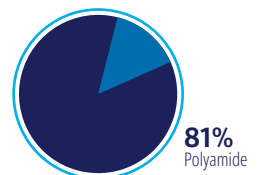

## CICATREX SILVER



Cicatrex Silver is een vlakgebreid materiaal met zilvervezels. Deze zilvervezels hebben een antibacteriële werking.

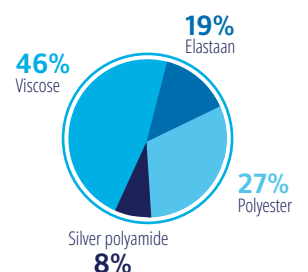


# CICATREX CONFECTIE

Compressiekleding

## MAATTABEL ONDERSTE EXTREMITEIT

De meetlijn voor de bekkenomvang (A) moet op 3 of 4 cm boven de pubis rand en ter hoogte van de bovenkant van de bil.

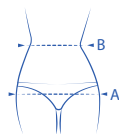


Mt	Bekkenomvang (A)	Taille omvang (B)
1	88 - 94 cm	62 - 72 cm
2	95 - 101 cm	67 - 79 cm
3	102 - 108 cm	73 - 85 cm
4	109 - 115 cm	80 - 93 cm
5	116 - 122 cm	90 - 104 cm
6	123 - 129 cm	97 - 113 cm

## NATURE GORDEL

Maat	Kleur	Z-index
1	 WIT	15638278
2		15638286
3		15638294
4		15638308
5		15638316
6		15638324

## NATURE BERMUDA OPEN KRUIS

Maat	Kleur	Z-index
1	 ZWART	15637441
2		15637468
3		15637476
4		15637484
5		15637492
6		15637506


## NATURE CAPRI OPEN KRUIS

Maat	Kleur	Z-index
1	 ZWART	15637328
2		15637336
3		15637344
4		15637352
5		15637360
6		15637379


## NATURE LEGGING OPEN KRUIS

Maat	Kleur	Z-index
1	 ZWART	15637573
2		15637581
3		15637603
4		15637611
5		15737638
6		15737646


## NATURE HOOFDVERBAND

Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
0	51 - 52 cm	 WIT	15636933
1	53 - 55 cm		15636941
2	56 - 57 cm		15636968
3	58 - 59 cm		15636976


## NATURE PARTIEEL HOOFDVERBAND

Maat	Hoofdomvang (B)	Kleur	Z-index
1	27 - 30 cm	 WIT	15636860
2	31 - 36 cm		15636879
3	37 - 45 cm		15636887

## NATURE OPEN HOOFDVERBAND

Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
0	51 - 52 cm	 WIT	15636895
1	53 - 55 cm		15636909
2	56 - 57 cm		15636917
3	58 - 59 cm		15636925


## NATURE OORVERBAND


Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
1	< 52 cm	 WIT	15637220
2	> 52 cm		15637239

# CICATREX CONFECTIE


Compressiekleding


## NATURE VEST ZONDER MOUWEN

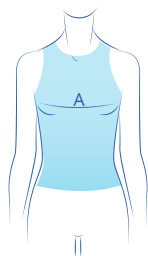

Maat	Omvang thorax (A)	Kleur	Z-index
1	74 - 82 cm	 WIT	15639096
2	83 - 91 cm		15639118
3	92 - 98 cm		15639126
4	99 - 115 cm		15639134
5	116 - 120 cm		15639142
6	121 - 135 cm		15639150


## NATURE SLEEVE

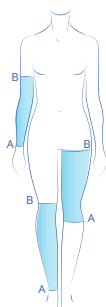


Maat	Distale omvang (A)	Proximale omvang (B)	Hoogte (AB)	Kleur	Z-index
1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	35 cm	 WIT	15637859
2	11 - 14 cm	23 - 28 cm			15637867
3	14 - 16 cm	28 - 32 cm	45 cm		15637875
4	16 - 20 cm	32 - 37 cm			15637883
5	20 - 25 cm	37 - 42 cm			15637891
6	25 - 30 cm	42 - 48 cm			15637905
7	30 - 40 cm	48 - 58 cm			15637913
8	40 - 50 cm	58 - 67 cm			15637921


## NATURE SHORT SLEEVE



Maat	Omvang midden van ledemaat (A)	Hoogte	Kleur	Z-index
1	12 - 14 cm	20 cm	 WIT	15637948
2	15 - 17 cm			15637956
3	18 - 22 cm	26 cm		15637964
4	23 - 29 cm			15637972
5	30 - 37 cm			15637980
6	38 - 45 cm			15367999
7	46 - 54 cm			15638006
8	55 - 63 cm			15638014

## SKIN LONG SLEEVE

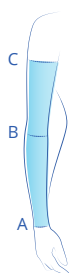

Maat	Distale omvang (A)	Omvang midden van ledemaat (B)	Proximale omvang (C)	Hoogte (AC)	Kleur	Z-index
1	13 - 15 cm	20 - 25 cm	22 - 28 cm	39 cm	 CAMEL	15639525
2	15 - 17 cm	23 - 28 cm	25 - 31 cm			15639533
3	17 - 19 cm	26 - 31 cm	29 - 35 cm			15639541
4	19 - 21 cm	29 - 34 cm	33 - 39 cm			15639568
5	21 - 23 cm	32 - 37 cm	37 - 43 cm			15639576
6	23 - 26 cm	35 - 41 cm	41 - 48 cm			15639584


## SKIN TEENKAP



Maat	Omvang (A)	Kleur	Z-index (zwt)	Z-index (cml)
1	21 - 22 cm	 ZWART CAMEL	16307534	16307526
2	23 - 24 cm		16307550	16307607
3	25 - 26 cm		16307577	16307569
4	27 - 28 cm		16307593	16307585



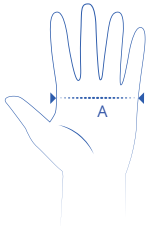

## SKIN MAATTABEL




Maat	Omvang hand (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm



## SKIN HANDSCHOEN LANG GESLOTEN VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639673	15957411
2	 CARMEL	15639681	15957438
3		15639703	15957446
4	 ZWART	15369711	15957454
5		15639738	15957462
6		15639746	15957470
7		15639754	15957489
8		15639762	15957497


## SKIN HANDSCHOEN KORT GESL. VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639592	15957578
2	 CARMEL	15639606	15957586
3		15639614	15957594
4	 ZWART	15639622	15957608
5		15639630	15957616
6		15639649	15957624
7		15639657	15957632
8		15639665	15957640

## SKIN HANDSCHOEN KORT OPEN VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639770	15639851
2	 CARMEL	15639789	15639878
3		15639797	15639886
4	 ZWART	15639800	15639894
5		15639819	15639908
6		15639827	15639916
7		15639835	15639924
8		15639843	15639932

## FILIFINE MAATTABEL

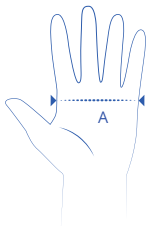


Maat	Omvang hand (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	16,5 - 18 cm
4	18,5 - 20 cm
5	20,5 - 22 cm
6	22,5 - 24 cm

## FILIFINE HANDSCHOEN OPEN VINGERS KORT

Maat	Kleur	Z-index
1		15639460
2	 BEIGE	15639479
3		15639487
4		15639495
5		15639509
6		15639517

## VINGER PROTECTOR


Maat	Omvang vinger (A)	Hoogte	Kleur	Z-index
1	25 - 27 mm	100 - 110 mm	 CARMEL	16579658
2	29 - 31 mm			16579666

# CICATREX BROEK

Veel toegepast bij lip-/lymfoedeem

## CICATREX RIGID


Cicatrex Rigid is een duurzaam en slijtvast materiaal. Ideaal voor de actieve patiënt.

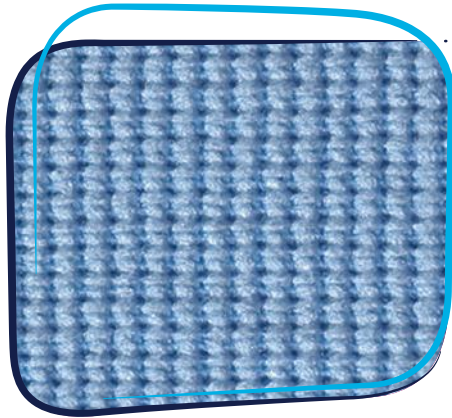

## CICATREX SKIN


Cicatrex Skin is een zeer fijn, licht geweven, glad en zacht materiaal. Gegarandeerd voor een hoog draagcomfort:

- Zacht op de huid
- Droogt snel
- Makkelijk aan te trekken

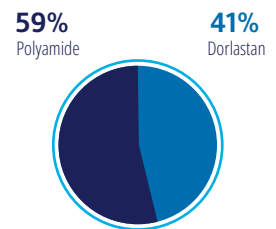

## Modellen

Uitvoering  
Z-Index

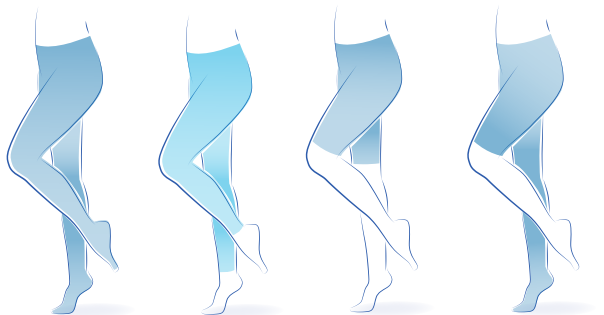

Stijl	Z-Index
Panty (AT)	15742482
Legging (CT/BT)	15742482
Bermuda (FT/ET)	15742482
Gecombineerd (FT/ET)	15742482
	15742520
	15742539
	15742598

## Opties

## Z-index

Rompverlenging	15742504
Buikversterking diagonaal	15742512
Siliconenband 3 of 5 cm	15742873
Elastische band 5 cm	15742873
Voetstuk met open tenen	15742563
Voetstuk met gesloten tenen	15742598
Sluiting	15742865
Rits	
Haken en ogen	
Rits met haken en ogen	
Gesloten kruis	15742547
(open kruis is standaard)	



Vul het maatformulier in om een Cicatrex broek te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op [thuasne.nl](https://thuasne.nl), onder downloads.


# CICATREX Maatwerk



Vul het maatformulier in om een Cicatrex maatwerkartikel te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op [thuasne.nl](http://thuasne.nl) onder downloads.


## ROMP

<b>Rompdeel</b>	Met armaanzet	15742148
	Zonder armaanzet	15742121
<b>Materialen</b>	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
<b>Opties</b>	Rits	
	Haken en ogen	
	Rits met haken & ogen	
	Cup met compressie	15742350
	Prothesehoes	15648257
	Prothesehoes Silon-tex	-

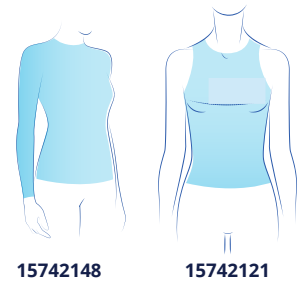

## HAND

<b>Modellen</b>	Handschoen met duim zonder vingers tot	15742393
	Handschoen met vingers tot max E	15742407
<b>Materialen</b>	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
<b>Opties</b>	Verlenging E-G / E-F	15742458
	Schouderkap met BH-bevestiging	15742431
	Schouderkap met gordel	15742431
	Vingerspreider	15742466

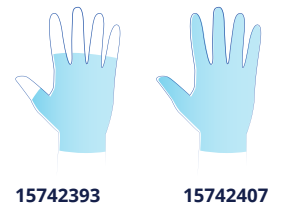


## VINGER

<b>Modellen</b>	Vingerling	15742385
<b>Materialen</b>	Nature knitted	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	



## ARM

<b>Modellen</b>	Armkous C-E, C-D	15742415
	Armkous C-F, C-G	15742415 +
<b>Materialen</b>	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver Knitted	
	Skin woven	
<b>Opties</b>	Schouderkap met BH-bevestiging	15742431
	Schouderkap met gordel	15742431
	Vingerspreider	15742466

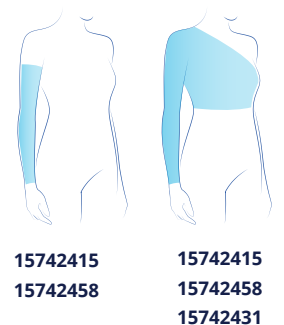

## HOOFD


<b>Modellen</b>	Bivakmuts	15742067
	Bivakmuts met open gezicht	15742059
	Hoofd-/Halsband	15742040
	Kinbandage	15742032
<b>Materialen</b>	Nature woven	
	Skin woven	
	Neus- of oorbedekking	15742075



1574267

## BEEN / VOET


<b>Modellen</b>	Kous B-D, E-G	15742717
	Kous A-B1	15742687
	Kous A-D met open teen	15742695
	Kous A-G, A-F met open teen	15742709
	Kous B-G	15742725
	Voetkap met open teen	15742679
<b>Materialen</b>	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
<b>Opties</b>	Gesloten teen	15742776
	Heupbevestiging	15742733

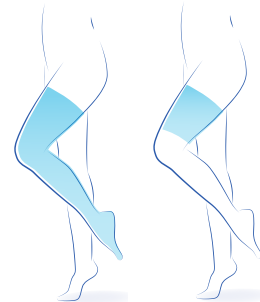

15742709

15742717

15742776

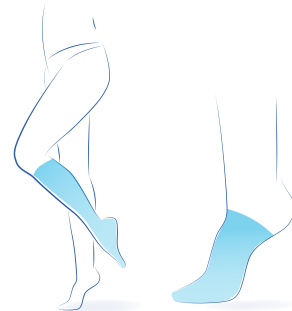

15742695

15742679

15742776

15742776



## ALGEMENE OPTIES

<b>Opties</b>	Siliconenboord 3 cm of 5 cm aan arm/been	15742873
	Elastische band 3 cm of 5 cm aan arm/been	15742873
	Sluiting haken & ogen	15742865
	Sluiting klittenband	15742865
	Sluiting rits	15742865
	Sluiting rits met haken & ogen	15742865
	Drukpelotte ingenaaid > 500 cm <sup>2</sup>	15744221
	Drukpelotte ingenaaid - 250 - 500 cm <sup>2</sup>	15744183
	Drukpelotte ingenaaid - 100 - 249 cm <sup>2</sup>	15744175
	Drukpelotte ingenaaid - 10 - 99 cm <sup>2</sup>	15744116
	Drukpelotte ingenaaid tot 9 cm <sup>2</sup>	15743756
	Memoryschuim ingenaaid	-
	Polstering opgenaaid	-
	Silon-tex ingenaaid > 500 m <sup>2</sup>	15744221
	Silon-tex ingenaaid - 250 - 500 cm <sup>2</sup>	15744183
	Silon-tex ingenaaid - 100 - 249 cm <sup>2</sup>	15744175
	Silon-tex ingenaaid - 10 - 99	15744116
	Silon-tex ingenaaid tot 9 cm <sup>2</sup>	15743756
	Silon-tex met drukpelotte > 500 cm <sup>2</sup>	15744264
	Silon-tex met drukpelotte 250 - 500 cm <sup>2</sup>	15744213
	Silon-tex met drukpelotte 100 - 249 cm <sup>2</sup>	15744159
	Silon-tex met drukpelotte 10 - 99 cm <sup>2</sup>	15744132
	Silon-tex met drukpelotte tot 9 cm <sup>2</sup>	15743764
Voering ingenaaid	17084075	
Voering kunstleer opgenaaid	-	



# LYMPHATREX

Maatwerk vlakbrei TEK assortiment drukklasse II en III RAL.

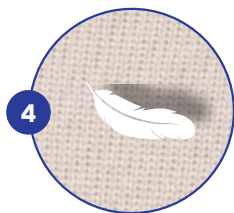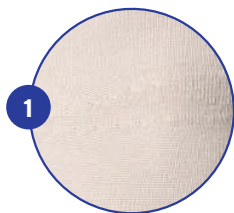

## COMFORTABEL

- **Anatomische aanpassingen**, voor de meeste gevoelige plekken, zoals knie en elleboog. **1 2**
- **Vlakke naden**. **3**
- **Zacht op de huid**, door specifieke breimethode.

## MAATWERK

- **Grote hoeveelheid aan opties**, zodat TEK perfect aansluit op de behoefte van de eindgebruiker
- **Veel modellen beschikbaar**, om een uitvoering op maat te leveren

## KEUZE IN MATERIAAL

2 verschillende materialen met elk hun specifieke eigenschappen

- **Poly**, geweven van polyamide microvezels, biedt **zachtheid** en **goede warmteregulatie**. Ideaal voor de meer actieve eindgebruiker.



- **Poly Strong**, in vergelijking met de eigenschappen van Poly, biedt dit materiaal een **stevigere compressie** en **rigiditeit**, dankzij het hogere estastaan gehalte. Voor ernstige vormen van lymfoedeem

## LYMPHATREX....

- ✓ *is opgenomen in de lijst van Bernink en in de database van VLOT Solutions.*
- ✓ *wordt geproduceerd in Duitsland*
- ✓ *is er voor Arm en Been*
- ✓ *is volledig maatwerk*

Maatformulieren vind je achterin deze map of op **thuasne.nl** onder het kopje DOWNLOADS.

Vragen over maatwerk of hulp bij het aanmeten? Onze productspecialisten staan voor je klaar!



# LYMPHATREX

## TEKVLAKBREI - ARM

Drukklasse & materiaal	CG	AC1	AD	AG
RAL Ccl 2 (Poly)	•	•	•	•
<b>Kleuren</b>				
Beige	•	•	•	•
Caramel	•	•	•	•
Zwart	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•
Rood	•	•	•	•
Antraciet	•	•	•	•
Blauw	•	•	•	•
Mint	•	•	•	•
<b>Opties</b>				
Schuine boord	•	-	-	•
Siliconenboord noppen 3 cm	•	•	•	•
Siliconenboord noppen 5 cm	•	•	•	•
Elastische boord 3 cm	•	•	•	•
Elastische boord 5 cm	•	•	•	•
Anatomische elleboog	•	-	-	•
Schouderkap	•	-	-	•
Futterstof voering	•	•	•	•
Polstermateriaal	•	•	•	•
Poreuse afwerking	•	Standaard	•	•
Met vingers	-	•	•	•
Zonder vingers	-	•	•	•



## TEKVLAKBREI - BEEN

Drukklasse & materiaal	AD	AG	AT	AA1
RAL Ccl 2 - Poly	•	•	•	•
RAL Ccl 2 - Poly strong	•	•	•	•
RAL Ccl 3 - Poly strong	•	•	•	•
<b>Kleuren</b>				
Beige	•	•	•	•
Caramel	•	•	•	•
Zwart	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•
Rood	•	•	•	•
Antraciet	•	•	•	•
Blauw	•	•	•	•
Mint	•	•	•	•
<b>Opties</b>				
Teenstuk open schuin	•	•	•	•
Y-marketing	•	•	•	-
Teenstuk gesloten	•	•	•	•
Schuine boord	•	•	•	-
Heupbevestiging	-	•	-	-
Elastische tailleband	-	-	•	-
Siliconenboord noppen 3 cm	•	•	•	-
Siliconenboord noppen 5 cm	•	•	•	-
Met tenen	•	•	•	•
Knoopsgat elastiek	-	-	•	-
Siliconenboord 3/4	•	•	•	-
Elastische boord 3 cm	-	•	•	-
Elastische boord 5 cm	-	•	•	-
Kruis zonder compressie	-	-	•	-
Poreuse afwerking	•	•	•	•
Anatomisch geweven knie	-	•	•	-



**THUASNE®**

---

## **VENOFLEX men**

---

**Stevig, stijlvol en eigentijds!**

Compressiesokken  
voor mannen met  
een wow-effect



# VENOFLEX men

## Stevig, stijlvol en eigentijds!

*Compressiesokken voor mannen met een wow-effect*

- ✓ De **ingenieuze breitechniek** met een naadloze en zachte boord vergemakkelijkt het aantrekken. De compressiekous vormt zich comfortabel naar het been.
- ✓ Het **hoge katoengehalte** zorgt voor een aangenaam, huidvriendelijk gevoel. Dit slijtvaste materiaal heeft ook een warmte-regulerend effect en past zich dus aan de behoeften van de patiënt.



*Natuurlijk katoen*



*Naadloze boord*



*Elegante ripstructuur*



*Versterkte hiel*

- **Eigentijds** en toch een sterk therapeutisch effect.
- **Tijdloze kleuren marine blauw en zwart** - goed te combineren met elke gelegenheid en kledingstijl.
- **Comfortabel**, dankzij natuurlijk katoen.





# VENOFLEX MICRO

Rondbrei TEK - "De solide basis"



Mode licht

Caramel

Mode

Zwart


Comfortabelen zacht dankzij het zijdezachtgaren\*

- Elegant
- Huidvriendelijk, hypoallergeen\*\*
- Machinewasbaar


*Voor welke patiënten?*

Wie op zoek is naar een elegante en vrouwelijke stijl




**AD**  **DRUKKLASSE**

30021A	<b>1</b>
30021B	<b>2</b>

**AG**  **DRUKKLASSE**


Women	
30023D	<b>1</b>
30023E	<b>2</b>

**AG+**  **DRUKKLASSE**

Women	
30023G	<b>1</b>
30023H	<b>2</b>

**AT**  **DRUKKLASSE**

Women	
30025A	<b>1</b>
30025B	<b>2</b>

**ATU**  **DRUKKLASSE**

Women	
30027A	<b>1</b>
30027B	<b>2</b>

# VENOFLEX ELEGANCE

Rondbrei TEK - "Elegantie"



Mode licht

Caramel

Mode

Diamant

Blauw

Zwart

- Gemakkelijk aan- en uittrekken\*
- Machinewasbaar

*Voor welke patiënt?*

Wie op zoek is naar comfortabele, elegante en alledaagse compressie



**AD**  **DRUKKLASSE**

20021B	<b>2</b>
--------	----------

**AG**  **DRUKKLASSE**

20023E	<b>2</b>
--------	----------

**AG+**  **DRUKKLASSE**

20023H	<b>2</b>
--------	----------


**AT**  **DRUKKLASSE**

20025B	<b>2</b>
--------	----------

**ATU**  **DRUKKLASSE**

20027B	<b>2</b>
--------	----------

# Welke maat en lengte?

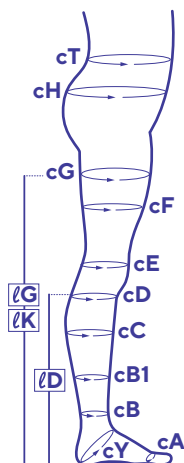

- |            |   |           |  |
|------------|---|-----------|--|
| <b>cA</b>  | Omtrek van de kop van de middenvoetsbeentjes    | <b>cG</b> | Omvang bovenbeen t.h.v. lies                                   |
| <b>cY</b>  | Omvang wreef met voet in 90 graden              | <b>cT</b> | Omvang taille op smalste punt                                  |
| <b>cB</b>  | Omvang enkel op smalste punt                    | <b>cH</b> | Omvang heup t.h.v. trochantor major                            |
| <b>cB1</b> | Omvang onderbeen net voor spierbuik kuitspieren | <b>lD</b> | Lengte vloer tot tibiakopje                                    |
| <b>cC</b>  | Omvang kuit op breedste punt                    | <b>lK</b> | Lengte vloer tot kruis gemeten aan de binnenzijde van het been |
| <b>cD</b>  | Omvang net onder de knie t.h.v. tibiakopje      | <b>lG</b> | Lengte vloer tot lies gemeten aan de buitenzijde van het been  |
| <b>cE</b>  | Omvang midden knie                              |           |  |
| <b>cF</b>  | Omvang midden bovenbeen                         |           |  |

		Gemeten maat in cm																
		cA	cY	cB	cB1	cC-	cC	cC+	cD	cE	cF	cG-	cG	cG+	cT maxi	cH maxi		
RONDREI - AD	RAL MICRO - ELEGANCE	KORT lD 34-39	1	17-22	26-31	18-20	23-27	-	28-34	-	24-29	-	-	-	-	-	-	
			2	19-24	28-33	20-22	24-29	-	30-37	-	27-33	-	-	-	-	-	-	-
		LANG lD 39-45	3	21-26	29-35	22-24	26-32	-	33-40	-	32-39	-	-	-	-	-	-	-
			4	23-29	31-37	24-26	29-35	-	35-43	-	34-42	-	-	-	-	-	-	-
			5	25-32	32-38	26-28	31-37	-	37-46	-	36-45	-	-	-	-	-	-	-
			6	27-34	33-40	28-30	33-39	-	39-49	-	38-48	-	-	-	-	-	-	-
RONDREI - AD	RAL MEN	KORT lD < 44,5	0	16-21	24-30	17-19	22-25	-	27-35	-	26-34	-	-	-	-	-	-	
			1	18-23	27-32	19-21	23-28	-	30-35	-	29-34	-	-	-	-	-	-	-
		LANG lD > 44	2	20-26	28-35	21-24	25-32	-	32-38	-	31-37	-	-	-	-	-	-	-
			3	23-29	31-37	24-26	29-35	-	34-42	-	33-41	-	-	-	-	-	-	-
			4	25-33	32-39	26-29	31-38	-	37-46	-	36-45	-	-	-	-	-	-	-
5	28-35	33-41	29-31	34-40	-	43-49	-	42-48	-	-	-	-	-	-	-			
RONDREI - AG	RAL MICRO - ELEGANCE	KORT lG 60-69	1	17-22	26-31	18-20	23-27	-	28-34	-	27-33	30-37	39-52	43-48	-	49-57	-	-
			2	19-24	28-33	20-22	24-29	-	30-37	-	29-36	33-40	41-56	45-52	-	53-62	-	-
		NORMAAL lG 70-80	3	21-26	29-35	22-24	26-32	-	33-40	-	32-39	35-43	44-60	49-56	-	57-67	-	-
			4	23-29	31-37	24-26	29-35	-	35-43	-	34-42	37-45	47-65	53-60	-	61-72	-	-
			5	25-32	32-38	26-28	31-37	-	37-46	-	36-45	39-48	50-69	56-64	-	65-77	-	-
			6	27-34	33-40	28-30	33-39	-	39-49	-	38-48	41-51	53-73	60-68	-	69-81	-	-
RONDREI - AG	RAL MICRO - ELEGANCE	NORMAAL lG 81-90	1	17-22	26-31	18-20	23-27	43-57	28-34	-	27-33	30-37	39-52	-	43-57	-	85-105	59-70
			2	19-24	28-33	20-22	24-29	45-62	30-37	-	29-36	33-40	41-56	-	45-62	-	90-110	66-80
		LONG lG 75-85	3	21-26	29-35	22-24	26-32	49-67	33-40	-	32-39	35-43	44-60	-	49-67	-	95-115	76-85
			4	23-29	31-37	24-26	29-35	53-72	35-43	-	34-42	37-45	47-65	-	53-72	-	100-120	82-90
			5	25-32	32-38	26-28	31-37	56-77	37-46	-	36-45	39-48	50-69	-	56-77	-	105-125	88-95
			6	27-34	33-40	28-30	33-39	60-81	39-49	-	38-48	41-51	53-73	-	60-81	-	110-130	92-105
RONDREI - AT	RAL MICRO - ELEGANCE	NORMAAL lG 65-75	1	17-22	26-31	18-20	23-27	43-57	28-34	-	27-33	30-37	39-52	-	43-57	-	85-105	59-70
			2	19-24	28-33	20-22	24-29	45-62	30-37	-	29-36	33-40	41-56	-	45-62	-	90-110	66-80
		LONG lG 75-85	3	21-26	29-35	22-24	26-32	49-67	33-40	-	32-39	35-43	44-60	-	49-67	-	95-115	76-85
			4	23-29	31-37	24-26	29-35	53-72	35-43	-	34-42	37-45	47-65	-	53-72	-	100-120	82-90
			5	25-32	32-38	26-28	31-37	56-77	37-46	-	36-45	39-48	50-69	-	56-77	-	105-125	88-95
			6	27-34	33-40	28-30	33-39	60-81	39-49	-	38-48	41-51	53-73	-	60-81	-	110-130	92-105
RONDREI - ATU	RAL MICRO - ELEGANCE	NORMAAL lG 65-75	1	17-22	26-31	18-20	23-27	43-57	28-34	-	27-33	30-37	39-52	-	43-57	-	85-105	59-70
			2	19-24	28-33	20-22	24-29	45-62	30-37	-	29-36	33-40	41-56	-	45-62	-	90-110	66-80
		LONG lG 75-85	3	21-26	29-35	22-24	26-32	49-67	33-40	-	32-39	35-43	44-60	-	49-67	-	95-115	76-85
			4	23-29	31-37	24-26	29-35	53-72	35-43	-	34-42	37-45	47-65	-	53-72	-	100-120	82-90
			5	25-32	32-38	26-28	31-37	56-77	37-46	-	36-45	39-48	50-69	-	56-77	-	105-125	88-95
			6	27-34	33-40	28-30	33-39	60-81	39-49	-	38-48	41-51	53-73	-	60-81	-	110-130	92-105



DRUKKLASSE **1** **2** 18 - 21 mmHg

DRUKKLASSE **1** **2** 23 - 32 mmHg

Gecertificeerd door het Hohenstein instituut.  
Opgenomen in de Lijst van Bernink & Eurocom

# COMPRESSIEKOUSSEN

## VENOFLEX DAMES



Medische compressieklousen voor de retail  
Deze klousen vallen binnen klasse 1 en zijn verkrijgbaar in de apotheek,  
winkel of online.

### Kokoon Absolu

<b>Modellen</b>	Kous AD Panty AT Zwangerschapspanty AT
<b>Werking</b>	Medische compressieklous met een verantwoorde drukopbouw.
<b>Overig</b>	Antibacterieel materiaal. Verstevigde hiel en voetboog. Machinewas mogelijk.

### Simply Coton Fin

<b>Modellen</b>	Kous AD
<b>Werking</b>	Katoenen klousen, zacht en hoog draagcomfort
<b>Overig</b>	Geweven teenstuk. Schuine brede boord, vermindert kans op tourniquet effect. Geen versteviging in de voet. Geweven met een fijn ribpatroon voor mooie uitstraling. Machinewas mogelijk.

### Fast Laine


<b>Modellen</b>	Kous AD
<b>Werking</b>	Vocht & temperatuur regulerend
<b>Overig</b>	39% Merino wool. Isolator en thermoregulator. Ademend en anti-bacterieel. Extreem zacht op de huid en jeukt niet. Hoge flexibiliteit. Machinewas mogelijk.

## MAATTABEL

### DAMES - Schoenmaat 36-32

	KORT /D < 37 cm			
	NORMAAL 37 cm < /D < 40 cm			
	LANG /D > 40 cm			
	cB	cC -	cC	cC +
0	16 - 19 cm	21 - 28 cm	28 - 33 cm	33 - 42 cm
1	19 - 21 cm	23 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 46 cm
2	21 - 24 cm	26 - 32 cm	32 - 38 cm	38 - 48 cm
3	24 - 26 cm	29 - 34 cm	34 - 42 cm	42 - 52 cm
4	26 - 29 cm	32 - 37 cm	37 - 46 cm	46 - 54 cm
5	29 - 31 cm	36 - 43 cm	43 - 49 cm	49 - 56 cm

KNIEKOUSSEN

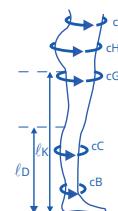

/D: lengte vloer tot kruis  
cB: kleinste omvang enkel  
cC: grootste omvang kuit  
cG: grootste omvang dijbeen  
cH: grootste omvang heup  
cT: kleinste omvang taille

### INDICATIES

Vermoeide benen aan het einde van de dag, zware benen, vochtophoping in de benen.

	KORT /K < 68 cm			
	NORMAAL 68 cm < /K < 74 cm			
	LANG /K > 74 cm			
	cB	cG	cT maxi	cH maxi
0	16 - 19 cm	42 - 52 cm	90 cm	120 cm
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	93 cm	128 cm
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	96 cm	133 cm
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	104 cm	145 cm
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	110 cm	154 cm
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	113 cm	162 cm

PANTY



	KORT /K < 68 cm			
	NORMAAL 68 cm < /K < 74 cm			
	LANG /K > 74 cm			
	cB	cG	cT maxi	cH maxi
0	16 - 19 cm	42 - 52 cm	105 cm	136 cm
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	105 cm	136 cm
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	115 cm	145 cm
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	125 cm	158 cm
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	130 cm	167 cm
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	135 cm	176 cm

PANTY  
ZWANGERSCHAP





# COMPRESSIEKOUSSEN

## VENOFLEX HEREN

Medische compressiekousen voor de retail  
Deze kousen vallen binnen klasse 1 en zijn verkrijgbaar in de apotheek,  
winkel of online.

### Fast Coton

<b>Modellen</b>	Kous AD
<b>Werking</b>	Medische compressiekous met een verantwoorde drukopbouw
<b>Overig</b>	36% Egyptisch katoen Stevige kousen Zacht op de huid Machinewas mogelijk



### Fast Laine

<b>Modellen</b>	Kous AD
<b>Werking</b>	Vocht en temperatuur regulerend.
<b>Overig</b>	39% Merino wool. Isolator en thermoregulator. Ademend en ant-bacterieel. Extreem zacht op de huid en jeukt niet. Hoge flexibiliteit. Machinewas mogelijk.



### MAATTABEL

HEREN - Schoenmaat 38-46

	NORMAAL $\ell D < 44$ cm			
	LANG $\ell D > 44$ cm			
	cB	cC -	cC	cC +
1	19 - 21 cm	23 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 46 cm
2	21 - 24 cm	26 - 32 cm	32 - 38 cm	38 - 48 cm
3	24 - 26 cm	29 - 34 cm	34 - 42 cm	42 - 52 cm
4	26 - 29 cm	32 - 37 cm	37 - 46 cm	46 - 54 cm
5	29 - 31 cm	36 - 43 cm	43 - 49 cm	49 - 56 cm

SOCKS




/ D: lengte vloer tot onderzijde knie

/ K: lengte vloer tot kuis

cB: kleinste omvang enkel

cC: grootste omvang kuit

cG: grootste omvang dijbeen

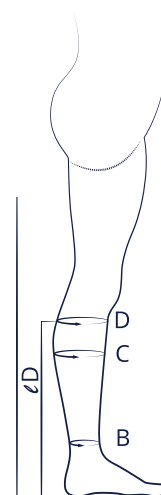

### INDICATIES

Vermoeide benen aan het  
einde van de dag, zware benen,  
vochtophoping in de benen.



# ZWACHTELINSTRUCTIE MOBIDERM

Mobiderm zwachtels zijn toepasbaar voor benen en armen.

## Benodigheden:

- Kit Biflex
- Mobiderm-zwachtel

## Stap 1:

Zwachtel de witte bandage van de Kit Biflex met matige druk om het lichaamsdeel. Zwachtel met 2 cm overlap. Controleer na afloop de mobiliteit.



## Stap 2:

Zwachtel het Mobiderm verband om het been/arm met een overlap van 1 blokje. Leg bij de knie/elleboog het Mobiderm-verband aan in een kruis of een halve overlap. Controleer na afloop de mobiliteit.



## Stap 3:

Zwachtel de beige bandage van de Kit Biflex onder druk. Strijk het verband na. Controleer na afloop de mobiliteit.



# ZWACHTELINSTRUCTIE KIT BIFLEX (ulcus cruris)


Voordat je begint: kies de juiste maat meet hiervoor de omvang van de enkel.



- Maat 1:** <25 cm
- Maat 2:** 25-30 cm
- Maat 3:** > 30 cm

## Stap 1:

Zwachtel de witte bandage met lichte rek over de voet, bedek de hiel volledig en bevestig de hiel. Wij adviseren eerst de bovenzijde en dan de onderzijde te bevestigen (meest effectief).

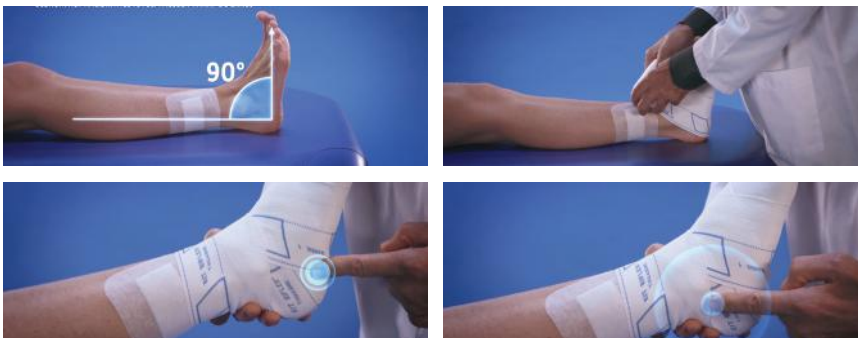


## Stap 2:

Zwachtel het onderbeen en rek daarbij elke rechthoek uit tot een vierkant. Zwachtel elke laag met een halve overlapping (de overlap-lijn). Stop met zwachtelen tot 2 vingers onder de knie. Overtollige zwachtel kan worden afgeknipt. Bevestig de zwachtel met de meegeleverde klittenbanden.



## Stap 3:

Zwachtel de beige bandage met lichte rek om de voet en bedek de hiel volledig. Bevestig deze slag eerst aan de bovenzijde en dan aan de onderzijde (meest effectief).

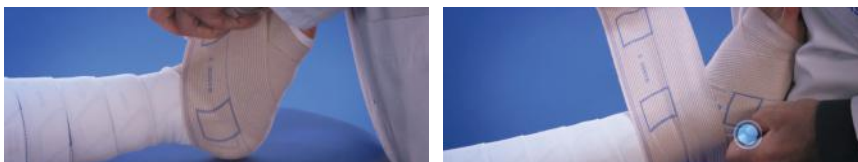

## Stap 4:

Zwachtel het onderbeen en rek daarbij elke rechthoek uit tot tot een vierkant. Zwachtel elke laag met een halve overlapping (de overlap-lijn). Stop met zwachtelen 2 vingers onder de knie. Overtollige zwachtel kan worden afgeknipt. Bevestig de zwachtel met de klittenbanden.



# COMPULCE ONDERZOEK

Beoordeling van de klinische werkzaamheid en veiligheid van **het tweelaagse compressiesysteem KITBIFLEX** vergeleken met **het vierlaagse compressiesysteem PROFORE®** bij de behandeling van ulcus cruris (stadium C6).

*Fase IIIb, multicenter, gerandomiseerd, open-label, nationaal klinisch onderzoek in 2 parallele groepen.*

## Primair doel

De **non-inferioriteit** van het tweelaagse compressiesysteem **KITBIFLEX** aantonen, in vergelijking met het vierlaagse compressiesysteem **PROFORE®**. Bij de behandeling van ulcus cruris (stadium C6) in termen van volledige genezing na 16 weken.

## Primaire uitkomstmaat

Percentage patiënten met **volledige genezing** (100% epithelialisatie en afwezigheid van exsudaat) **na 16 weken**, volgens het oordeel van de onderzoeker.

## Beschrijving populatie



Gemiddelde leeftijd: **74 jaar**  
**68%** vrouwen  
Gemiddelde BMI: **28,9**  
Duur ulcus: **gemiddeld 8 maanden**  
**58%** recidiverende ulcera

92 patiënten toegelaten (veiligheidspopulatie)  
KITBIFLEX: n=49 / **Profore®**: n=43


88 patiënten hebben het compressiesysteem ten minste eenmaal gedragen en met ten minste een primaire uitkomstmaat (Full Analysis Set-populatie)  
KITBIFLEX: n=47 / **Profore®**: n=41

83 patiënten zonder een belangrijke protocolafwijking (per Protocol-populatie)  
KITBIFLEX: n=45 / **Profore®**: n=38

# RESULTATEN

## AANGETOONDE SUPERIORITEIT VAN KITBIFLEX

\* Benedengrens van het 90% betrouwbaarheidsinterval strikt groter dan 0.

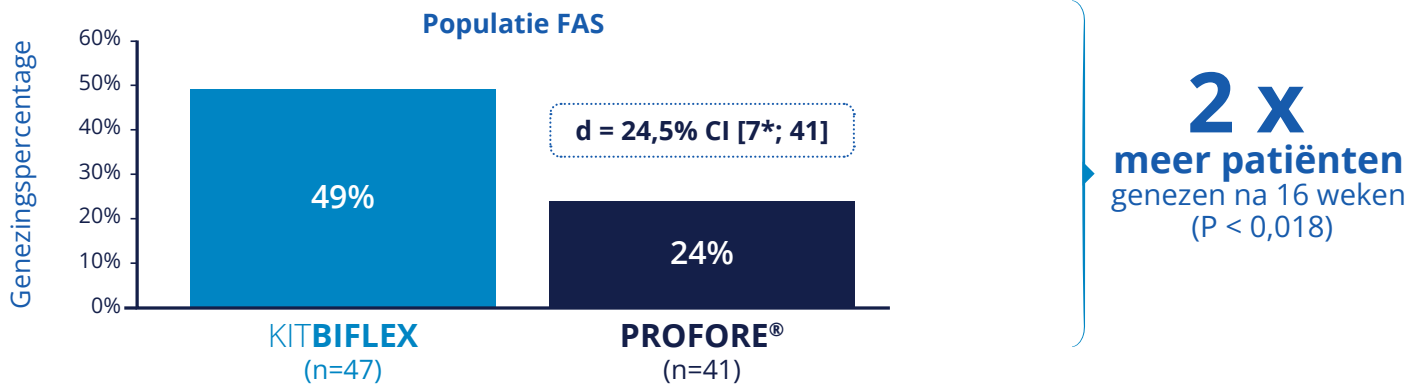

## BEHANDELINGSKOSTEN ONDER CONTROLE



## TEVREDEN PATIËNTEN & ZORGVERLENERS








# MOBIDERM:

## Bewezen effectief compressiesysteem

### EIGENSCHAPPEN

Mobiderm is een medisch hulpmiddel voor behandeling van lymfoedeem. Het wordt ingezet als nachtbehandeling tijdens de onderhoudsfase.

Mobiderm zorgt voor drukverschillen op de huid door de specifiek ontworpen blokkenstructuur. Hierdoor wordt de drainage van lymfevocht geoptimaliseerd. In meerdere Europese studies is het effect van dit compressiesysteem onderzocht.

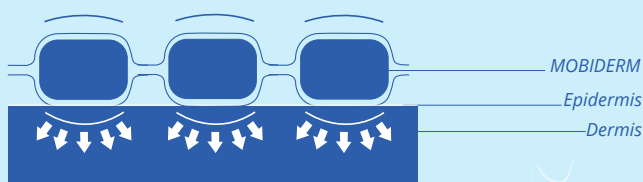


### MOBIDERM IS VERKRIJGBAAR IN

- Verbandmiddel
  - Compressiesysteem
- Voor onderbenen, been en arm  
In maatwerk en confectie



### MARILYN-STUDIE <sup>(1)</sup>

In dit onderzoek is het effect van de Mobiderm nachtcompressie onderzocht tijdens de onderhoudsfase voor behandeling van lymfoedeem na borstkanker. Groep I startte met Mobiderm op dag 0 en groep II op dag 30 van de onderhoudsfase. Resultaten werden vergeleken op dag 30 en dag 90.

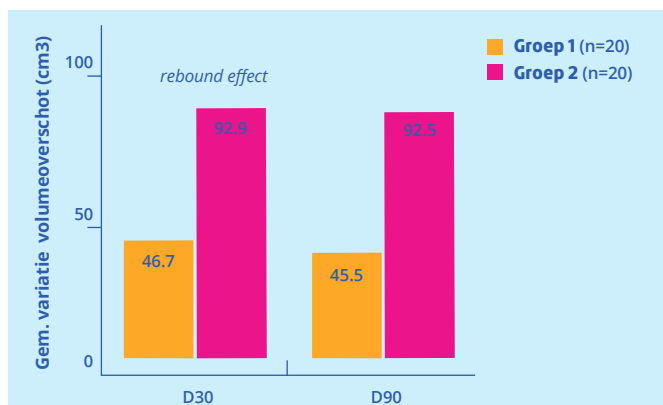

Gemiddelde toename lymfoedeemvolume ten opzichte van D0

### BELANGRIJKSTE CONCLUSIE

Mobiderm nachtcompressie beperkt het vroege rebound effect van het oedeem tijdens de onderhoudsfase bij lymfoedeem na borstkanker.

### CLINICAL USE OF A NIGHT-TIME MOBIDERM GARMENT <sup>(2)</sup>

In dit onderzoek is het lange-termijneffect (6 maanden) van Mobiderm nachtcompressie beoordeeld. Het effect is onderzocht bij 145 patiënten met lymfoedeem als gevolg van borstkanker.

Deze studie heeft de grootste populatie en de langste onderzoeksperiode binnen studies naar compressiehulpmiddelen gedurende de nacht. De primaire uitkomstmaat is het verschil in omtrek tussen aangedane en gezonde arm.



Omvangverschil armen na start Mobiderm (n=145)

### BELANGRIJKSTE CONCLUSIE

Mobiderm nachtcompressie vermindert significant het volume in de arm bij lymfoedeem als gevolg van borstkanker (- 6,6% na 6 maanden).

- (1) Clinical Study to Assess Safety and Efficacy of a New Armsleeve in the Management of Arm Lymphoedema (MARILYN)
- (2) Clinical use of a Night-Time MOBIDERM Garment as a Treatment Modality for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Retrospective Longitudinal Cohort Study

## MEER WETEN?

T: 033 247 44 44  
E: INFO@THUASNE.NL





# Thuasne Compressievesten

## Consumentenonderzoek

We hechten grote waarde aan de feedback van de eindgebruikers van onze producten. Daarom hebben we in samenwerking met Declacare een onderzoek gedaan onder de gebruikers van Thuasne compressievesten. In deze whitepaper vind je een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek.

### Doel

Het primaire doel van dit onderzoek was om de therapietrouwheid van eindgebruikers en de ervaring met het hulpmiddel in kaart te brengen.

### Opzet

De eindgebruikers hebben een vragenlijst ingevuld, met o.a. vragen over de aanleiding voor het starten met het compressievest. De draagtijd in maanden, dagen per week en uren per dag en de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. De vragenlijsten zijn per post verzonden naar 198 mensen die in het verleden een compressievest van Thuasne aangemeten hebben gekregen.

### Resultaten

De respons op onze vragenlijst is met 45% hoog te noemen, in vergelijking met de gemiddelde respons op vragenlijsten. Dat geeft aan dat deze groep gemotiveerd is om de behandeling te evalueren.

#### Aanleiding voor het compressievest

Voor 98% van de respondenten is oedeem, oftewel vochtophoping, in de romp de belangrijkste reden geweest voor het starten met een compressievest. Een tweede duidelijke aanleiding is pijn, aangegeven door 47% van de respondenten.

#### Draagtijd en gebruik van het compressievest

77% draagt het compressievest langer dan negen maanden. 67% geeft aan het vest nog steeds nodig te hebben. Het vest wordt intensief gedragen. 62% geeft aan het vest zes tot zeven dagen per week te dragen en 75% draagt het vest gedurende zeven of meer uur per dag.

#### Toegevoegde waarde

Met behulp van een VAS-score (schaal 0-10) is gemeten wat de bijdrage van het vest is op het verminderen van pijn. En in hoeverre dit een toegevoegde waarde heeft op het uitvoeren van fysieke activiteiten. 53% vindt dat het compressievest hun pijn sterk verminderd heeft (score >7), tegenover 10% die aangeeft dat het vest geen tot nauwelijks heeft bijgedragen in pijnverlichting (score <3).

41% van de respondenten vindt dat het compressievest een aanzienlijke bijdrage biedt in het uitvoeren van hun dagelijkse fysieke activiteiten (score >7). 13% van de respondenten geeft aan niet tot nauwelijks verbetering in fysieke activiteit te ervaren door het compressievest (score <3).

#### Beoordeling

Het compressievest krijgt een gemiddeld cijfer van **7,5** (schaal van 1-10). In de toelichting viel op dat de afname van oedeem aanzienlijk wordt ervaren. Men geeft aan dat ze sterk afhankelijk zijn van het compressievest. Bij de respondenten die het vest met een onvoldoende beoordelen komt vooral naar voren dat ze de druk van het vest niet kunnen verdragen.

#### Conclusie

Op basis van de respons concluderen we, dat de groep "vestgebruikers" van Thuasne erg betrokken is bij de behandeling. Oedeem en pijn zijn hoofdredenen om een Thuasne compressievest op te starten. Het vest is niet een tijdelijk hulpmiddel, zo blijkt uit de respons, maar wordt veelal chronisch gedragen. Daarnaast wordt het vest ook intensief gedragen, zowel in het aantal dagen per week, als in het aantal uren per dag. Er is een hoge tevredenheid over de toegevoegde waarde van het vest op het verminderen van pijn en verbeteren van fysieke activiteit.


Heeft deze whitepaper jouw interesse gewekt en wil je er meer van weten? Mail ons: [info@thuasne.nl](mailto:info@thuasne.nl)



Pijnverlichting



Verbetering van fysieke activiteiten

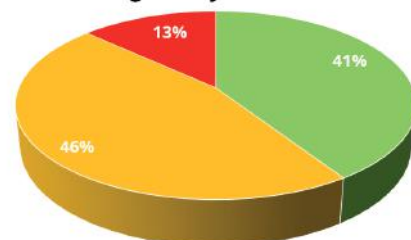

■ Grote verbetering van fysieke activiteiten (Score >7)  
■ Verbetering in fysieke activiteiten (Score 3-7)  
■ Weinig verbetering van fysieke activiteiten (Score <3)



# Thuasne Compressievesten

## de toegevoegde waarde

Wij hechten grote waarde aan onderbouwing van onze producten. Daarom hebben we met ons Lymphatrex compressievest geparticipeerd in een pilot studie van het UMC Utrecht. Deze is in 2019 afgerond en gepubliceerd in "Lymphatic Research and Biology". In deze whitepage een samenvatting van de uitkomsten van deze pilot studie.

### Doel

Het primaire doel van deze pilot studie was het onderzoeken van de toegevoegde waarde van een compressievest binnen de behandeling van lymfoedeem, ontstaan na borstkanker. De primaire uitkomstmaten zijn gerapporteerde oedeem- en pijn afname.

### Methode

Patiënten met ontwikkeling van lymfoedeem, als gevolg van de behandeling van borstkanker, zijn geïncludeerd, wanneer er een symptomatisch oedeem was. Dat wil zeggen een borstoedeem met een pijnscore >3, op een 10 puntsschaal. Deze groep kreeg een compressievest aangemeten. Het vest werd minimaal 4 dagen per week gedragen gedurende 6 uur per dag. Met behulp van een gerichte vragenlijsten werden de resultaten verkregen.

### Resultaten


#### Onderzoeksgroep

- 24 patiënten geïncludeerd
- Resultaten zijn gemeten op basis van vragenlijsten over:
  - A - oedeem
  - B - pijn

#### Oedeem (A)

- ✓ 92% rapporteerde oedeem op baseline
- ✓ 6 patiënten rapporteerde ernstige zwelling op baseline
- ✓ Na 6 maanden rapporteerden 2 patiënten nog ernstige zwelling


**A Swelling of the breast/ chest wall**  
according to EORTC QLQ-BR23

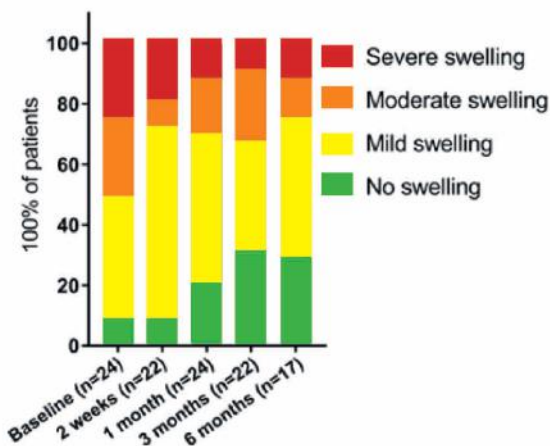

#### Pijn (B)

- ✓ 23 patiënten rapporteerden pijn op baseline
- ✓ 6 patiënten rapporteerden ernstige pijn op baseline
- ✓ Na 3 maanden rapporteerden drie patiënten nog matig tot ernstige pijn

**B Pain of the breast/ chest wall**  
according to EORTC QLQ-BR23

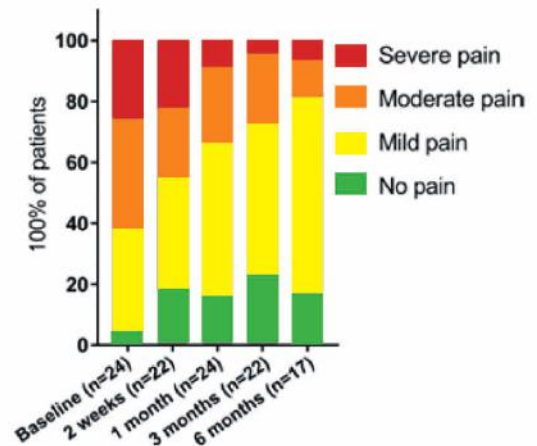

### Conclusie & discussie

Ondanks de geringe onderzoeksgroep (n=24), kan geconcludeerd worden dat het Thuasne compressievest mogelijk een acceptabele oplossing is voor afname van zwelling en pijnbeleving. Er is een aantoonbare vermindering zichtbaar in het gerapporteerde oedeem en pijn na behandeling met een compressievest. De grootste afname van oedeem en pijn is zichtbaar na 3 maanden dragen van het compressievest.

**Heeft deze whitepage jouw interesse gewekt en wil je er meer van weten?**

Mail ons: [info@thuasne.nl](mailto:info@thuasne.nl)

**BESTEL FORMULIER COMPRESSIEHULPMIDDELEN CONFECTIE**

Praktijk:	Aanmeter:	Datum:
Adres:	Tel.:	Order ID:

## **REDUCTIEFASE / ZWACHTELS**

<b>Aantal</b> <i>(vul altijd het gewenste aantal in)</i>	<b>Productspecificaties</b> <i>(selecteer de juiste specificaties)</i>	<b>Z-Index</b>
<input type="checkbox"/> Katoenen korte-rekzwachtel	11 cm x 4 m	15520056
<input type="checkbox"/> Mobiderm pad kleine blokjes (5 mm)	25 cm x 1 m	15778649
<input type="checkbox"/> Mobiderm pad grote blokjes (15 mm)	25 cm x 1 m	15778657
<input type="checkbox"/> Mobiderm verband kleine blokjes (5mm)	10 cm x 3 m	17112311
<input type="checkbox"/> Mobiderm verband grote blokjes (15mm)	10 cm x 3 m	15778665
<input type="checkbox"/> Biflexideal	3 cm x 5 m	16135725
<input type="checkbox"/> Biflexideal	6 cm x 5 m	15686914
<input type="checkbox"/> Biflexideal	8 cm x 5 m	15686922
<input type="checkbox"/> Biflexideal	10cm x 5 m	15686930
<input type="checkbox"/> Biflex 16+ light zwachtel	8 cm x 3 m	13624458
<input type="checkbox"/> Biflex 16+ light zwachtel	8 cm x 5 m	15735729
<input type="checkbox"/> Biflex 16+ light zwachtel	10 cm x 3 m	15735583
<input type="checkbox"/> Biflex 16+ light zwachtel	10 cm x 4 m	15735621
<input type="checkbox"/> Biflex 17+ light zwachtel	8 cm x 4 m	13624555
<input type="checkbox"/> Biflex 17+ light zwachtel	10 cm x 3 m	13624547
<input type="checkbox"/> Biflex 17+ light zwachtel	10 cm x 4 m	13624563
<input type="checkbox"/> Practic Biflex 16+ zwachtel	8 cm x 3 m	13624407
<input type="checkbox"/> Practic Biflex 16+ zwachtel	8 cm x 4 m	13624423
<input type="checkbox"/> Practic Biflex 16+ zwachtel	10 cm x 3 m	13624504
<input type="checkbox"/> Practic Biflex 16+ zwachtel	10 cm x 4 m	13624431
<input type="checkbox"/> Practic Biflex 17+ zwachtel	10 cm x 3 m	15736059
<input type="checkbox"/> Practic Biflex 17+ zwachtel	10 cm x 4 m	15736067
<input type="checkbox"/> Kit Biflex	Maat: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	.....

**BESTEL FORMULIER COMPRESSIEHULPMIDDELEN CONFECTIE**

Praktijk:	Aanmeter:	Datum:
Adres:	Tel.:	Order ID:

## ONDERHOUDSFASE / POINT PRESSURE DEVICE / DRUKKLEDING

Aantal <i>(vul altijd het gewenste aantal in)</i>	Productspecificaties <i>(selecteer de juiste specificaties)</i>	Z-index
<input type="checkbox"/> Mobiderm Autofit been (AD)	<input type="checkbox"/> kort <input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/> extra lang <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	.....
<input type="checkbox"/> Mobiderm Autofit been (AG)	<input type="checkbox"/> kort <input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/> extra lang <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	.....
<i>Advies: Bij oedeem in de voet, meet ook een cicatrex skin teenkap aan.</i>		
<input type="checkbox"/> Mobiderm handschoen m. vingers	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	16187229
<input type="checkbox"/> Mobiderm handschoen z. vingers	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	16187237
<input type="checkbox"/> Mobiderm Standard arm	<input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1+ <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2+ <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3+ <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4+ <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5+	15778630
<input type="checkbox"/> Mobiderm Autofit arm	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	16187210
<i>Advies: Bij oedeem in de hand, meet ook een cicatrex skin handschoen aan.</i>		
<input type="checkbox"/> Mobiderm Short	<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	.....
<input type="checkbox"/> Mobiderm compressie BH	<input type="checkbox"/> Cup A/AA <input type="checkbox"/> Cup B/C <input type="checkbox"/> Cup D/E <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	.....
<i>Standaard advies is om een extra Mobiderm pad te bestellen bij de Mobiderm compressie BH</i>		+ 15778649
<input type="checkbox"/> Cicatrex skin teenkap	<input type="checkbox"/> caramel <input type="checkbox"/> zwart <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex skin handschoen kort	<input type="checkbox"/> caramel <input type="checkbox"/> zwart <input type="checkbox"/> open vingers <input type="checkbox"/> gesl. vingers <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex skin handschoen lang	<input type="checkbox"/> caramel <input type="checkbox"/> zwart <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex Contour legging (m. buik)	<input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> 2XL <input type="checkbox"/> 3XL <input type="checkbox"/> 4XL	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex Contour legging (z. buik)	<input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> 2XL <input type="checkbox"/> 3XL <input type="checkbox"/> 4XL	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex Gordel	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex Bermuda	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex Capri	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex legging	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex hoofdverband	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex partieel hoofdverband	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex open hoofdverband	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex oorverband	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex buikverband	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex vest zonder mouwen	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex sleeve	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex short sleeve	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8	.....
<input type="checkbox"/> Cicatrex long sleeve	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	.....

# Mobiderm Arm

**THUASNE**



## Patiëntgegevens

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Nieuwe bestelling

Nabestelling, labelnr: \_\_\_\_\_

Aanpassingen

Naam praktijk: \_\_\_\_\_

Leveradres:

Straat, Postcode, Plaats

Contactpersoon \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

**Alle gegevens zijn verplicht** voor levering van dit maatwerk product. Deze gegevens zijn nodig om het maatwerk product in het order proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

**Bij voorkeur foto's maken van voor- en zij aanzicht met de markeringstekens van maatname**

**RECHTS**

**LINKS**

Gebruik één formulier per product

### Modellen

- Arm zonder handschoen met grote blokken (15 mm)
- Arm met handschoen en duim. Grote blokken (15 mm) op de arm en kleine blokken (5 mm) op de hand
- Arm met handschoen zonder duim. Grote blokken (15 mm) op de arm en kleine blokken (5 mm) op de hand

### Opties

- Siliconenboord (3mm)
- Opening met klittenband (positie intekenen)

### Opmerkingen




.....

.....

.....

.....

### Vooraanzicht

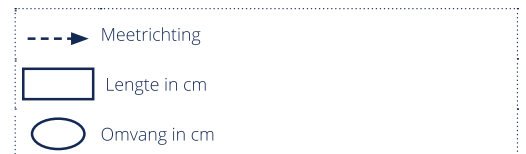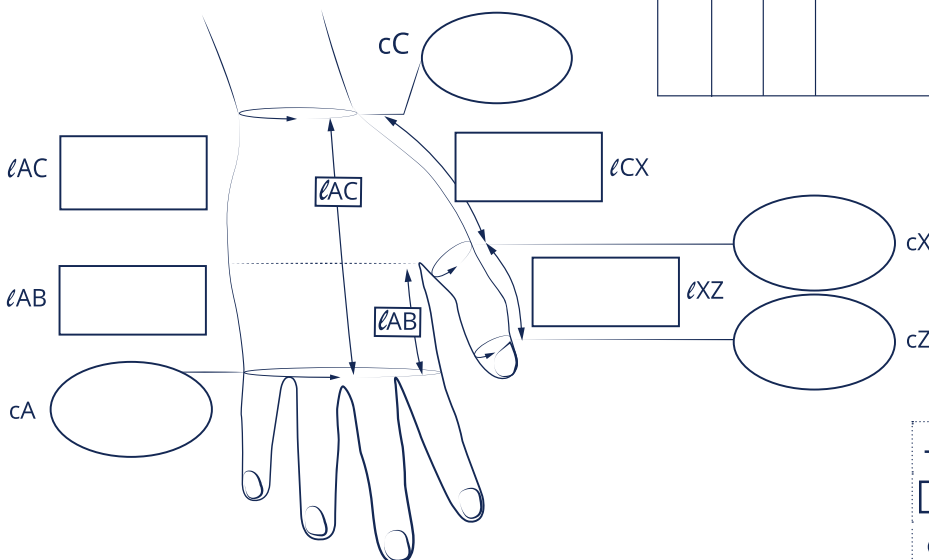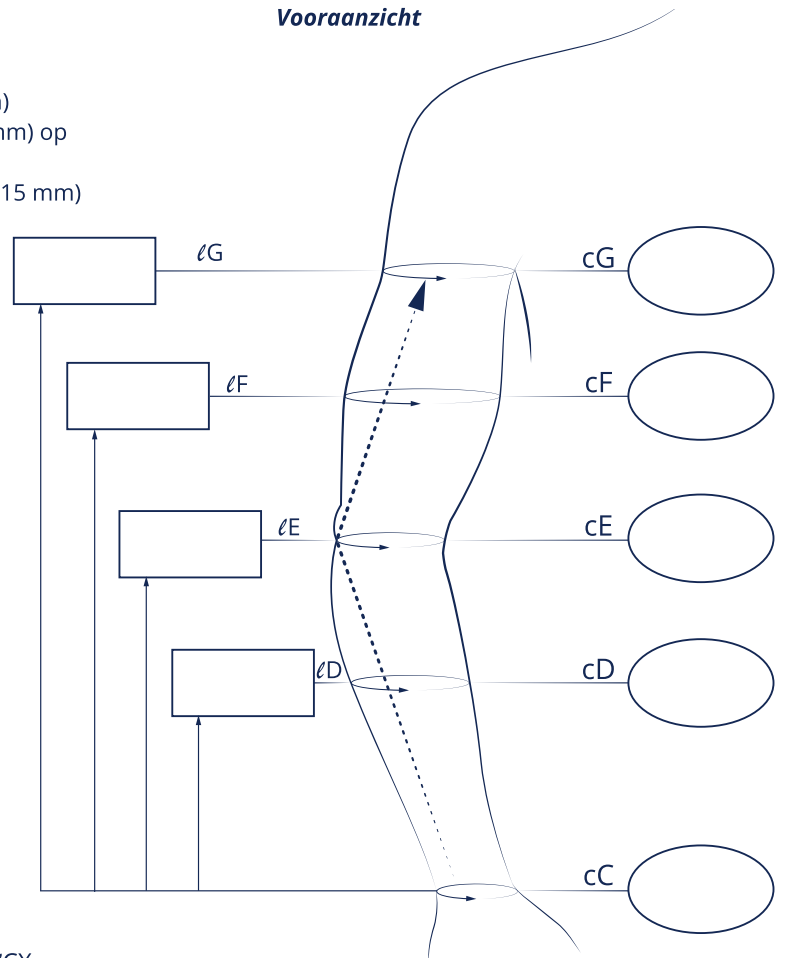

# Mobiderm Been



**Patiëntgegevens**

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

**Naam praktijk:** \_\_\_\_\_

**Leveradres:**  
Straat, Postcode, Plaats \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

- Nieuwe bestelling
- Nabestelling, labelnr: \_\_\_\_\_
- Aanpassingen

**Alle gegevens zijn verplicht** voor levering van dit maatwerk product. Deze gegevens zijn nodig om het maatwerk product in het order proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

**Bij voorkeur foto's maken van voor- en zijaanzicht met de markeringstekens van maatname**

**Modellen**

- |                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Onderbeen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Been      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Opties**

- Alleen kleine blokken (5 mm)
- Alleen grote blokken (15 mm)
- Grote blokken (15 mm) op been en kleine blokken (5 mm) op voet

**Opties**

- Siliconenboord 3cm (bovenzijde)
- Opening met klittenband (positie intekenen)

**Opties onderzijde**


- Open voet
- Gesloten voet

**Opmerkingen**

.....

.....

.....

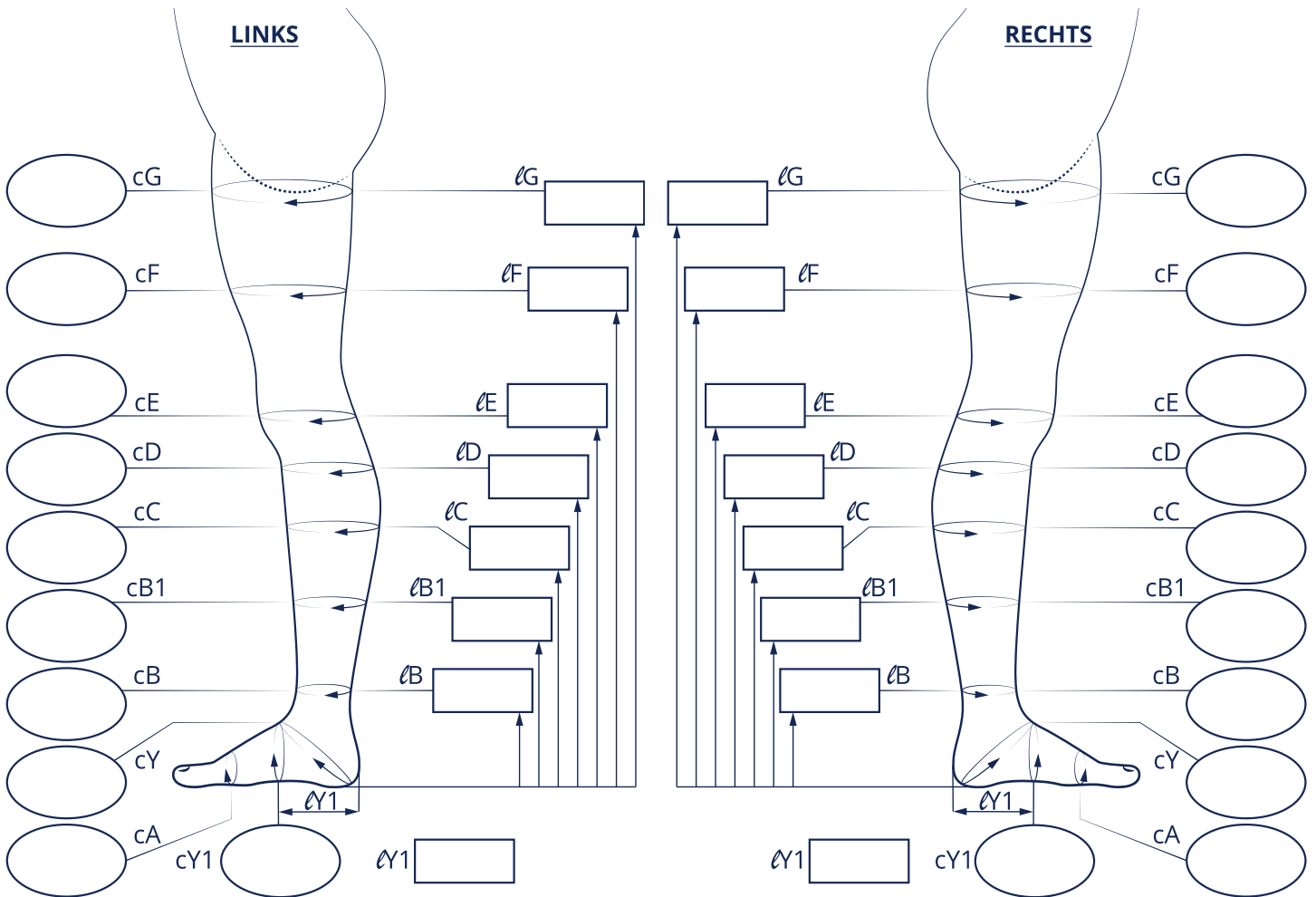

**Gewenste voetlengte:**

Binnenzijde (lA)	_____
Buitenzijde (lA1)	_____



**Gewenste voetlengte:**

Binnenzijde (lA)	_____
Buitenzijde (lA1)	_____



# LYMPHATREX VEST®



Naam praktijk \_\_\_\_\_  
 Contactpersoon \_\_\_\_\_  
 Telefoon \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_

## Patiëntgegevens

Naam: \_\_\_\_\_  
 Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
 Man  Vrouw

- Eerste verstrekking  
 Herhaling, evt. labelnr: \_\_\_\_\_

### Afleveradres:

Naam \_\_\_\_\_  
 Straat + huisnummer \_\_\_\_\_  
 Postcode / Plaats \_\_\_\_\_

**Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.**  
 Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het order-proces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

Aantal	Materiaal	Vest ZONDER armen	Z-index:	Vest MET armen	Z-index:
___ Stuk	<input checked="" type="radio"/> Poly	<input type="radio"/> Beige	<b>15647730</b>	<input type="radio"/> Beige	<b>15647749</b>
		<input type="radio"/> Zwart	<b>15647811</b>	<input type="radio"/> Zwart	<b>15647838</b>
		<input type="radio"/> Caramel*	<b>15647730</b>	<input type="radio"/> Caramel*	<b>15647749</b>
		<input type="radio"/> Antraciet*	<b>17084105</b>	<input type="radio"/> Antraciet*	<b>17084113</b>
		<input type="radio"/> Jeans*	<b>17084121</b>	<input type="radio"/> Jeans*	<b>17084148</b>
		<input type="radio"/> Blauw*	<b>17084156</b>	<input type="radio"/> Blauw*	<b>17084164</b>
		<input type="radio"/> Rood*	<b>17084172</b>	<input type="radio"/> Rood*	<b>17084180</b>

\* Alleen poly

### Lengtematen basis vest:


- 4: .....cm Sternum - oksellijn  
 6: .....cm Sternum - onderste rib  
 8: .....cm Sternum - taille  
 10: .....cm Sternum - bekken  
 11: .....cm Schouder links  
 13: .....cm Schouder rechts  
 37: .....cm Lengte vest

### Omvangsmaten basis vest:

- 1: .....cm Hals (Sternum & C7)  
 3: .....cm Thorax (oksellijn)  
 5: .....cm Thorax (onderste rib)  
 7: .....cm Taille  
 9: .....cm Bekken  
 12: .....cm Oksel links  
 14: .....cm Oksel rechts

### Wil je een vest met lange mouwen?

Neem dan contact op met onze customer service of met je accountmanager

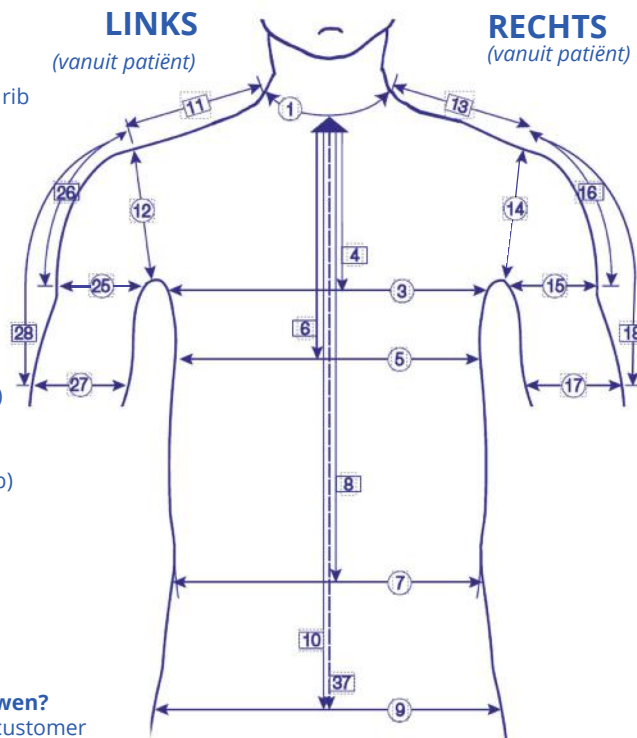

**Stuur de volgende foto's mee:**  
**Voorzijde, rechterzijde, linkerzijde en achterzijde thorax**  
 (Neem de foto's zonder het hoofd i.v.m AVG)

### Extra lengtematen (vest met mouwen)

- 16: .....cm Schouder - oksellijn rechts  
 18: .....cm Schouder - mid biceps rechts  
 26: .....cm Schouder - oksellijn links  
 28: .....cm Schouder - mid biceps links

### Extra omvangsmaten (vest met mouwen)

- 15: .....cm Bovenarm proximaal rechts  
 17: .....cm Bovenarm midden rechts  
 25: .....cm Bovenarm proximaal links  
 27: .....cm Bovenarm midden links

### Speciale maatvoering en opties

Halsuitsnede voor \_\_\_\_\_ cm vanaf borstbeen  
 Halsuitsnede achter \_\_\_\_\_ cm vanaf C7 halswervel  
 Breedte van de schouderbanden \_\_\_\_\_ cm.  
 alleen van toepassing bij een vest zonder armen

### Sluiting

- Ritssluiting met H/O  
 Ritssluiting  
 Haken/ogen

### Boord onderzijde

Z-index: **15648362**

- Siliconen band 3 cm  
 Siliconen band 5 cm  
 Elastische band 5 cm


### Cup per stuk

Links  Rechts Z-index: **15648214**

### Epithese hoes per stuk

Links  Rechts Z-index: **15648257**

Merk en type prothese: \_\_\_\_\_ Maat: \_\_\_\_\_

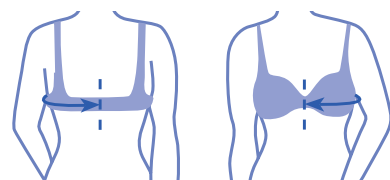

Omvang wervelkolom tot borstbeen

Links \_\_\_\_\_ cm Rechts \_\_\_\_\_ cm

Grootte van BH: \_\_\_\_\_

## Patiëntgegevens

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Man  Vrouw

Naam praktijk \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Afleveradres: Naam

Straat + huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode / Plaats \_\_\_\_\_

Eerste verstrekking

Herhaling zonder wijziging, labelnr: \_\_\_\_\_

Herhaling met wijzigingen

**Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.**  
Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het orderproces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

### Aantal

\_\_\_\_ Stuk

### Uitvoering

FT  Z-index: **15742482 + 15742520 (2x)**

ET  Z-index: **15742482 + 15742539 (2x)**

CT  Z-index: **15742482 + 15742539 (2x)**

BT  Z-index: **15742482 + 15742539 (2x) + voetdeel (2x)** - zie opties

AT  Z-index: **15742482 + 15742539 (2x) + voetdeel (2x)** - zie opties

### Materiaal

Skin

Rigid

Nature woven

### Kleur

Beige

Rood

blauw\*


Zwart

Jeans

antraciet\*

Roze

\*alleen beschikbaar in Rigid

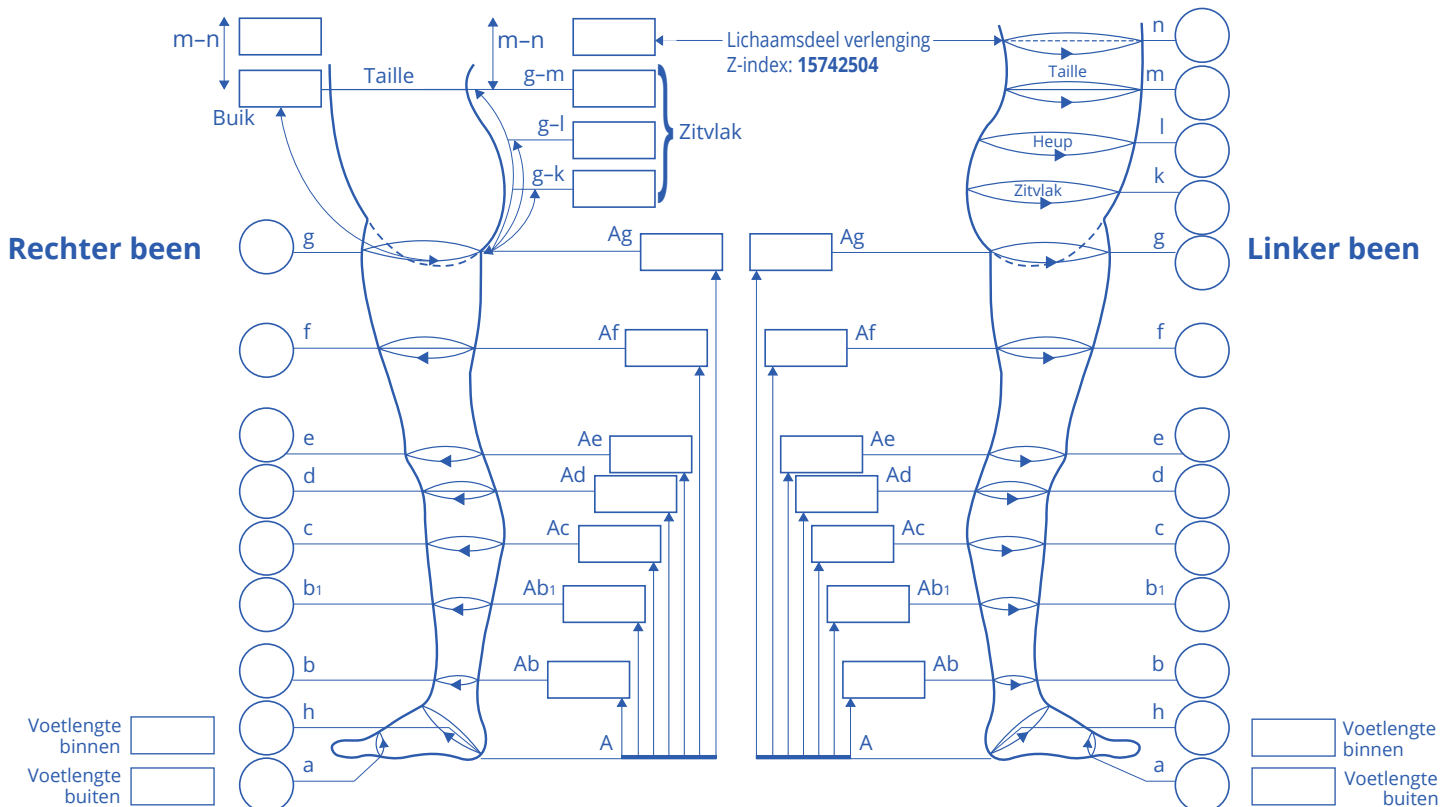

LET OP: Bij uitvoering AT - kies optie open of gesloten teen

LET OP: Bij uitvoering AT - kies optie aan open of gesloten teen

### OPTIES

Gesloten kruis Z-index: **15742547**

#### Afwerking taille

Standaard met elastiek met knoop (Lochgummi)

Siliconenband  3 cm  5 cm Z-index: **15742873**

Elastische tailleband 5 cm Z-index: **15742873**

Buikversteviging diagonaal Z-index: **15742512**

Liesversteviging Z-index: **17084202**

Lichaamsverlenging (m-n) Z-index: **15742504**

#### Afwerking per pijp

Siliconenband  3 cm  5 cm Z-index: **15742873**

### Voetstuk met:

Open teen Z-index: **15742563**

Gesloten teen Z-index: **15742598**

Sluiting Z-index: **15742865**

Lengte \_\_\_\_\_ cm Van: \_\_\_\_\_ tot: \_\_\_\_\_

Ritssluiting

#### Positie van de sluiting

opgenaaid  ingenaaid  voor  achter

Haken / Ogen  rechts  links

### Voering ingenaaid

100 - 249 cm<sup>2</sup> Z-index: **17084075**

Alleen bij Cicatrex skin voor vrouw

# LYMPHATREX<sup>®</sup> ARM

## Patiëntgegevens

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Man  Vrouw

Naam praktijk \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Afleveradres:


Naam \_\_\_\_\_

Straat + huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode / Plaats \_\_\_\_\_

**Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.**  
Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het orderproces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

$l$  = lengtemaat  
 $c$  = omvangmaat

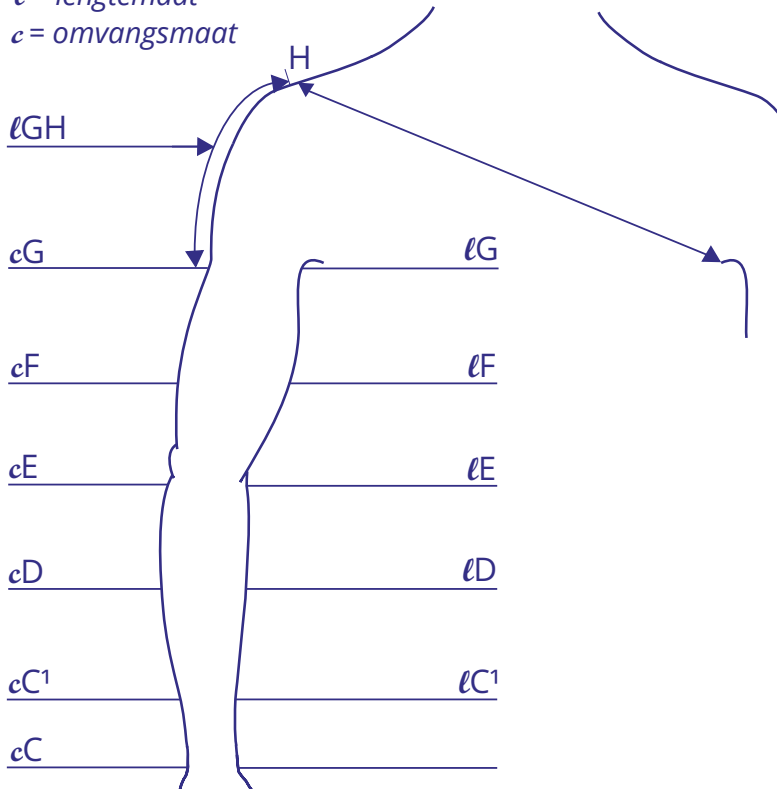

Lengtematen worden aan de binnenzijde van de arm gemeten

<b>Aantal</b> ___ Stuk	<b>Uitvoering</b> <input type="checkbox"/> CG <input type="checkbox"/> C1G <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> AC1 <input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> AG
<b>Arm:</b> <input type="checkbox"/> links / <input type="checkbox"/> rechts	<b>Kleuren</b> <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> zwart <input type="checkbox"/> caramel <input type="checkbox"/> antraciet <input type="checkbox"/> jeans <input type="checkbox"/> blauw <input type="checkbox"/> rood <input type="checkbox"/> mint
<b>Materiaal / compressieklasse</b> <input type="checkbox"/> Poly KL 2	

**Bijzonderheden**  
 Futterstof (plek intekenen)  Polstermateriaal (plek intekenen)

**Afwerking algemeen**  
 schuine afwerking proximaal


Anatomisch geweven elleboog:  
 20° (standaard)  40°  60°  90°

**Afwerking boord**  
 Geen afwerking (volledig gebreid)  
Boord proximaal  
 Siliconen noppen 3 cm  
 Siliconen noppen 5 cm  
 Elastische boord 3 cm  
 Elastische boord 5 cm

Schouderkap met gordel, lengte gordel \_\_\_\_\_ cm  
Let op: lengtemaat GH opgeven

**Opmerking**  
\_\_\_\_\_

## Hand

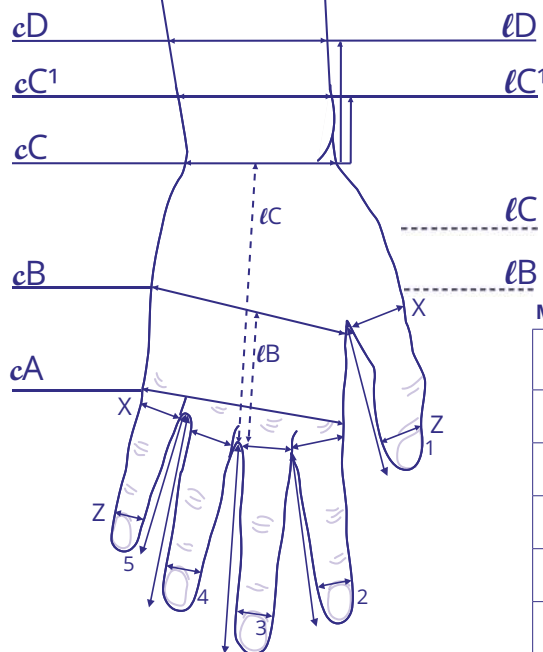

<b>Aantal</b> ___ Stuk	<b>Uitvoering</b> <input type="checkbox"/> Handschoen zonder vingers <input type="checkbox"/> Handschoen met vingers In combinatie met armkous <input type="checkbox"/> gescheiden <input type="checkbox"/> aan één stuk
<b>Hand:</b> <input type="checkbox"/> links / <input type="checkbox"/> rechts <b>Vinger:</b> <input type="checkbox"/> open / <input type="checkbox"/> gesloten	<b>Kleur</b> <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> zwart <input type="checkbox"/> caramel <input type="checkbox"/> antraciet <input type="checkbox"/> jeans <input type="checkbox"/> blauw <input type="checkbox"/> rood <input type="checkbox"/> mint
<b>Materiaal/compressieklasse</b> <input type="checkbox"/> Poly KL 2	

**Opmerking:** \_\_\_\_\_

### Maten vingers

	Omvang X	Omvang Z	Lengte
1			
2			
3			
4			
5			

**Afwerking**  
 Afwerking poreus (standaard)  
 Geen afwerking (volledig gebreid)  
 Siliconen noppen 3 cm  5 cm  
 Elastische band 3 cm  5 cm

**Opmerking:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Meet de lengte van de vinger aan de buitenzijde van de hand, behalve de pink



# LYMPHATREX<sup>®</sup> BEEN

## Patiëntgegevens

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Man  Vrouw

Naam praktijk \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Afleveradres:

Naam \_\_\_\_\_

Straat + huisnummer \_\_\_\_\_

Postcode / Plaats \_\_\_\_\_

**Alle gegevens zijn verplicht voor levering van dit maatwerkproduct.**  
Deze gegevens zijn nodig om het maatwerkproduct in het orderproces van Thuasne te traceren naar de juiste patiënt.

### Aantal

\_\_\_ Stuk

\_\_\_ Paar

### Uitvoering

AB1  AD  AF  AG  AT  FT  
 ET  CT  CTE  BT  ATE


### Materiaal / Compressieklasse

Poly KL 2  
 Poly Strong KL 2  
 Poly Strong KL 3

### Kleur

beige  caramel  
 zwart  antraciet  
 jeans  blauw  
 rood  mint

### Bijzonderheden :

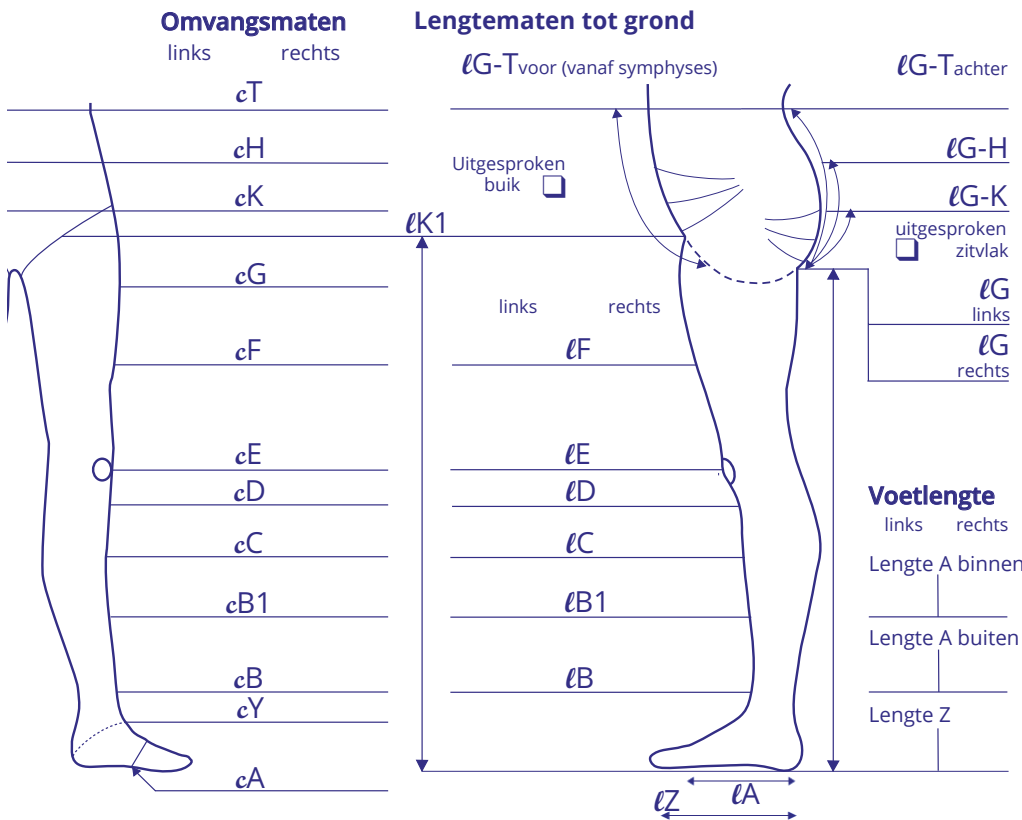

**Afwerking taille:**

Tailleband 5 cm, aangenaaid (Standard)  
 Siliconen noppen 3 cm  
 Siliconen noppen 5 cm  
 Elastische boord 3 cm  
 Elastische boord 5 cm  
 Knoopsgat elastiek  
 Heupbevestiging

**Kruis**  
Standaard geleverd met gesloten kruis  
 met compressie (Standard)  
 zonder compressie

**OPMERKING:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Afwerking been

#### Pijp

links rechts

- Poreuze band  
  Siliconen noppen 3 cm  
  Siliconen noppen 5 cm  
  Elastische band 3 cm  
  Elastische band 5 cm

#### Bovenzijde (AG/AF/AD/AB1)

links rechts

- Schuine afwerking  
  Siliconen noppen 3 cm  
  Siliconen noppen 5 cm  
  Elastische band 3 cm  
  Elastische band 5 cm  
  Siliconenboord 3/4 binnen

### Voet

links rechts

Y-hiel

### Teen

links rechts

- open, recht (let op: voetlengte A binnen opgeven)  
  open, schuin (let op: voetlengte Abinnen- en buiten opgeven)  
  gesloten, schuin, met compressie  
(let op: totaal voetlengte opgeven)  
  gesloten, schuin, zonder compressie  
(let op: totaal voetlengte opgeven)

### OPMERKING

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Knievorm

Links:  Standaard

anatomisch kniestuk  
 20° /  40° /  60° /  90°

Rechts:  Standaard

anatomisch kniestuk  
 20° /  40° /  60° /  90°