

# MAGNUM

## DENTAL

**SOODUSTUSED  
KUNI 55%**

1. veebruar -  
30. juuni 2026

**KAVO**  
Dental Excellence



Magnum Dental on KaVo ametlik edasimüüja ja hoolduspartner Eestis

# Millal on aeg puuriotsik välja vahetada?

Hambaravi puuriotsik on üks enim kasutatavaid töövahendeid kliinikus. Samas on see ka üks kriitilisemaid instrumente patsiendi ohutuse, ravitulemuse kvaliteedi ja arsti tööergonoomika seisukohalt. Küsimus ei ole pelgalt selles, kas otsik töötab, vaid kui töökindlalt, ohutult ja majanduslikult mõistlikult ta seda teeb.

Puuriotsiku seisukord mõjutab otseselt lõikamise täpsust, töötempot ja ravi kulgu. Seetõttu tasub otsiku hindamisel vaadata kaugemale nähtavast kulumisest ning hinnata tervikut: ohutust, töökindlust ja otsiku rolli igapäevases töövoos.

Alljärgnevalt toome välja peamised tunnused ja olukorrad, mille puhul tuleb otsiku seisukorda kriitiliselt hinnata.

## Millal tuleb sekkuda kohe? Ohutus ennekõike

**Kui puur ei püsi kindlalt otsikus:** loksub, on külgsuunas ebastabiilne, hakkab töö käigus lukustist aeglaselt välja liikuma või kui nupplukusti kaas kipub end lahti keerama, ei ole tegemist enam tavapärase kulumisnähtusega. See on otsene ohurisk, mis nõuab kohest sekkumist. Sellises olukorras tuleb otsik viivitamatult kasutusest kõrvaldada ja suunata kontrolli või asendamisele.

Lisaks subjektiivsele tunnetusele kehtivad ka selged tehnilised nõuded. Turbiinide ja kiirendavate, nn punase triibuga nurkotsikute puhul peab puuri hoidetugevus olema vähemalt 20 njuutonit, mis vastab ligikaudu 2 kg raskuse hoidmisele. Otsik, mis seda nõuet ei täida, ei ole enam tööks sobiv.

## Märgid, et otsiku töökindlus on langenud

Kui otsik ei kujuta küll otsest ohutusrisiki, kuid tema töö on muutunud ebaühtlaseks või ebamugavaks, tekib paratamatult küsimus: kas tegemist on veel hooldatava probleemiga või on otsik jõudnud oma elukaare lõppu.

### Ebastabiilne töö ja vibratsioon

Tugev vibratsioon, ebatavaline undav, vilisev või krigisev heli viitavad enamasti tõsisele kulumisele. Sageli ei ole probleem enam üksikus detailis, vaid kogu mehhanismi üldises seisukorras.

### Korduv kuumenemine

Kui otsik muutub töö käigus kiiresti soojaks või isegi kuumaks, ei ole see normaalne. Kuumenemine vähendab otsiku eluiga, võib muuta töö patsiendile ebamugavaks ning kiirendab mehhanismi edasist kulumist.

### Võimsuse langus

Kui sama ravitulemuse saavutamiseks tuleb rakendada järjest suuremat survet või lõikamise efektiivsus on selgelt langenud, on see selge märk kulumisest. Töö muutub aeglasemaks ja koormavamaks nii arstile kui ka otsikule endale.

Lisaks eeltoodule viitavad elukaare lõppemisele ka õhu- või veelekked, ebaühtlane pöörlemine ning ootamatud seisakud ravitöö keskel. Kõik need sümptomid viitavad sellele, et otsiku töökindlus ei ole enam tagatud.

### Kukkunud otsik = nähtamatu, kuid tõsine risk

Üks sagedasemaid probleeme on otsiku maha kukkumine. Eriti ohtlik on kukkumine kõvale pinnale, näiteks kivipõrandale. Selline löök võib põhjustada otsiku sees sisemisi kahjustusi, mikromõrased ja mehhanismi nihkeid, mis ei pruugi olla väliselt nähtavad. Tasakaalutus, vibratsioon või puuri lukusti ebausaldusväärne töö võivad ilmneda alles hiljem, sageli juba ravitöö käigus.

Seetõttu tuleks kukkunud otsikut alati käsitleda kui potentsiaalset riskitegurit ning lasta see professionaalselt üle kontrollida, isegi kui otsik näib esmapilgul töökorras.



# Kui palju puuriotsikuid on tegelikult vaja?

Puuriotsikute arv ühe hambaraviseadme kohta mõjutab otseselt nii otsikute eluiga, töö sujuvust kui ka kliiniku kulusid pikemas perspektiivis.

Euroopa kliinikutes on levinud praktika, et iga hambaraviseadme kohta on kasutuses vähemalt neli komplekti standardotsikuid: neli turbiinotsikut ja neli 1:1 ülekandega nurkotsikut. Sellel on selge praktiline põhjus. Tüüpiline töösükkel tähendab, et otsik:

on töös,  
seejärel läheb pesusse,  
vajab õlitamist,  
läbib steriliseerimise autoklaavis,  
peab pärast seda jahtuma ja kuivama.

Kolm komplekti tagavad pideva ringluse. Neljas komplekt on varuks, juhuks kui mõni otsik vajab ootamatut remonti või kontrolli. Selline süsteem võimaldab vältida kiirustamisest tingitud hooldusvigu ja tagab, et üks konkreetne otsik ei ole järjest mitu vahetust intensiivses kasutuses. Just sellise kasutusmudeli peale rajavad tootjad ka oma vastupidavus- ja garantilubadused.

Eestis on reaalsus paljudes kliinikutes teistsugune: sageli katab kogu tööpäeva vaid üks otsikukomplekt. See toob paratamatult kaasa kiirema kulumise, sagedasemad rikked ja töö katkestused.

Seetõttu ei ole rohkemate otsikukomplektide kasutamine kulu kulu pärast, vaid investeeering töökindlusse, rahulikku töökorraldusse ja väiksematesse remondikuludesse pikemas vaates.

## Remont või väljavahetamine? Majanduslik vaade

Igal puuriotsikul on oma elukaar. Üldistatult võib arvestada, et mõistlik kasutusiga jääb vahemikku 5–10 aastat, sõltuvalt otsiku kvaliteedist, kasutuskooormusest ja hoolduse korrektsusest.

Otsustamisel, kas otsikut remontida või välja vahetada, aitab lihtne majanduslik loogika:

**kui remondi maksumus jääb alla poole uue otsiku hinnast, on parandamine enamasti põhjendatud;  
kui remondikulu ulatub umbes kahe kolmandikuni uue otsiku hinnast, muutub remont majanduslikult küsitavaks, eriti vanema otsiku puhul.**

Heaks näiteks on turbiin, mille laagripesad on aastate jooksul tugevalt kulunud. Kuigi näiteks 350–eurone rootorpaketi vahetus võib ajutiselt parandada pöörlemist ja vähendada müra, ei pruugi otsiku üldine stabiilsus enam taastuda. Mõne aja pärast ollakse sageli uuesti sama otsuse ees.

Seetõttu tasub otsikusse investeerides vaadata mitte ainult ühte konkreetset remonti, vaid otsiku terviklikku seisukorda ja eeldatavat edasist eluiga. Mõnikord on uus otsik küll suurem kulu täna, kuid säästab aega, närve ja raha juba lähitulevikus.

### Ametlik hoolduspartner tagab kindla tulemuse

**Magnum Dental on KaVo ametlik hoolduspartner**, milleks on läbitud tootja poolt nõutud koolitused ning omandatud vastavad sertifikaadid. See tähendab, et hooldus ja remont toimuvad vastavalt KaVo tehnilistele standarditele, kasutades originaalvaruosi ja tootja poolt ette nähtud töövõtteid.

Hoolduse, kontrolli või nõustamise küsimustes pöörduge Magnum Dentali poole e-posti aadressil [dental@magnum.ee](mailto:dental@magnum.ee) või telefonidel 6501 945, 7371 647.



## EXPERTmatic

Maksimaalne vastupidavus  
Tõhus töö  
Usaldusväärsed funktsioonid

# -50%

### EXPERTmatic E25 L

(1:5) Carbide guide bush, glass rod light conductor with up to 25,000 lux, fast, precise work thanks to small head, flexible latch and exclusive ceramic ball bearings, internally channelled spray water and spray air, CoolHead technology, 3-port spray and replaceable spray filter. Mat. no. 1.007.5550

1662€  
831€



### EXPERTmatic E15 L

(5:4:1) Glass rod light conductor with up to 25,000 lux, efficient access thanks to even smaller head, 1-port spray and internally channelled spray water and spray air, easy to handle thanks to flexible latch. Mat. no. 1.007.5530

1351€  
675,50€



### EXPERTmatic E20 L

(1:1) Glass rod light conductor with up to 25000 lux, efficient access thanks to even smaller head, 1-port spray, internally channelled spray water and spray air, easy to handle thanks to flexible latch. Mat. no. 1.007.5540

1211€  
605,50€



### EXPERTtorque E677 L Mini

Small head: head height 12.2 mm, for standard and miniature burs, 27 watts of power, 3-port spray, glass rod light conductor, up to 65 dB(A) (average 59 dB(A)). Mat. no. 1.007.3600

1501€  
750,50€



### EXPERTtorque E680 L

Head height 13.6 mm, up to 29 watts of power, 4-port spray, glass rod light conductor, up to 62 dB(A) (average 59 dB(A)). Mat. no. 1.006.8700

1501€  
699€



### EXPERTtorque E680 LS

Like E680 L, fits Sirona click&go coupling. Mat. no. 1.006.4600

1501€  
750,50€



### EXPERTmatic E10 C

(1:1, without light) 1-port spray, internally channelled spray water and spray air, suitable for both hand-piece and contra-angle burs. Mat. no. 1.007.5560

771€  
385,50€



### EXPERTmatic E31 C

(5:4:1, without light) Keeps out polishing paste thanks to multiple seals, with thread and knob, for screw-type and snap-on polishing attachments. Mat. no. 1.008.4998

1046€  
523€



## SONICflex

Väga lai näidustuste ja kasutusvaldkondade spekter  
Õrn võnkumine, sobib ideaalselt tundlikele patsientidele

# -50%

### SONICflex LUX 2003 L

Classic air-driven sonic scaler designed for reliable everyday prophylaxis and periodontal treatments, offering proven performance and compatibility with standard SONICflex tips. Mat.No. 1.000.4243

2141€  
1070,50€



### SONICflex QUICK 2008 L

Newer-generation model with enhanced ergonomics and workflow efficiency, aimed at more versatile clinical use and improved handling. Mat.No. 1.005.9310

2141€  
1070,50€



### MASTERmatic M45 L

(1:4,2) Unique head/knee angle combination for great access and visibility in the molar area, CoolHead Technology, carbide guide bush, triple-gear technology and replaceable spray filter, 3-port spray, push-button chuck, ceramic ball bearings  
Mat. no. 1.014.0280

2262€  
1131€



### MASTERmatic M25 L

(1:5) Best high-speed contraangle thanks to a reduced head size (H: 13.5 mm; diameter 10.3 mm), ergonomic head/knee angle combination, carbide guide bush, triple-gear technology and replaceable spray filter, 3-port spray, push-button chuck, ceramic ball bearings.  
Mat. no. 1.009.3630

2262€  
1131€



Parim ravikvaliteet  
Võimalikult mugav ravi  
Kõrgeim patsiendirahulolu

**-50%**

### MASTERmatic M20 L

(1:1) For cavity and crown preparation, finishing, caries excavation and endodontic treatments, glass rod light conductor with up to 25,000 lux, replaceable spray filter, maximum treatment flexibility with 14 exchangeable heads  
Mat. no. 1.009.3620

1159€  
579,50€



### MASTERmatic M05 L

(1:5) Mini head for short-shaft burs, triple-gear technology and replaceable spray filter, 1-port spray, with push-button chuck, ceramic ball bearings, head 43% smaller than for GENTLEpower 25 LP, perfect for hard to reach areas and ideal for treating children and the elderly.  
Mat. no. 1.009.3640

2262€  
1131€



### MASTERmatic M07 L

(2:7:1) For caries excavation and prophylaxis applications, glass rod light conductor with up to 25,000 lux, replaceable spray filter, maximum treatment flexibility with 14 exchangeable heads  
Mat. no. 1.009.3610

1159€  
579,50€



### MASTERtorque M8700 L

Small head: head height 12.1 mm, 30 watts of power\*, up to 59 dB(A), for standard and miniature burs, 3-port spray M8700 L:  
Mat. no. 3.001.0000

1946€  
973€



### MASTERtorque M9000 LS

Like M9000 L, fits Sirona click&go coupling  
Mat. no. 1.008.5400

1999€  
999,50€



### MASTERtorque M9000 L

Head height 13.1 mm, maximum power up to 31 watts, up to 57 dB(A), 4-port spray  
Mat. no. 1.008.7900

1999€  
999,50€



### MASTERtorque M9000 L

Head height 13.1 mm, maximum power up to 31 watts, up to 57 dB(A), 4-port spray  
Mat. no. 1.007.9900

1999€  
999,50€



### MASTERtorque M9000 L

Head height 13.1 mm, maximum power up to 31 watts, up to 57 dB(A), 4-port spray  
Mat. no. 1.007.7100

1999€  
999,50€



## INTRAhead

Universaalne, paindlik ja kulutõhus süsteem laia kasutusulatusega

**-50%**

### INTRA head L68 (1:1)

With push-button chuck, for contra-angle burs, diameter 2.35 mm, with debris deflector disc, max. drive speed: 40,000 rpm  
Mat. no. 1.008.1833



525€  
262,50€

### INTRA head L68 B (1:1)

With push-button chuck, ball bearings, for contra-angle burs, diameter 2.35 mm, with debris deflector disc, max. drive speed: 40,000 rpm  
Mat. no. 1.008.1834



525€  
262,50€

### INTRA head L67 (2:1)

With push-button chuck, for contra-angle burs, diameter 2.35 mm, with debris deflector disc, max. drive speed: 40,000 rpm  
Mat. no. 1.008.1832



525€  
262,50€

### INTRA head L31 (2:1)

With thread and knob, for screw-type and snap-on polishing attachments, and multiple seals to prevent ingress of polishing paste, max. drive speed: 15,000 rpm  
Mat. no. 1.008.1824



525€  
262,50€

## DUOPack

Ühe otsiku hind kõige soodsam!  
Kõige kulutõhusam valik

**-55%**

### EXPERTmatic LUX E15L & E15L

Mat. no. 1.014.5559



2699€  
1214,55€

### EXPERTmatic LUX E25L & E25L

Mat. no. 1.014.5499



3323€  
1495,35€

### EXPERTmatic LUX E20L & E20L

Mat. no. 1.014.5505



2422€  
1089,90€

### EXPERTmatic LUX E25L & E20L

Mat. no. 1.014.5475



2799€  
1259,55€

### MASTERmatic LUX M25L & M25L

Mat. no. 1.014.5561



4523€  
2035,35€

## MASTERmatic LUX M25L & M05L

Mat. no. 1.014.5567

4523€  
2035,35€



## MASTERtorque LUX M9000L & M9000L

Mat. no. 1.014.5479

3999€  
1799,55€



## EXPERTtorque LUX E680L & E680L

Mat. no. 1.014.5478

2999€  
1349,55€



## SONICflex 2003L & 2003L

Mat. no. 1.015.3867

4282€  
1926,90€



## QUATTROcare KINGIPAKKUMINE



### OSTA QUATTROcare PLUS 2124 A

Mat. no. 1.008.3805

3x INTRAmatic short and 1x MULTIflex care coupling, with 1 can of QUATTROcare Plus Spray, care couplings for all the usual competitor instruments available as accessories, 12-month warranty.

2959€  
2367,20€

### VALI KINGITUS



EXPERTtorque  
E680 L

VÕI



EXPERTmatic  
E25 L

VÕI



QUATTROcare  
Plus Spray 2140P

### KaVo Spray 2112A

Universal lubrication spray for manual lubrication of KaVo instruments, environmentally friendly propellant, 500 ml.

49,90€  
29,99€



-30%

### KaVo QUATTROcare Plus Spray 2140P

Care spray for use in KaVo QUATTROcare PLUS lubrication devices, environmentally friendly propellant, 500 ml.

49,90€  
29,99€



-30%

## PROPHYflex 4 KINGIPAKKUMINE



1547€  
1082,90€

OSTA

### KaVo PROPHYflex 4

KAVO PROPHYflex 4 Wave 3.002.8000  
KAVO PROPHYflex 4 Lime 3.002.8200  
KAVO PROPHYflex 4 Flamingo 3.002.8800

VÕI

### KaVo PROPHYflex S 4

KAVO PROPHYflex S 4 Wave 3.004.5900  
KAVO PROPHYflex S 4 Lime 3.004.5930  
KAVO PROPHYflex S 4 Flamingo 3.004.5950  
Sirona liitega



### VALI KINGITUS

KaVo PROPHYflex Perio powder  
4x100G Glutsine  
VÕI  
KaVo PROPHYpearls neutral  
250G 60-70my

## RONDOflex plus 360 KINGIPAKKUMINE



2336€  
1168€

OSTA

### KaVo RONDOFLEX PLUS 360

Mat.No. 1.002.2179



### VALI KINGITUS

KaVo RONDOflex POWDER 27my 1KG  
VÕI  
KaVo RONDOflex POWDER 50my 1KG

## PROPHYflex 4 Propy Box -30%

### PROPHY BOX PROPHYflex 4 Lime

Mat. no. 1.013.5079



1560€  
1092€

### PROPHY BOX PROPHYflex 4 Flamingo

Mat. no. 1.013.5080



1560€  
1092€

### PROPHY BOX PROPHYflex 4 Wave

Mat. no. 1.013.5078



1560€  
1092€

## EXPERTSurg LUX KINGIPAKKUMINE

### OSTA EXPERTSurg LUX

The surgery system that offers high precision and power for greater safety and reliability. Work safely and with great precision thanks to one of the lightest and smallest micromotors and the unique self-calibration feature. Trust the high power levels available, based on 80 Ncm torque at the instrument, and save time thanks to intuitive programming of your work steps and parameters. Including INTRA LUX S600 LED, sterile hose set, motor cable and instrument tray.  
Mat. no. 1.008.3500



4598€  
3678,40€

### VALI KINGITUS

#### SURGmatic S201 XL Pro

Contra-angle (20 : 1) with light. Hexagon chuck system for a long service life and a max. torque of 80 Ncm.  
Mat. no. no. 1.013.7541



VÕI

#### SURGmatic S201 L Pro

Contra-angle (20 : 1). Max. torque of 55 Ncm.  
Mat. no. 1.007.7100



VÕI

#### SURGmatic S11 L

(1:1) With light. EXPERTgrip, for handpiece burs with a length of 44.5 mm, can also be used with contra-angle burs, external coolant connection  
Mat. no. 1.009.1010



## MASTERSurg LUX KINGIPAKKUMINE

### OSTA MASTERSurg LUX Wireless

The KaVo MASTERSurg LUX Wireless surgical device helps you carry out dental interventions at a whole new level. The underlying philosophy is to help you deliver great performance on a daily basis — thanks to convenient features that make a real difference. Including INTRA LUX S600 LED, sterile hose set, motor cable and instrument tray.  
Mat. no. 1.009.1200



6066€  
4852,80€

### VALI KINGITUS

#### SURGmatic S201 XL Pro

Contra-angle (20 : 1) with light. Hexagon chuck system for a long service life and a max. torque of 80 Ncm.  
Mat. no. no. 1.013.7541



VÕI

#### SURGmatic S201 L Pro

Contra-angle (20 : 1). Max. torque of 55 Ncm.  
Mat. no. 1.007.7100



VÕI

#### SURGmatic S11 L

(1:1) With light. EXPERTgrip, for handpiece burs with a length of 44.5 mm, can also be used with contra-angle burs, external coolant connection  
Mat. no. 1.009.1010



PROPHYpearls, PROPHYflex Powder ja PROPHYflex Perio Powder on täiuslikult koos-kõlas KaVo PROPHYflex 4 seadmega ning tagavad põhjaliku ja õrna ham-  
maste puhastuse.



## KaVo PROPHYpearls

Terviklikuks puhastuseks ja õrnaks profülaktikaks

Näidustus: värvimuutuste, katu ja biofilmi tõhus eemaldamine

Toimeaine: kaltsiumkarbonaat osakeste suurusega 60–70 µm, biolagunev, ei sisalda soola, suhkrut ega gluteeni

Eelised: ümmargune kuju ja ühtlane osakeste suurus tagavad optimaalse puhastuse minimaalse abrasiivsusega; saadaval 4 maitstes ja 2 neutraalses variandis


PROPHYpearls maitsetud (80 tk x 15 g)  
Neutraalne: tootekood 1.010.1826  
Virsik: tootekood 1.010.1829  
Apelsin: tootekood 1.010.1830  
Mustsõstar: tootekood 1.010.1831

PROPHYpearls Selection (4 x 20 tk x 15 g)  
Segu: münt, virsik, apelsin ja mustsõstar  
Tootekood: 1.013.4400

Pudelid (4 tk x 250 g)  
Neutraalne: tootekood 1.010.1798



Supragingivaalne

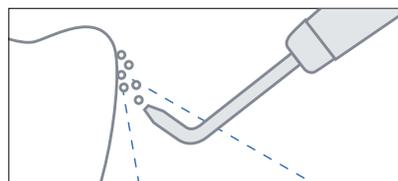

## KaVo PROPHYflex Powder

Kiire ja tõhus poleerimine

Näidustus: värvimuutuste, katu ja biofilmi väga tõhus eemaldamine


Toimeaine: naatriumvesinikkarbonaat osakeste suurusega 60–70 µm, vees lahustuv

Eelised: lihtne, kiire ja väga efektiivne protseduur;

Portsjonpakendid (80 tk x 15 g)  
Marja: tootekood 1.007.0015  
Kirs: tootekood 1.007.0016



Supragingivaalne

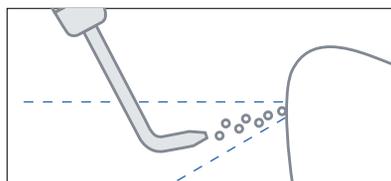

## KaVo PROPHYflex Perio Powder

Subgingivaalseks ja supragingivaalseks raviks

Näidustus: subgingivaalne biofilmi eemaldamine parodontaaltaskutest ning kroonide, sildade ja implantaatide puhastamine

Toimeaine: peen glütsiinipulber (18–22 µm), õrn igemekoele

Eelised: väga õrn ja vähese abrasiivsusega; sobib nii parodontaaltaskute efektiivseks puhastamiseks kui ka implantaatide supragingivaalseks puhastuseks

Pudelid (4 tk x 100 g)  
Tootekood: 1.009.3732


## Perio Kit PROPHYflex 4

10 periootsikut parodontaaltaskute ohutuks ja täpseks puhastamiseks; õhuke, stabiilne otsik sügavusmäärgistusega tagab hea kontrolli. Komplekt sisaldab ka Perio-adapterit, PROPHYflex Perio Powder pulbrit ja tarvikuid.

Perio Kit: tootekood 1.011.9403  
Täitekompl: tootekood 1.010.0287



Subgingivaalne

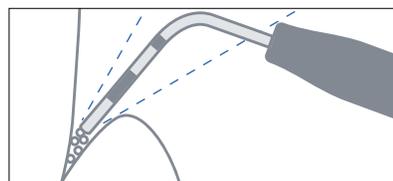

## Usaldusväärne hooldus KaVo instrumentidele

Hambaraviinstrumentide korrektne puhastus, kuivatamine ja määrimine on hädavajalik nende töökindluse, pika kasutusea ning patsiendiohutuse tagamiseks.



### KaVo CLEANspray / DRYspray

KaVo CLEANspray ja DRYspray on spetsiaalselt välja töötatud hambaraviinstrumentide tõhusaks ja ohutuks sise- ja välispindade puhastamiseks ning kuivatamiseks enne steriliseerimist.

CLEANspray tagab instrumentide sise- ja välispindade valku mitetefkseeeriva puhastuse, eemaldades jääkained enne desinfitseerimist ja steriliseerimist. See aitab vältida orgaanilise materjali kinnistumist ning toetab korrektset instrumentide hooldusprotsessi.

DRYspray võimaldab instrumentide sisekanalite kiiret ja efektiivset kuivatamist pärast puhastamist ja/või desinfitseerimist. Tõhus kuivatamine on oluline samm, et vältida korrosiooni, tagada seadmete töökindlus ning valmistada instrumendid ette järgmiseks steriliseerimistsükliks.

Pakend KaVo CLEANspray 2110 P (4 aerosoolballooni):  
Tootekood: 1.007.0579

Pakend KaVo DRYspray 2117 P (4 aerosoolballooni):  
Tootekood: 1.007.0580

KaVo CLEAN/DRYspray stardikomplekt 2116 P:  
Tootekood: 1.007.0573



### KaVo Spray

Universaalne pihustatav hooldusvedelik KaVo instrumentide käsitsi õlitamiseks. Keskkonnasõbralik propellant, maht 500 ml.

Pakend 2112 A (6 aerosoolballooni):  
Tootekood: 1.011.5721

Tarvikud:  
INTRA-spreiotsik (5 tk): tootekood 0.411.9911



### KaVo Quattrocare Plus Spray

Hooldusvedelik kasutamiseks KaVo QUATTROcare PLUS hooldus- seadmes. Keskkonnasõbraliku survegaasiga, maht 500 ml.

Pakend 2140 P (6 aerosoolballooni):  
Tootekood: 1.011.5720

**MAGNUM**  
DENTAL

[www.magnumdental.ee](http://www.magnumdental.ee)