



snapon
smile®

Bridge provisoire ultime



Unique, comme votre sourire



Facile, efficace, esthétique.
Le bridge provisoire ultime.



De nombreux dentistes considèrent les solutions temporaires comme l'un des aspects les plus difficiles de la restauration dentaire.

Snap-On Smile n'est pas uniquement un bridge provisoire, il procure aussi une réelle satisfaction fonctionnelle et esthétique aux patients.

Snap-On Smile s'adapte aux dents d'origines et se clipse dessus, sans adhésif ni ciment. Il n'y a aucun impact sur la gencive et il ne recouvre pas le palais, ce qui induit un aspect très naturel.

Pour les patients encore hésitants à s'engager sur des traitements de restauration définitive, Snap-On Smile leur permettra, en attendant, de retrouver confort et sourire.

- ✓ SANS PRÉPARATION DES DENTS NATURELLES
- ✓ DVO* IMMÉDIATEMENT RETROUVÉE (*dimension verticale d'occlusion)
- ✓ AMÉLIORATION COSMÉTIQUE
- ✓ PHASE D'ATTENTE : IMPLANTS, FACETTES, ETC.
- ✓ CLIPSÉ SUR LES DENTS, SANS CROCHETS, SANS APPUI SUR LES TISSUS MOUS




"C'est facile, indolore et vraiment très pratique."

— Amanda V., patiente

Adapté pour les cas implantaires

La protection parfaite pour vos sites implantaires

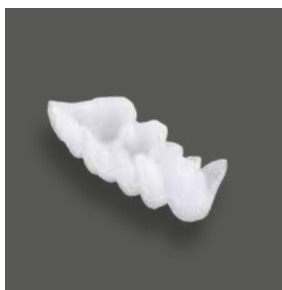

ARCADE PARTIELLE - 5 éléments ou moins

Lorsque Snap-It est utilisé dans le cadre d'une restauration implantaire, il assure simultanément aux patients :

- un remplacement temporaire fonctionnel et esthétique de leur dent,
- une protection de leur site implantaire,
- une possibilité de planifier financièrement l'ensemble de leur traitement.

Amélioration esthétique après la pose d'implants

Un sourire intact même pendant la phase de cicatrisation

AVANT



Cas clinique du
Dr. Gary Radz
Denver, CO

97%
d'utilisateurs
satisfaits !
Clinicians report*

81% des 31 praticiens évalués
disent qu'ils intégreraient Snap-On
Smile dans leur cabinet*.

Snap-On Smile a été utilisé par les praticiens
évalués pour :

- une restauration provisoire,
- une amélioration esthétique à court terme,
- une amélioration esthétique à long terme,
- une mise en place du diagnostic.

*Clinicians Report, Février, 2012 (Fondation indépendante à but non lucratif
d'évaluation de produits dentaires)

*"Je présente en premier lieu les soins
cosmétiques dentaires traditionnels,
mais souvent, la situation
économique des patients fait qu'ils
ne sont pas prêts à s'engager.*

*Nombre d'entre eux choisissent
Snap-On Smile comme une option
intermédiaire. Une fois qu'ils ont
expérimenté un sourire fonctionnel
et séduisant, ils décident de choisir
une solution permanente."*

— **Dr. Terri Alani** - Houston, Texas



— **Dr. David Little** - San Antonio, Texas



*" La restauration provisoire est un
moment difficile pour les patients
qui ont un traitement implantaire.
Ils ne repartent pas
immédiatement avec un beau
sourire. Imaginer l'absence,
ne serait-ce que d'une seule
dent, pour les patients est
inimaginable. La solution idéale
: utiliser Snap-On Smile."*

Une solution simple et abordable

Gardez le sourire de vos patients en toute circonstance !



ARCADE COMPLÈTE - 6 éléments ou plus

Snap-On Smile est un système abordable, non-invasif, complètement réversible qui peut facilement et sans douleur donner un beau sourire à vos patients.

Snap-On Smile est un excellent choix pour la correction des diastèmes, des dents mal alignées, colorées ou le remplacement de dents manquantes. Snap-On Smile constitue la réponse idéale pour tous les patients à la recherche d'une alternative confortable aux prothèses partielles et souhaitant "un sourire Hollywoodien" sans les frais et l'inconfort des procédures dentaires complexes et invasives.

Les cas cliniques Snap-On Smile

Quel que soit votre cas !



BRIDGE AMOVIBLE COSMÉTIQUE



AMÉLIORATION DU SOURIRE



AUGMENTATION IMMÉDIATE
DE LA DIMENSION VERTICALE



RESTAURATION PROVISOIRE
PRÉ ET POST-IMPLANTAIRE



"Les statistiques montrent que 50% de la population n'aime pas son sourire, mais refuse ou est incapable d'investir dans des choix de traitement réparateur permanent."

— Dr. Marc Liechtung - New York - Inventeur Snap-On Smile

- ✓ Système de rétention sur les dents naturelles (système de clipsage)
- ✓ Fabriqué en résine acétal cristallisée, très résistante à la compression et à la chaleur
- ✓ Flexible, s'adapte parfaitement aux limites gingivales
- ✓ Ne se tache pas, n'absorbe pas les pigments des aliments, des boissons et des odeurs
- ✓ Durée de 1 à 3 ans
- ✓ Garantie 1 an
- ✓ Permet aux patients d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire


Conception du Snap-On Smile®

Pas de crochets, pas de couverture palatine et aucun adhésif

Résine acétal cristallisée

L'appareil Snap-On Smile® est fabriqué à partir de résine acétal cristallisée. Ce matériau est très résistant et a une légère flexibilité.

Grâce à la durabilité de cette résine spécialisée, l'appareil Snap-On Smile® dure environ 1 à 3 ans et peut-être plus avec des soins appropriés.

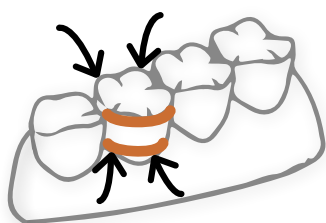

La rétention des appareils Snap-On Smile® est faite sur les dents d'origine et ne nécessite pas de crochets, pas de couverture palatine et pas d'adhésif.

Son élasticité permet à l'appareil de gagner en rétention par «flexion» sur les hauteurs et les contours des dents existantes.

Votre teintier Snap-On Smile®

Teintes disponibles pour Snap-On Smile

Un guide de teinte dédié à Snap-On Smile a été créé pour un meilleur revêtement personnalisé des dents.

Choisissez parmi les 12 teintes la couleur des dents de vos patients pour garantir un résultat esthétique optimal.

La teinte disponible la plus claire est S1.



Teintes ¹ Snap-On Smile®	Equivalences ² teintier céramique
S1	OM1 / BL1
S2	OM2 / BL2
S3	OM3 / BL3
S4	AO-A1 / BL4
S5	A1
S6	A2
S7	A3,5 - A4
S9	B0 Opaque
S10	B2
S13	AB1
S17	D2
S20	3M1


¹ Référentiel pour teintes Snap-On Smile®
² Equivalence de teinte : VITA toothguide 3D-MASTER with bleachguide

Comment commander votre Snap-On Smile® ?

Toutes les étapes pour utiliser Snap-On Smile

1

Contactez-nous au
05.62.16.71.04
pour recevoir :

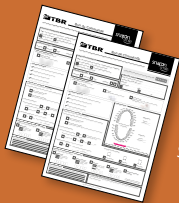

Bon de
Commande
Snap-On Smile

2

Pour chacun de vos Snap-On Smile,
complétez votre Bon de commande
accompagné des éléments
nécessaires (ex. empreintes, etc.)
et retournez l'ensemble à :



TBR GROUP
Service Snap-On Smile
24, impasse René Couzinet
31 500 Toulouse

3

Recevez
votre Snap-On Smile.

Redonnez enfin le
sourire à vos patients !



Les compléments indispensables Snap-On Smile®

Une large gamme de produits pour votre confort et celle du patient



Kit d'ajustement et finition



Accessoires
pour les patients

- Kit d'ajustement et finition : kit spécialement conçu pour les retouches du Snap-On Smile, des contacts occlusaux et de polissage, etc.
- Accessoires pour les patients : gel anti-bactérien, solution de nettoyage, appareil désinfectant, etc.
- Consultez-nous pour plus de renseignements !

Combo-Snap : le bridge sans crochets

- Bridge transitoire amovible esthétique, sans crochets.
- Indiqué pour les édentements bilatéraux postérieurs.
- Consultez-nous pour plus de renseignements !



— Lab. DenMat Italia
- Baronissi, Italie

Questions fréquentes sur le Snap-On Smile®

Q: Quelle est la différence entre une arcade entière Snap-On Smile et une arcade partielle Snap-It ?

R: Une arcade entière prend en considération 6 dents ou plus (Snap-On Smile) et une arcade partielle prend en considération 5 dents ou moins (Snap-It)

Q: Quelles sont les teintes disponibles pour un Snap-On Smile ?

R: Vous disposez d'un guide de teinte dédié de 19 teintes différentes. La teinte disponible la plus claire est S1.

Q: Est-ce que les dents mal alignées peuvent être traitées par Snap-On Smile ?

R: Oui, en jouant sur les épaisseurs de cette résine pour aligner les dents, l'épaisseur minimale étant de 0,5 mm.

Q: Est-ce que Snap-On Smile peut être utilisé immédiatement après extraction et/ou une implantation ?

R: Absolument. Toutefois, il est indispensable de signaler au laboratoire, avant l'extraction et/ou l'implantation, la position des dents concernées.

Q: Est-ce qu'un bridge cantilever peut être placé sur un Snap-On Smile ?

R: Pour un bridge cantilever, l'extension maximale est de 22 mm et une selle de prothèse interdentaire est recommandée pour plus de soutien.

Les bridges Snap-On Smile sont fabriqués par :



DENMAT ITALIA
di, Via S. Andrea, 73,
84081 Antessano SA, Italie
www.denmat.it

Les bridges Snap-On Smile sont disponibles en exclusivité chez :



TBR DENTAL GROUP
24, impasse René Couzinet - 31500 Toulouse
05 62 16 71 00 contact@tbr.dental
www.tbr.dental