



EMD flexy

Dai una nuova prospettiva al tuo lavoro

 **DENTALICA**
Into quality

EMD System



Possibilità estensione garanzia fino a 2 anni. Chiedici come.

Performanti da ogni punto di vista

Da più di un decennio **EMD SYSTEM** si occupa della cura e del buon funzionamento degli strumenti per l'odontoiatria.

Oggi propone al mercato una nuova gamma di manipoli e turbine in grado di soddisfare le più comuni necessità del clinico garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Chi meglio di **EMD SYSTEM** conosce questa tipologia di strumenti?



Superficie e design best grip

Design appositamente progettato per garantire una presa sicura anche per periodi prolungati, con mani guantate. La particolare lavorazione della superficie rende la manutenzione facile ed immediata.



Illuminazione Direct-LED

Il LED posizionato centralmente rispetto alla testina ed al corpo permette di illuminare in maniera naturale un'ampia area di lavoro, fornendo una visibilità eccezionale con una luce stabile di 25.000 LUX.



Cuscinetti in ceramica Made in Germany

Studiati per operare in modo silenzioso ed efficiente, permettono di lavorare in piena sicurezza con una potenza stabile e garantita nel tempo.



Dimensioni corrette della testina


Sono disponibili due dimensioni di testine, pensate per assicurare al clinico un'ottima visibilità senza dover rinunciare alla corretta potenza e velocità: scelta fra Standard e Miniature.



Raffreddamento spray garantito

Le 4 uscite spray orientate alla fresa permettono di garantire per tutto l'intervento un raffreddamento costante e sicuro.



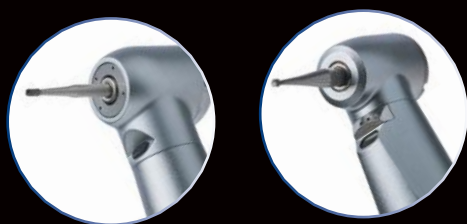

Gamma Flexy

Affidabilità, resistenza e durabilità

La nostra esperienza, la tua sicurezza nel tempo:
progettate per oggi e domani.


Gli strumenti che cambiano la tua prospettiva.

TURBINE


Disponibili nelle versioni con attacco NSK, KaVo e Bien-Air.

Standard 25W – 350.000 rpm.

Miniature 22W – 380.000 rpm.

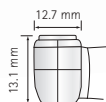

Standard

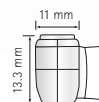

Miniature



Versione NSK - EMX4SLNK



Versione KaVo - EMX4SLKV



Versione Bien-Air - EMX4SLBI



Versione NSK - EMX4MLNK



Versione KaVo - EMX4MLKV



Versione Bien-Air - EMX4MLBI

ATTACCHI RAPIDI

Attacco rapido NSK



Versione NSK - EMX4NLED

Attacco rapido KaVo



Versione KaVo - EMX4KLED

MANIPOLI

Contrangoli indicati per le più comuni necessità dello studio, sono compatibili con tutte le frese CA del mercato.

Completamente autoclavabili sono molto resistenti a lungo termine. Con spray interno e blocco fresa a bottone.

Disponibili nella versione con luce o cieca.



Flexy 1:1 con luce

EMXTLIWFC



Flexy 1:1 cieco

EMXTLIWC

EMD System La strumentazione rotante è per noi una priorità da più di 10 anni.



CONSERVAZIONE IGIENICA

EMD SterilKit

Stop ai batteri

Il rischio di contaminazione biologica e di infezioni crociate è elevato per tutti gli strumenti rotanti. Il semplice passaggio in autoclave può non essere sufficiente. È necessario un pre-trattamento in grado di raggiungere le canalizzazioni più ridotte. **EMD SterilKit** è la soluzione: abbattimento del 99,99% di batteri e conseguente riduzione di oltre l'80% di avarie meccaniche.

Bastano 3 semplici step:

1. WL CLEAN: pulizia e decontaminazione
 2. WL CID: detersione e disinfezione
 3. WL DRY: espulsione dei residui
- Si consiglia la lubrificazione con EMD MicroLube HP a fine trattamento.

Prodotto / Descrizione	Codice
EMD STERILKIT Conservazione Igienica	EMDESKL026
ALPRO WL CLEAN 500 ML Detergente batteriostatico	EMDEAS001
ALPRO WL CID 500 ML Disinfettante	EMDEAS002
ALPRO WL DRY 300 ML Espulsore	EMDEAS003

CONSERVAZIONE IDRICA

EMD IdroKit

Stop al calcare

Lo spray degli strumenti rotanti è fondamentale per la salvaguardia della vita del dente. Un flusso idrico inferiore a 50 ml/min potrebbe comprometterla. Causa primaria della diminuzione del flusso è la riduzione del lume interno dei canali dell'acqua causata da calcare e microrganismi. **EMD IdroKit** previene la formazione del calcare garantendo un flusso idrico sempre corretto.

Bastano 3 rapidi step:

1. EMD MICROKAL: inibizione del calcare
 2. EMD MICRORINSE: risciacquo intensivo
 3. EMD MICROAIR: espulsione dei residui
- Si consiglia la lubrificazione con EMD MicroLube HP a fine trattamento.

Prodotto / Descrizione	Codice
EMD IDROKIT Conservazione Idrica	EMDEIKL028
EMD MICROKAL 200 ML Inibitore del calcare	EMDEES004
EMD MICRORINSE 200 ML Risciacquo	EMDEES005
EMD MICROAIR 200 ML Espulsore	EMDEES006

CONSERVAZIONE MECCANICA

EMD MicroLube HP

Lubrificazione garantita

Lubrificante dentale privo di solventi, con azione lubrificante dedicata che supera di ben 10 volte quella dei lubrificanti tradizionali. A bassissima viscosità penetra nei micro interstizi gabbia/sfere dei cuscinetti. Mantiene inalterata le sue proprietà lubrificanti anche dopo autoclavaggio.

Prodotto / Descrizione	Codice
EMD MICROLUBE HP 500 ML Lubrificante/Ricondizionante	EMDEES007
EMD MICROLUBE HP 200 ML Lubrificante/Ricondizionante	EMDEES008

ADATTATORI SETTORIALI

Le sistematiche EMD SYSTEM devono la loro efficacia anche agli indispensabili adattatori settoriali che permettono una corretta erogazione fino alla testina. Disponibili per turbine, contrangoli e Scaler.





Guardiamo avanti con gli occhi migliori. I vostri.



EMD SYSTEM è un marchio di:
DENTALICA S.p.A. - Via Rimini, 22 - 20142 Milano
T 02.895981 - F 02.89504249 - info@dentalica.com - www.dentalica.com

Numero Verde
800 70 71 72